



belulu® classy

## 使用说明书(中文)

衷心感谢您购买本公司产品。  
使用前,请仔细阅读注意事项及使用说明,  
以确保您能安全、放心地使用本品。  
另外,在本说明书的最后附带有保修证明,  
请您妥善保管。

### 1 安全注意事项 -安全正确地使用本品的必读指南-

使用前请仔细阅读本篇「安全注意事项」,以便您正确地使用本品。

为了防止您在使用时因操作不当而造成伤害自身、及他人财产的意外事故,我们制作了本注意事项。在此我们例举了各种操作错误以及有可能发生的情况,请您仔细阅读,并按照指示使用本品。

本说明书是保证使用者安全、正确地使用本品的重要资料,若您将本品借给他人或赠予他人,请确保能将本说明书一同转交。

#### 【术语及含义】

表示	意味
△危险	若违反此处所记载的事项进行使用,将有极大可能发生死亡或重伤的意外。
△警告	若违反此处所记载的事项进行使用,将有可能发生死亡或重伤的意外。
△注意	若违反此处所记载的事项进行使用,将有可能对人身或财产造成伤害。 ※财产伤害主要指对房屋、金钱或家畜、宠物等造成的伤害。

#### 【标记的含义】

	表示「危险・警告・注意」其中一项。具体内容可查看此标记附近的文字或图片。
	表示「禁止」。具体内容可查看此标记附近的文字或图片。
	表示「必须遵守的指示」(一定要遵守)。具体内容可查看此标记附近的文字或图片。

#### 使用前请阅读

#### △危险

•正在使用下列医疗电子器械的人士,请勿使用本品。  
○心跳起搏器体内植入式医用电子器材 ○人工心脏机等维持生命电子装置 ○心电图等装着式医用电子器材  
禁止 ○其他需要装置在体内的医疗电子器材 ※若使用本品,将可能造成医疗电子器械的勿操作,导致意外发生。

#### △警告

•符合下列情况的人士,请勿使用本品。  
○急慢性患者 ○热疹患者 ○血液循环障碍患者 ○皮肤病患者 ○血压异常的人士 ○恶性肿瘤患者 ○传染病患者  
○心脏病患者 ○经痛患者 ○多发性硬化症患者 ○患有紫斑病等容易内出血的病患者 ○有皮肤病史的人士  
○有糖尿病及其他引起皮肤干燥的过敏症患者 ○孕妇与刚结束生产的产妇 ○哺乳中产妇 ○患有癫痫的人士  
○患有面部痤疮的人士 ○瘢痕体质的人士 ○有特异感染性皮炎的人士 ○近期进行过隆胸的人士 ○有青春痘或炎症性皮炎的人士 ○过敏性体质或皮肤敏感的人士 ○对化妆品或化学纤维敏感的人士 ○类固醇类激素剂长期服用者或因过度干燥导致皮肤扩张的人士 ○因过敏有头部或眼睛后遗症的人士 ○患有眼疾(白内障、青光眼、视网膜剥落、眼底出血等)的人士 ○婴幼儿 ○无法自主控制自己行为的人士 ○生理期中的女士 ○患有其他疾病,正在接受医生治疗的身体状况异常的人士  
※可能会因意外造成皮肤或身体的伤害

#### 使用场所・电源

#### △警告

•本品采用非防水结构,为避免发生烫伤、触电等情形,请勿在浴室等湿气较重的场所使用。  
●请勿在厨房、暖炉周围等高温、有火的地方或车内、太阳直射的地方使用或放置本品,否则有可能造成触电等事故或故障。  
●请勿在连接线或插头附有灰尘或垃圾时使用,否则易造成火灾、触电、短路、烧伤等事故。

#### △警告

•请使用本品指定的电源适配器,并在规定的电压下使用,否则易造成火灾、触电、短路、烧伤等事故。  
●非充电时,请把充电连接线从机器上拔下来。插入插头时请不要拉扯连接线,请用手握住插头再从机器上拔下。  
必须遵守 若用力拉扯充电线,有可能造成电线被拉断或短路、触电等事故。

#### 使用前准备及使用时注意

#### △警告

•请按照本品的使用方法(脸部护理)进行使用,否则有可能引起身体不适。  
●请按照说明书所记载的使用方法进行使用,否则有可能造成身体不适或故障情况。  
●请按照本书所记载的使用时长与使用频率进行使用,否则可能引起身体不适。

•本品属于家用电器。请勿用商业用途。否则有可能引起事故或身体不适。  
●若发现机器或连接线有破损、故障、变形、折断、异常发热或插头松动等情况,请停止使用。否则有可能造成火灾、触电、烧伤等事故。  
●请用沾水的手指去触摸机器或连接线、插头,或试图拔下电源适配器。否则有可能造成触电、短路等事故。

#### △注意

•使用时,请遵守以下规定。  
○皮肤敏感的人士,为防止皮肤出现不适,在初次使用前,请在皮肤不显眼位置用最低档位短时间试用一次,并观察皮肤反应。确认无异常后才可使用。  
○若身上有金属制品接触3D按摩头,将有可能出现危险情况。请在使用前取下身上的饰品等金属制品。  
○进行除毛、脱毛的皮肤部位,当日不可使用本品。  
※若执意使用,将有可能出现皮肤红肿现象。  
●产品在通电状态下,请勿长时间放置不顾。否则有可能发生事故或危险。  
●在使用前请把操作按钮全部按一遍,确认机器可以正常工作后再进行使用。若发生损伤、异常等状况,请立即停止使用,并与本公司联系。请勿执意使用,否则有可能造成事故或身体不适。

#### △警告

•在使用本品后若感到疼痛或发生出疹子、皮肤发红、发痒或其他皮肤异常症状,请立即停止使用并联络本公司或专业医生咨询。请勿执意使用,否则有可能造成更严重的皮肤伤害或身体不适。  
●在使用本品时若发生机器产生异声或异常发热的情况,请立即停止使用并联络本公司进行维修检测。请勿执意使用,否则有可能造成事故伤害或故障。

#### 修理・保管

#### △警告

•请勿放置于儿童或无法自主表达意识的人士所能触及到的场所,否则有可能发生人身伤害或导致机器故障。  
●在修理本机时必须先切断电源,千万不可在机器充电中或工作中时进行修理,否则易有触电的危险。

•严禁购买者自行对本机或其附属品进行分解、改造或修理,否则将会有起火或工作状态异常而造成事故伤害的可能,本公司也将不对其进行免费保修。若本机发生工作不正常等任何异常情况,请立即与本公司联络。

#### △注意

•充电时请勿放置于高温、湿气重、摇晃不定或阳光直射的场所。请放置于阴凉、安全的地方,否则容易造成机器故障或缩短使用寿命。  
②若要丢弃本品,请您按照所在地区的条例规定进行回收处理。为了地球环境的美好,请勿对机器置之不理。  
●若要清洁本机及其附属品,请勿用稀释剂、精油、汽油等挥发油,或含药物、研磨剂的清洁剂和热水来擦拭,否则会引起变色或变形等的损伤。如果机身污垢较严重,可用软布沾稀释后的中性清洁剂并拧干后,轻轻擦拭机身。  
●请勿将本机及其附属品放置于加热器皿周围,或放入微波炉和高压容器内,否则易造成机器发热、起火、故障等的事情。  
●请勿让本机及其附属品承受高空坠落、敲打等强烈撞击。另外,若因上述原因造成了本机及其附属品的损伤,请停止使用,否则有可能造成事故或伤害。  
●请勿令本机及其附属品沾染水或用水清洗,否则将有可能因触电、短路造成事故或故障。

### 2 配套内容与各部位名称

\*附属配件及包装盒销售场合会有可能无预告变更请悉知。



适配器

充电线

固定橡皮圈

化妆棉

护肤镜

液晶显示屏

操作按键

3D按摩头

金属离子导通条

美容用LED灯

3D按摩头

【产品规格】  
充电时长: 4~8小时 输入: 5V/0.5A 使用电池: 锂电池  
高度: 180\*宽度45(按摩部分)\*厚度35mm(机身部分) 重量: 100g

【USB电源适配器规格】  
输入: 100~240V 50/60Hz 0.2A 输出: 5V/1A



●购买后第一次使用时或长时间未使用,机器会出现反应较为迟钝的情况,请先充满电。

●请勿关掉电源。

●将充电线的充电接口插入机身的充电口处,USB插头插入电脑或AC适配器的USB端口。

●充电指示灯亮红灯则表示正在充电。

※充电过程中机身会轻轻发热,属于正常现象。

●充电时间和机器工作时间的长短以实际使用情况为准。

●充电指示灯亮绿灯则表示完全充电,请注意及时拔下充电线。


●请勿充电过电。除充电情况外,请不要让机器长期处于连接USB电源的通电状态。

■充电时温应保持15~30℃之间,低温情况下充电会导致电池寿命的缩短,请在适宜的室温下进行充电。另外,在低于0℃的环境中充电速度会慢慢变慢。

■为了保护内置电池,即使长期不用,也要保持每月充电一次,防止过度放电。

■如果正常充电使用,但使用时间短,说明电池老化。

●液晶显示屏右下角电池容量显示为3格,电池格数为1或者0的情况下,请及时充电。

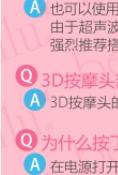


剩余量75~100%

剩余量50~74%

剩余量25~49%

剩余量0~24%

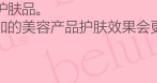


●购买后存放于阳光直射、高温和湿气重的场所。请存放于儿童无法触及的地方。

●请勿使用油剂、稀释剂等化学溶剂进行擦拭。

●请勿用水洗清洁本产品。

●如果正常充电使用,但使用时间短,说明电池老化。

●液晶显示屏右下角电池容量显示为3格,电池格数为1或者0的情况下,请及时充电。


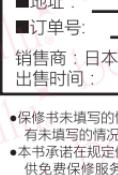


剩余量75~100%

剩余量50~74%

剩余量25~49%

剩余量0~24%

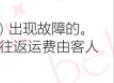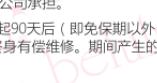

●请勿使用油剂、稀释剂等化学溶剂进行擦拭。

●请勿用水洗清洁本产品。

●如果正常充电使用,但使用时间短,说明电池老化。

●液晶显示屏右下角电池容量显示为3格,电池格数为1或者0的情况下,请及时充电。



剩余量75~100%

剩余量50~74%

剩余量25~49%

剩余量0~24%



●请勿使用油剂、稀释剂等化学溶剂进行擦拭。