

belulu~AquaRufa classic~

美・ル・ル アクアルファ クラシック

取扱説明書



この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。

警告

- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
- 本品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
- 充電アダプターのケーブルを引っ張ったり、濡れた手でコネクタ部分を触らないでください。
- ストーブ等高温になる場所で本品や電源アダプターを使用したり放置したりしないでください。
- 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
- 本品は完全防水ではありません。万一のやけどや感電、故障防止のため、浴室など湿気の多い場所での使用や、入浴しながらのご使用はお避けください。
- 万一、皮膚に異常が見られた場合は、本品を中止して医師に相談してください。
- 下記のリストをよくご確認ください、該当する方は本品を使用しないでください。
- 本品の分解、改造、お客様ご自身による修理などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は一切その責任を負いかねます。

注意

- 皮膚の弱い部分への過度のご使用はお避けください。
- 使用中、痛み等があった場合は、ご使用を中止してください。
- 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- 充電中以外は充電アダプターを本体から外してください。
- 本品の水洗いはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコール等の溶剤類で拭かないでください。
- 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造、お客様ご自身による修理などをされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

〈下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください〉

- 急性疾患 ●有熱性疾患 ●血圧異常 ●伝染病疾患 ●心臓疾患 ●医用電子器具を使用されている方（ペースメーカーなどの体内植込式医用電子機器、人工心肺などの生命維持用電子機、心電図などの装着型医用電子機器） ●皮膚ガン病歴がある方 ●糖尿病および他の疾患による皮膚異常疾患の方 ●皮膚のトラブル（アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、ニキビが化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌が敏感な方） ●化粧品による皮膚炎を起こしている方

〈下記の部位には使用しないでください〉

- 悪性腫瘍 ●切り傷 ●整形などでシリコンが使用されている部分 ●声帯部分 ●頭髮、目や耳の周り、粘膜などのデリケートゾーン

美・ル・ル アクアルファ クラシック 機能紹介

ウォーターピーリング

超音波振動でお肌についている水分をミスト状にし、毛穴の奥の汚れや皮脂、古い角質などを吹き飛ばしながら除去・洗浄します。

痛みや熱さも無く、スクラブや毛穴パックよりお肌にやさしい!

イオン導出(プラスイオンモード)

マイナスに帯電した汚れにプラスの微電流を流すことで、毛穴に詰まった汚れや黒ずみを吸着。さらに美容成分が浸透しやすいお肌に整えます。

イオン導入(マイナスイオンモード)

微弱電流により肌表面のバリアを弱め、美容液の有効成分をお肌の奥深くまで届けます。

通常の手によるパッティングでは届かない部分まで浸透させるので、いつもの美容液の効果が格段にアップします。

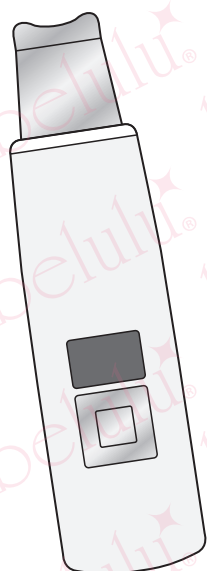
パッティング

マイクロカレント効果でお肌にハリを与えます。ターンオーバーを促しツルツル美肌に。


さらにうれしいリフトアップ効果も!

セット内容と製品仕様


※製品仕様や外観・内容は予告無く変更になる場合があります。




本体

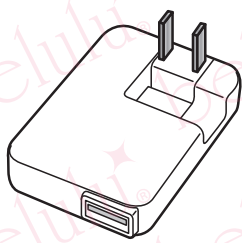

ACアダプター

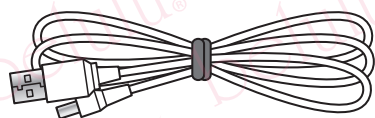

充電ケーブル

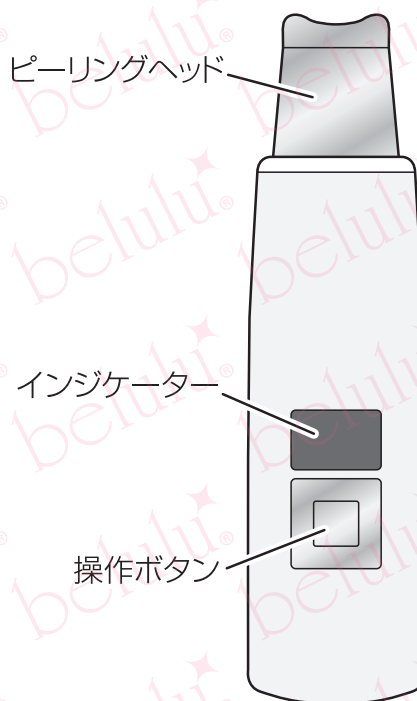

ピーリングヘッド

インジケータ

操作ボタン



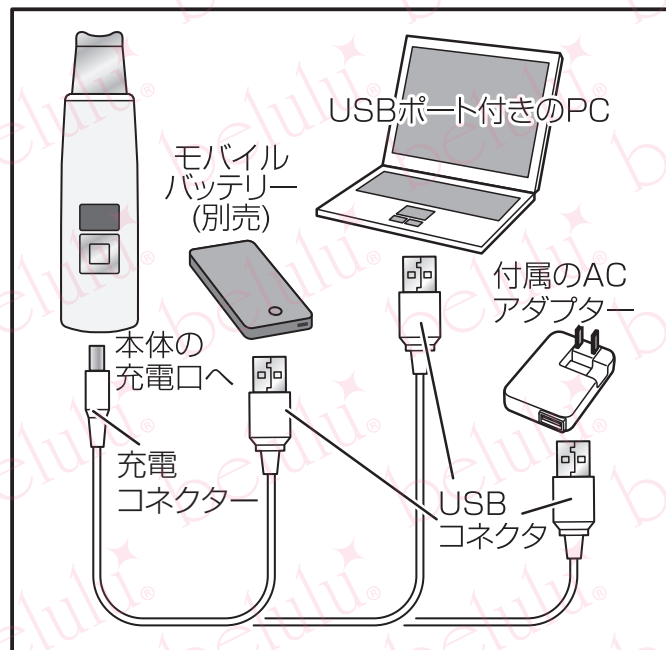
イオン誘導サイドバー

【充電アダプター仕様】

- 入力:AC100~240V 50/60Hz 0.15A
- 出力:DC5V/1.0A

充電方法

- ご購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合、パワー低下や稼働時間が短くなった場合は本体を充電してください。
- 充電ケーブルの充電コネクターを本体の充電口に、USBコネクターをパソコンや付属のACアダプター等のUSBポートに接続します。
- ※充電中は本体が多少熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電中はインジケータの「CHARGE」ランプが赤色に点灯します。
- 充電時間や稼働時間は、本製品の使用頻度によって異なります。
- 充電が完了するとインジケータの「CHARGE」ランプが消灯しますので、コネクターを外してください。
- 充電ケーブルを接続したままのご使用はできません。ご使用時は、必ず充電ケーブルを本体から外してください。
- 充電に適した室温は、15～30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温下で充電を行なってください。また、約0℃以下では充電できない場合があります。
- 内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合でも月に1回充電を行なってください。
- 正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。




ケアを行う前に


- 超音波振動の確認を行ないます。お肌を水で濡らし、ピーリングヘッドを軽く当ててゆっくり滑らせます。ピーリングヘッドの先端からミストが出たら、超音波振動が発生しています。ミストが少ない場合は、水を多めに付けてください。
- ※お部屋の明るさや背景の色の影響で、ミストが見えにくい場合があります。
- 必ず洗顔をし、肌を清潔な状態にしてください。
- ニキビや吹き出物、炎症等がないか確認してください。ある場合は、その箇所への使用はお避けください。
- マイナスイオンモード・パッティングモードを行う際は、美容液または化粧水を用意します。肌の奥まで浸透させるため、無添加のものをおすすめしております。
- 安全にご使用いただくため、必ずパッチテストを行います。美容液または化粧水を腕など皮膚の薄い部分に塗り、下記機能を全て試して異常が起こらないか確認してください。万一、異常が起きた場合は、本製品を使用せず医師にご相談ください。





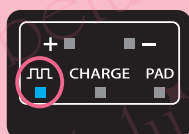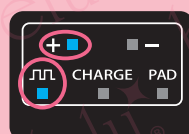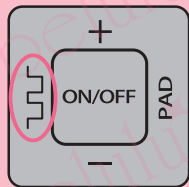ボタン操作




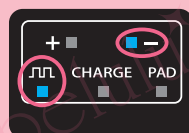
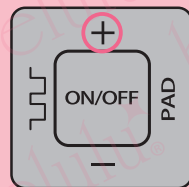
【ウォーターピーリング】

- 電源ボタンを押すと、ピーリングモードが始まります。
- インジケータの「」にランプがついていることを確認してください。




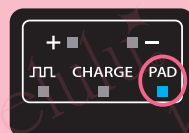
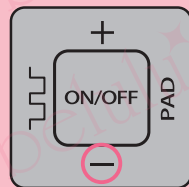
【プラスイオンモード】

- 電源ボタンを押すと、ピーリングモードが始まります。
- モード切替ボタンの「+」を押し、インジケータの「+」」にランプがついていることを確認してください。



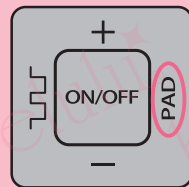
【マイナスイオンモード】

- 電源ボタンを押すと、ピーリングモードが始まります。
- モード切替ボタンの「-」を押し、インジケータの「-」」にランプがついていることを確認してください。



【PAD(パッティング)モード】

- 電源ボタンを押すと、ピーリングモードが始まります。
- モード切替ボタンの「PAD」を押し、インジケータの「PAD」にランプがついていることを確認してください。



基本のお手入れ方法

イオン導出とウォーターピーリングはどちらを先に行っても構いません。

【お手入れ時のご注意】

- 普段通り洗顔を行い、水気をしっかり拭き取ってください。(ウォーターピーリングとイオン導出で顔を濡らしますが、洗顔後は一度水を拭き取ることをおすすめします)
- 乾いた肌への使用は絶対にしないでください。肌トラブルの原因になります。
- ピーリングヘッドは肌の同一部分に留めず、移動させて使用してください。
- ピーリングヘッドが滑りにくい場合は、水及び美容液・化粧水を追加してください。
- ピーリングヘッドを肌に強く押し当てないでください。
- ご使用時は、腕時計やジュエリー等の貴金属類は外してください。
- ご使用中、痛み等の異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。

1. イオン導出 洗顔で落としきれなかった肌や毛穴の奥の細かい汚れを、プラスイオンの方で吸引します

① 通常通り洗顔し、水気をしっかりとふき取ってください。

② 顔全体を水またはふき取り化粧水で濡らします。
※乾いた肌への使用は絶対にしないでください。

③ 上記のボタン操作を参照してイオン導出モードを稼働させます。
イオン誘導サイドバーを握ってピーリングヘッドの先端をやさしく肌に当て、ピーリングヘッドを引くように顔全体に滑らせます。

【推奨使用頻度】 週2~3日 一日約10分を1回

●「ピーリングヘッドの動かし方」を参照し、ケアを行ってください。小鼻の脇など、汚れが気になる部分を重点的に行うなど、ご自身のお肌の状態に合わせてアレンジするのもおすすめです。

●ケア中に水やふき取り化粧水が足りなくなったりピーリングヘッドの滑りが悪くなった場合は、その都度足してください。

●ピーリングヘッドに汚れが付いた場合は、その都度、清潔なタオルかティッシュペーパーで拭き取ってください。

●ケア終了後は、顔やピーリングヘッドに残った水またはふき取り化粧水をしっかりと拭き取ってください。

2. ウォーターピーリング ミスト状にした水でさらに細かい汚れや皮脂、古い角質を除去します

① イオン導出で残った水やふき取り化粧水をしっかりと拭き取ってください。

② 顔全体を水または精製水で濡らします。
※乾いた肌への使用は絶対にしないでください。

③ 上記のボタン操作を参照してウォーターピーリングモードを稼働させます。イオン誘導サイドバーを握ってピーリングヘッドの先端をやさしく肌に当て、ピーリングヘッドを押すように顔全体に滑らせます。

【推奨使用頻度】 週2~3日 一日約10分を1回

●「ピーリングヘッドの動かし方」を参照し、ケアを行ってください。小鼻の脇など、汚れが気になる部分を重点的に行うなど、ご自身のお肌の状態に合わせてアレンジするのもおすすめです。

●ケア中に水や精製水が足りなくなったりピーリングヘッドの滑りが悪くなった場合は、その都度足してください。

●ピーリングヘッドに汚れが付いた場合は、その都度、清潔なタオルかティッシュペーパーで拭き取ってください。

●ケア終了後は、顔やピーリングヘッドに残った水またはふき取り化粧水をしっかりと拭き取ってください。

3. イオン導入 マイナスイオンの方で美容成分をお肌の奥に浸透させます

① ウォーターピーリングで残った水や精製水をしっかりと拭き取ってください。

② 美容液・ジェル、化粧水などをピーリングヘッドに乗せる、または顔全体に塗ります。
※乾いた肌への使用は絶対にしないでください。

③ 上記のボタン操作を参照してイオン導入を稼働させます。
イオン誘導サイドバーを握ってピーリングヘッドの先端をやさしく肌に当て、ピーリングヘッドを引くように顔全体に滑らせます。

【推奨使用頻度】 毎日 一日約10分を1回

●「ピーリングヘッドの動かし方」を参照し、ケアを行ってください。口元など、乾燥が気になる部分を重点的に行うなど、ご自身のお肌の状態に合わせてアレンジするのもおすすめです。

●ケア中に美容液・ジェル、化粧水が足りなくなったりピーリングヘッドの滑りが悪くなった場合は、その都度足してください。

●ケア終了後は、顔に残った美容液・ジェル、化粧水をしっかりと拭き取らずに、乳液やクリーム等でフタをして脂分を補いましょう。

●続けてパティングを行う場合は、拭き取らなくても構いません。

+α

4. パティング マイクロカレントと適度な微振動マッサージで、ツヤ肌を目指しましょう

① ウォーターピーリングで残った水や精製水をしっかりと拭き取ってください。

② 美容液・ジェル、化粧水などをピーリングヘッドに乗せる、または顔全体に塗ります。
※乾いた肌への使用は絶対にしないでください。

③ 上記のボタン操作を参照してパティングモードを稼働させます。
イオン誘導サイドバーを握ってピーリングヘッドの先端をやさしく肌に当て、ピーリングヘッドを引くように顔全体に滑らせます。

【推奨使用頻度】 週2~3日 一日約10分を1回

●「ピーリングヘッドの動かし方」を参照し、ケアを行ってください。口元や目元など、乾燥が気になる部分を重点的に行うなど、ご自身のお肌の状態に合わせてアレンジするのもおすすめです。

●ケア中に美容液・ジェル、化粧水が足りなくなったりピーリングヘッドの滑りが悪くなった場合は、その都度足してください。

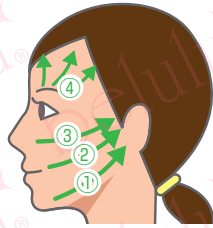
●ケア終了後は、顔に残った美容液・ジェル、化粧水をしっかりと拭き取らずに、乳液やクリーム等でフタをして脂分を補いましょう。

ピーリングヘッドの動かし方

基本的な動かし方です。気になる部分を重点的にケアするなど、ご自身のお肌の状態に合わせてアレンジしてください。


フェイスラインのお手入れ

- 顔の中心から外側に向かって滑らせます。
- ①あごから耳の手前まで
- ②口元からこめかみまで
- ③鼻側面からこめかみまで
- ④眉の上から髪の生え際まで



鼻周りのお手入れ

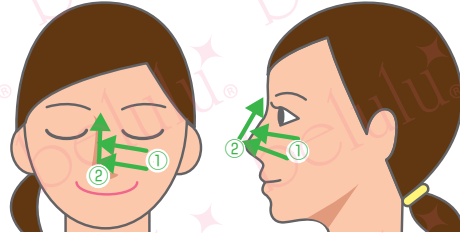- ①鼻の横から中央まで、鼻の形に添うようにして動かします。
- ②鼻の先端から上に向かって滑らせます。
- ③①と②を1セットにして左右交互に2~3分行います。



口周りのお手入れ

【あご】
下あごから口元へ



【頬】
口元から頬骨まで



【口周り】
あごから鼻の横へ



よくあるお問い合わせ：使用中、美顔器を持っている手にピリピリとした刺激や痛みを感じます。漏電ですか？
漏電ではありません。本品は持ち手の金属部に微電流を流し、肌のバリアゾーンを抜けて皮膚の深部まで美容成分を浸透させるもので、人によっては刺激を感じる場合があります。微電流は人体には無害ですが、気になる場合は超音波レベルを下げてお使いください。

お手入れが終わったら

- ご使用後は本体の電源を切ってください。
- 本体やピーリングヘッドの汚れは、やわらかい布・ティッシュ等でやさしく拭き取ってください。
- ※防水仕様ではないため、水洗いはしないでください。
- ※シンナー・ベンジン・アルコール等の溶剤類は使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所、高温になる場所、湿気やホコリが多い場所を避けて保管してください。また、お子様の手が届かないようご注意ください。

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 **氏名** **購入商品** **購入からの期間** **故障状況**

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

TEL:050-4560-1423 E-mail:shop@kireido.com

- ※ご使用回数に関わらずご購入から3ヵ月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただけます。
- ※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。
- ※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先

〒221-0801

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25 謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

※本体以外の付属品は消耗品の為、保証対象外となります。

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

〈修理規約〉

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
 - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - d. 本書の提示がない場合。
 - e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

■品番: ■品名:belulu AquaRufa classic
■修理保証期間:販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)
■お客様名: _____
■ご住所: _____
■受注番号: _____

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル
販売日付: 年 月 日 印

- 通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。
- この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。