


belulu® CaviUp!

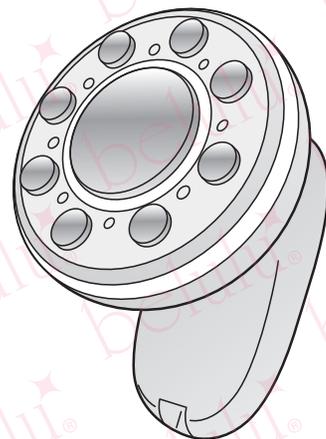

美ルル キャビアップ

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。

⚠
警
告

- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
- 本品をご使用中は、LEDライトを直接見たり、目に照射しないでください。LEDライトを直視しますと、目を傷めるおそれがあります。
- 本品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
- 電源アダプターのコードを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
- ストーブ等高温になる場所で本品や電源アダプターを使用したり放置したりしないでください。
- 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
- 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
- 万一、皮膚に異常が見られた場合は、本品を中止して医師に相談してください。
- 下記のリストをよくご確認ください、該当する方は本品を使用しないでください。
- 本品の分解、改造、お客様自身による修理などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関しては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。

⚠
注
意

- 皮膚の弱い部分への過度のご使用はお避けください。
- 使用中、痛み等があった場合は、すぐに3Dヘッドを肌から離してください。
- 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- 約4～8時間で充電が完了します。完了後はそれ以上充電しないでください。
- 充電中以外は充電ケーブルを本体から外してください。
- 本品の水洗いはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。ベンジン、シンナー等の溶剤類で拭かないでください。
- 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造・お客様自身による修理をされた際の怪我、故障、破損等につきましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

〈下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください〉

- 急性疾患 ●有熱性疾患 ●血圧異常 ●伝染病疾患 ●心臓疾患 ●医用電子器具を使用されている方(ペースメーカーなどの体内植込式医用電子機器、人工心肺などの生命維持用電子機、心電図などの装着型医用電子機器) ●皮膚ガン病歴がある方 ●糖尿病および他の疾患による皮膚異常疾患の方 ●妊娠中の方 ●授乳中の方 ●皮膚のトラブル(アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、ニキビが化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌が敏感な方) ●化粧品による皮膚炎を起こしている方 ●特に健康がすぐれない方 ●ステロイド系ホルモン剤等を長期間服用されている方

〈下記の部位には使用しないでください〉

- 悪性腫瘍 ●切り傷 ●骨や関節の上 ●整形などでシリコンが使用されている部分 ●声帯部分 ●頭髮、目や耳の周り、粘膜などのデリケートゾーン

■ご購入後初めて使用する場合は、本体を約1時間充電することをおすすめします。■

美・ル・ル キャビアップ 機能紹介

赤色LED

630nm波長、コラーゲンを増やしてシワやたるみなどの年齢肌を改善します。紫外線によるダメージを修復する働きもあり、アンチエイジング効果も期待できます。

キャビテーション(CV)

1秒間に600万回の超音波振動が脂肪を柔らかくして落としやすい状態にするため、部分痩せ効果が期待できます。

RF温熱(ラジオ波)

高い周波数でお肌を温めます。1MHzのラジオ波による温熱効果でお肌を内側から広い範囲にわたってじんわり温め、血行を促進し肌細胞の活性化や老廃物の排除を促します。

EMS

筋肉に刺激を与えて強制的に筋肉運動をさせることで筋肉が鍛えられ、筋トレと同じ効果が期待できます。

また、新陳代謝を活発にしてコラーゲンの生成を助けます。

※キャビテーション(CV)時、RF温熱時に稼働します。単体での使用はできません。

選べる組み合わせ

各機能をお好みに合わせて組み合わせて使うことができます。特にキャビテーションとRF温熱は同時に使うとより効果的です。

赤色LED

+

RF温熱(ラジオ波)

赤色LED

+

キャビテーション

RF温熱(ラジオ波)

+

キャビテーション

赤色LED

+

RF温熱(ラジオ波)

+


キャビテーション

赤色LED・・・点灯/点滅の2パターンが選べます。


RF温熱(ラジオ波)・・・強さをレベル1～4の4段階設定できます。

セット内容と製品仕様

※製品仕様や外観は予告無く変更になる場合があります。

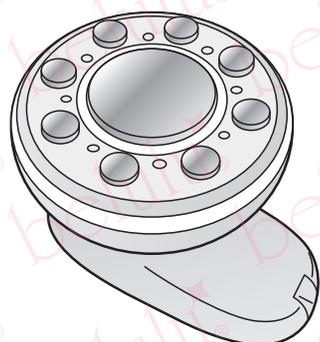

belulu CaviUp本体

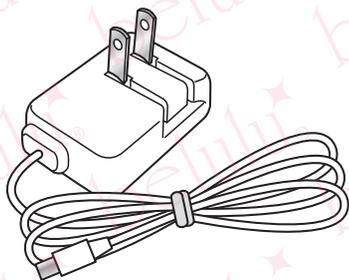


電源ケーブル



3Dヘッド

LED

充電口

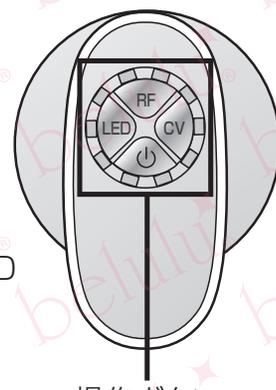

操作ボタン


【本体仕様】

充電時間:約4時間 入力:5V/0.5A 使用電池:リチウムイオンバッテリー
高さ:110×幅90×厚さ90mm 重さ:277g

【USB式アダプター仕様】

入力:100~240V 50/60Hz 0.2A 出力:5V/1A

- ご購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合、パワー低下や稼働時間が短くなった場合は、本体を充電してください。
- 電源ケーブルの充電コネクタを本体の充電口に、ACアダプターを家庭用コンセントに接続します。
- 電源ボタン下の充電お知らせランプが赤色に点滅します。
※充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電時間や稼働時間は、本製品の使用頻度によって異なります。
- 充電が完了すると充電お知らせランプが消灯しますので、ケーブルを外してください。
- 充電ケーブルを接続したままのご使用はできません。ご使用時は、必ず充電ケーブルを本体から外してください。

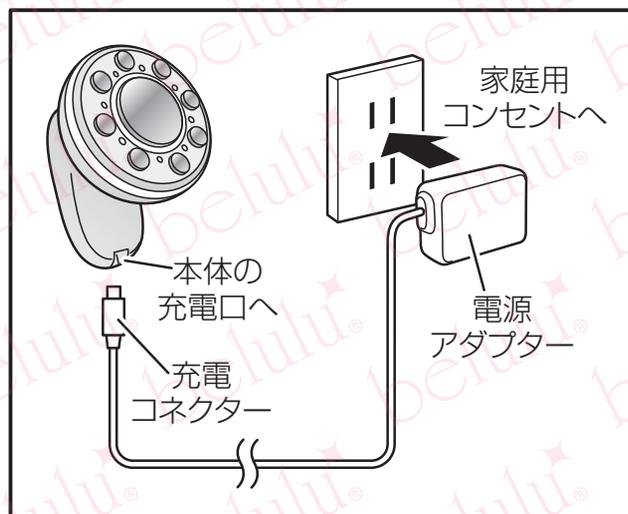

家庭用
コンセントへ

電源
アダプター

本体の
充電口へ

充電
コネクタ

- 充電に適した室温は、15~30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温下で充電を行なってください。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。
- 内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合でも月に1回充電を行なってください。
- 正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。
- 安全にお使いいただくため、必ずパッチテストを行ってください。
- 美容液を腕の内側など皮膚の薄い部分に塗り、次ページに記載されている本製品の機能をすべて試してください。
- 異常がないことを確認してから顔のケアを行ってください。万一、皮膚に異常が見られた場合は本製品を使用せず、当社または医師にご相談ください。

電源が入らない場合

誤作動防止用ロックがかかっている場合がございます。
下記の手順に従いロック解除を行なってください。

電源ボタンを押しながら、
「LED」→「RF」→「CV」→「LED」→「RF」→「CV」→の順番で
素早くボタンを押してください。

※押すスピードが遅いと解除されません。

電源とお知らせランプ



電源ボタンを押すと、すべてのお知らせランプが時計回りに点灯します。



モードが選択されていない場合は、電源ボタン下のお知らせランプのみ点灯します。




充電中は電源ボタン下のお知らせランプが点滅します。

本製品は、10分経過しますと自動的に電源がOFFになります。ケア時間の目安にしてください。

操作方法

LED ボタン LED ライトの設定を行います。

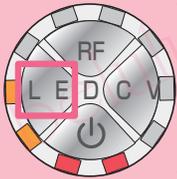


- ON/OFFボタンを押すと電源がONになり、一度すべてのお知らせランプが点灯した後、電源ボタン下のお知らせランプのみ赤色に点灯します。
- LEDボタンを押すと赤色LEDが点灯します。
- LEDボタンを押すごとに、赤色LED点灯→赤色LED点滅→消灯の順に切り替わります。
- 赤色LED点灯・点滅中は、LEDボタン左のお知らせランプがオレンジ色に点灯します。

電源ON


赤色LED点灯

赤色LED点滅

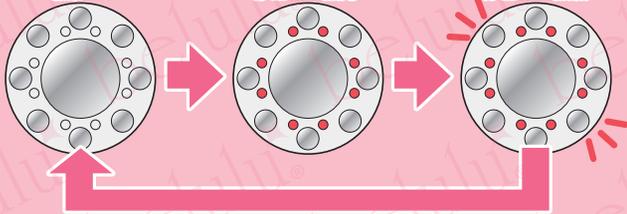

RF温熱(ラジオ波)やキャビテーションとの同時使用も可能です
赤色LEDモード中に「RFボタン」もしくは「CVボタン」を押してください。
各モードに関しましては右の図をご参照ください。

RF ボタン RF 温熱(ラジオ波)の設定を行います。

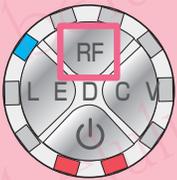

- ON/OFFボタンを押すと電源がONになり、一度すべてのお知らせランプが点灯した後、電源ボタン下のお知らせランプのみ赤色に点灯します。
- RFボタンを押すと、RF温熱(ラジオ波)が強さレベル1で稼働します。
- RFボタンを押すごとに、強さレベルが上がります。4段階調節が可能です。
- RF温熱稼働中は、RFボタン上のお知らせランプが強さレベルに応じて青色に点灯します。


電源ON

強さレベル1

強さレベル2

強さレベル3

強さレベル4

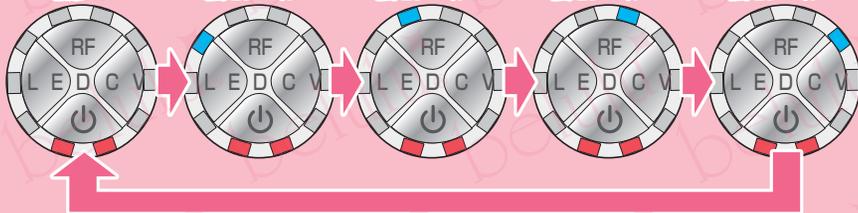

赤色LEDやキャビテーションとの同時使用も可能です
RF温熱(ラジオ波)稼働中に「RFボタン」もしくは「CVボタン」を押してください。
各モードに関しましては各ボタンの説明をご参照ください。


C ボタン キャビテーションモードの設定を行います。




- ON/OFFボタンを押すと電源がONになり、一度すべてのお知らせランプが点灯した後、電源ボタン下のお知らせランプのみ赤色に点灯します。
- CVボタンを押すと、キャビテーションモードが稼働します。
- キャビテーションモード稼働中は、CVボタン右のお知らせランプが黄色に点灯します。

赤色LEDやRF温熱(ラジオ波)との同時使用も可能です
キャビテーション稼働中に「LEDボタン」もしくは「RFボタン」を押してください。
各モードに関しましては各ボタンの説明をご参照ください。

3D ヘッドについて

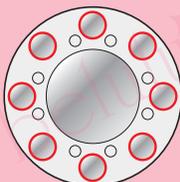

RF温熱(ラジオ波)時は、外側の小さい3Dヘッドが稼働します。

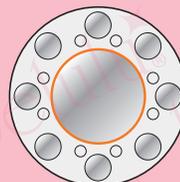

キャビテーション時は、内側の大きい3Dヘッドが稼働します。


基本のお手入れ方法

■RF 温熱・キャビテーション編■

- ケアを行なう際は、必ずジェルやクリームなどをご使用ください。乾いた肌に使用しますと、3Dヘッドが滑りにくくなり肌を傷める場合があります。
- ヘッド部分は肌に対して真っ直ぐ当ててください。また、肌に強く押し付けたりこすったりせず、やさしく滑らせるようにして動かしてください。
- ご使用中、肌に異常を感じたり、肌に合わないと感じた場合はご使用を中止し、医師に相談するか、当社へご連絡ください。

1箇所につき10分間じっくり行ったり、2箇所を5分ずつ行うなど、ご自身のお悩みやお好みに合わせて自由にアレンジしてください。

フェイスライン・顎のたるみ

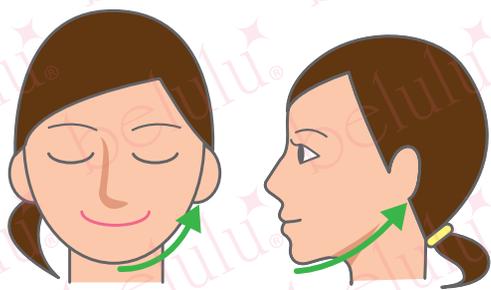


●顎から耳の下へ押し流すように滑らせます。

ボディケア


小さく円を描きながらゆっくり動かすのがポイントです。ボディクリームなどを塗って行ってください。

太もも前面

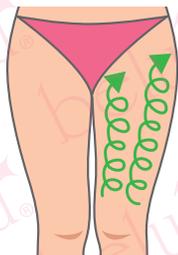

ヒザから脚の付け根へ

太もも裏

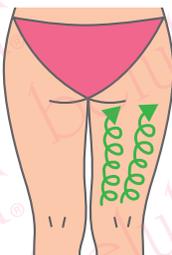

二の腕




肘から肩へ

ヒップ




下から持ち上げるように


お腹周り

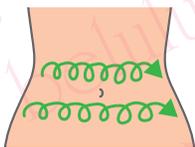

おへその上下を左右に往復

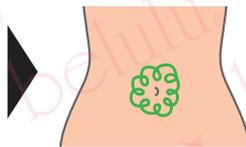

おへその周りを小さく円を描きながら周囲

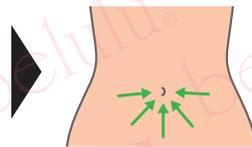

おへそに向かって外側から内側へ

基本のお手入れ方法

■赤色LED編■

- LEDライトご使用時は、目を閉じてください。LEDライトを長時間直射したり、目に当てたりしないようにしてください。
- お好みで美容ジェルや美容液等をご使用ください。
- ご使用中、肌に異常を感じたり、肌に合わないと感じた場合はご使用を中止し、医師に相談するか、当社へご連絡ください。

シワなどが気になる部分に赤色LEDを当ててください。
肌から1cmほど離すと、光がまんべんなく当たります。

お手入れが終わったら

- 電源ボタンを押して電源を切ってください。
- 3Dヘッドが汚れている場合は濡れ布巾等できれいに拭き取ってください。
- 高温多湿や直射日光が当たる場所、ホコリが多い所を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 **氏名** **購入商品** **購入からの期間** **故障状況**

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

E-mail: support@kireido.com

固定電話: 0120-09-5121 携帯・スマートフォン: 050-4560-1423

※ご使用回数に関わらずご購入から3ヵ月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。

※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先

〒221-0801

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目29-25

株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

〈修理規約〉

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
 - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - d. 本書の提示がない場合。
 - e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

■品番: ■品名: belulu CaviUp

■修理保証期間: 販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)

■お客様名: _____

■ご住所: _____

■受注番号: _____

販売店: 株式会社ビューティフルエンジェル

販売日付: 年 月 日 印

●通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。

ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。

●この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。