


beulu[®] ~classy~

사용설명서

본 제품을 구매해 주셔서 감사 드립니다.
이 사용 설명서를 잘 읽은 다음 제품을 사용해주십시오.
사용 설명서 안에 있는 보증서를 잘 보관 해주십시오.

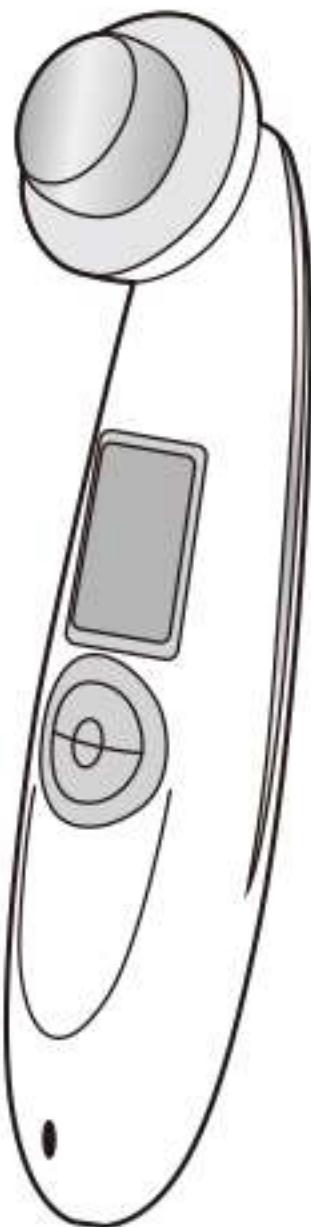

사용 전에 반드시 읽어주세요.

- 사용전 액정 AC 어댑터 등은 반드시 본 사용설명서에 지정되어 있는 상품에만 사용해주세요.
- 본 품을 사용 중에는 LED 라이트를 직접 보거나, 눈에 가까이 대는 일이 없도록 해주세요. LED 라이트를 직시하면 눈에 이상이 생길 우려가 있습니다.
- 만일 연기나 냄새, 가열 등 이상이 발생한 경우, 본체의 전원을 끄고 사용을 중지해주세요.
- 전원 어댑터의 코드를 억지로 늘리거나, 물에 젖은 손으로 플러그 부분을 만지지 말아주세요.
- 난로 등 고온 장소에서는 본품과 전원 어댑터를 사용하거나 방치하지 마세요.
- 젖은 손으로 사용하거나 물기 및 먼지 등이 부착된 채로 사용을 피해주세요.
- 본품은 방수처리가 되어있지 않습니다.

경
고

- 욕실 등 습기가 많은 장소는 절대 사용하지 말아주세요. 화상이나 감전, 고장의 우려가 있습니다.
- 만일, 피부에 이상이 발생한 경우, 사용을 중지하시고 의사와 상담하세요.
 - 하기의 리스트를 잘 확인하시고, 적합하지 않는 분은 본제품을 사용하지 말아주세요.
 - 본품의 분해 등의 행동은 절대 하지 말아주세요.
- 본품 및 부착품의 고장, 파손의 원인이 됩니다.
- 상기의 주의, 경고에 따르지 않는 경우 등, 잘못 사용, 분해 된 때의 고장, 파손등에 관해서는 보증 제외 대상으로, 당사에서는 일절 책임을 지지 않습니다.

△
주
의


- 피부의 약한 부분에 과도하게 사용하는 것을 삼가 해주세요.
- 사용 후 통증 등이 있을 경우, 즉시 사용을 멈추세요.
- 떨어트리거나 부딪치는 강한 쇼크를 주지 않도록 해주세요.
- 충전에는 약 4시간~8시간이 소요됩니다. 충전 완료 후 더 이상 충전을 하지 말아주세요.
- 충전 중 이외는 충전 케이블을 본체에서 빼주세요.
- 제품을 물에 적시지 마세요. 더럽혀진 경우에는 물에 적신 부드러운 천으로 부드럽게 닦아주세요. 펜진, 시너 등의 화학 용제류로 닦지 말아주세요.
- 상기의 주의, 경고에 따르지 않거나, 잘못된 사용, 분해 등으로 인한 고장, 파손등에 관해서는 보증 제외 대상으로 당사에서는 일절 책임을 지지 않습니다.

<하기에 해당사항이 있는 분은, 사용을 피해주세요>


- 급성 질환 ● 유열성 질환 ● 혈압 이상 ● 전염병 질환 ● 심장 질환 ● 의용 전자 기구를 사용하는 분(페이스 메이커 등의 체내 스터드식 의료용 전자 기기, 인공 심폐 등의 생명 유지용 전자기, 심전도 등의 장착형 의료용 전자 기기) ● 피부 암 병력이 있는 분
 - 당뇨병 및 다른 질환으로 인한 피부 이상 질환자 ● 임신 중인 분 ● 수유 중인 분
 - 피부 트러블(아토피성 피부염, 과도한 햇볕으로 피부 염증이 생기는 분, 여드름이나 화농성 염증이 있는 분, 알레르기 체질인 분, 특히 피부가 민감한 편인 분)
 - 화장품에 의한 피부염을 일으키는 분 ● 특히 건강이 좋지 않은 분
 - 스테로이드계 호르몬제 등을 장기간 복용하고 있는 분
-
- 악성 종양 ● 상처 ● 뼈나 관절의 위 ● 성형 등에서 실리콘 사용된 부분
 - 성대 부분 ● 머리, 눈이나 귀 주변, 점막 등의 민감 존

2 셋트내용 & 명칭

※제품사양이나 외관 내용은 예고없이 변경 될 경우가 있습니다.

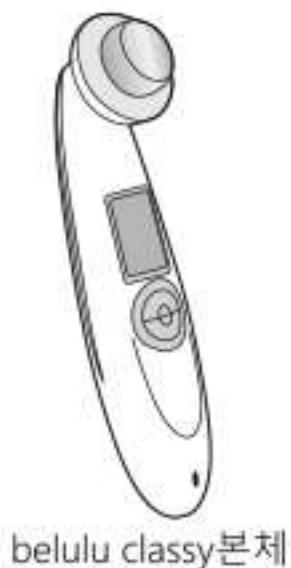

belulu classy본체

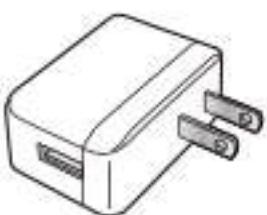


AC 어댑터




보호안경



충전 케이블

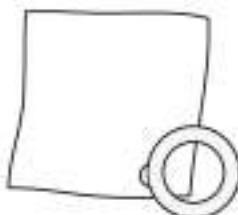

화장솜과 고정 고무 세트

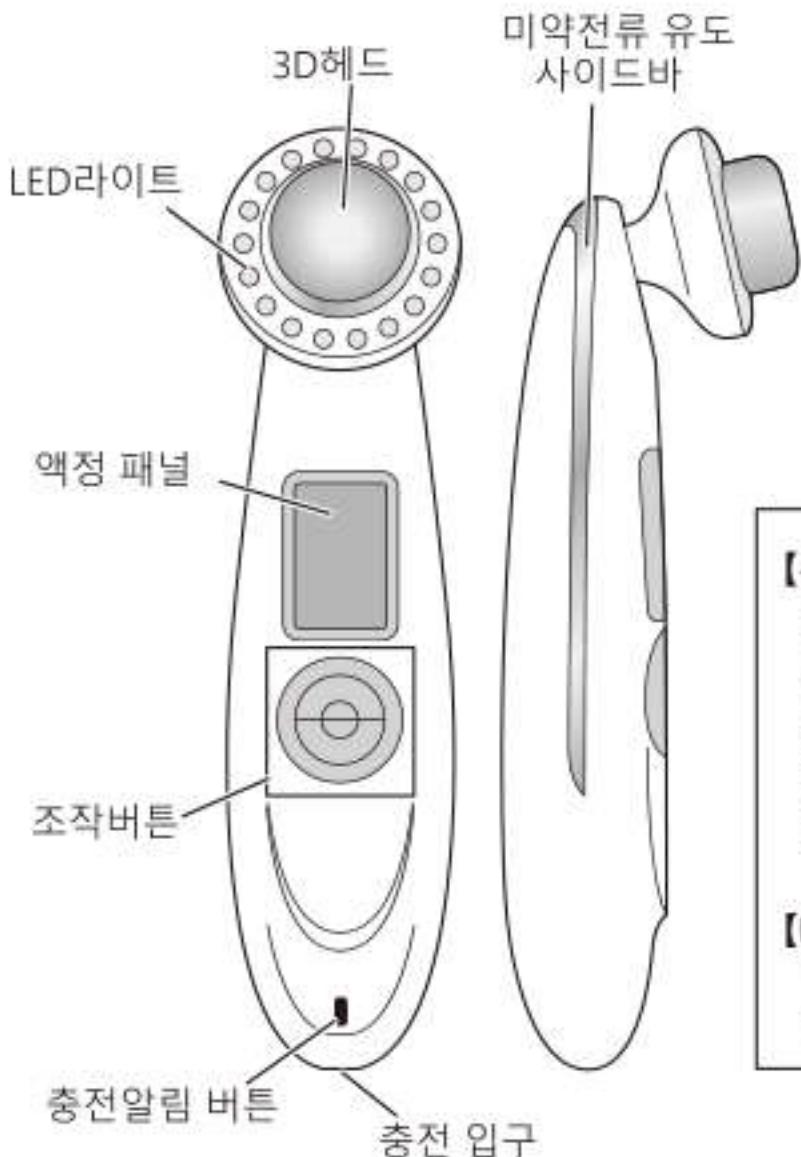

【본체사양】

충전시간 : 4~8시간 입력:5V/0.5A
사용전지 : 이온 배터리
높이 : 180mm
폭 : 45mm (헤드부분)
두께 : 35mm (바디부분)
무게 : 100g

【USB식 어댑터사양】

입력 : 100 ~ 240V 50/60Hz 0.2A
출력 : 5V/1A

3 본체충전

- 액정패널 오른쪽 하단에 배터리잔량이 3단계로 표시됩니다. 잔량이 1이나 0이 되면 충전을 해주세요.



잔량
75 ~ 100%



잔량
50 ~ 74%



잔량
25 ~ 49%



잔량
0 ~ 24%

- 구입 후 처음 사용할 경우, 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리 잔량이 낮은 경우에는 본체를 충전해 주세요.

- 충전 중에는 반드시 전원을 꺼주세요.

- 충전 케이블의 충전 커넥터를 본체충전 입구나 USB 커넥터를 컴퓨터나, 부착식 USB 어댑터 등을 USB 포트에 꽂습니다.

- 충전 알림 램프가 적색으로 점등 됩니다.

※ 충전 중에 본체가 다소 뜨거워질 경우가 있습니다. 본체나 어댑터에 문제가 있는 것은 아닙니다.


- 충전 시간이나 가동 시간은 본제품의 사용에 따라 달라집니다.

- 충전에 적합한 실온은 15~30°C입니다. 저온에서의 충전은 전지의 수명이 짧아지는 원인이 되므로, 알맞은 온도 하에서 충전을 하세요.

또한 약 0°C 이하에서는 충전 속도가 저하 될 수 있습니다.

- 내장 전지 보호를 위해 장기간 사용하지 않을 경우에도 한달에 1회 충전을 하세요.

- 제대로 충전된 상태에서도 가동 시간이 짧을 경우는 전지의 수명 문제입니다.

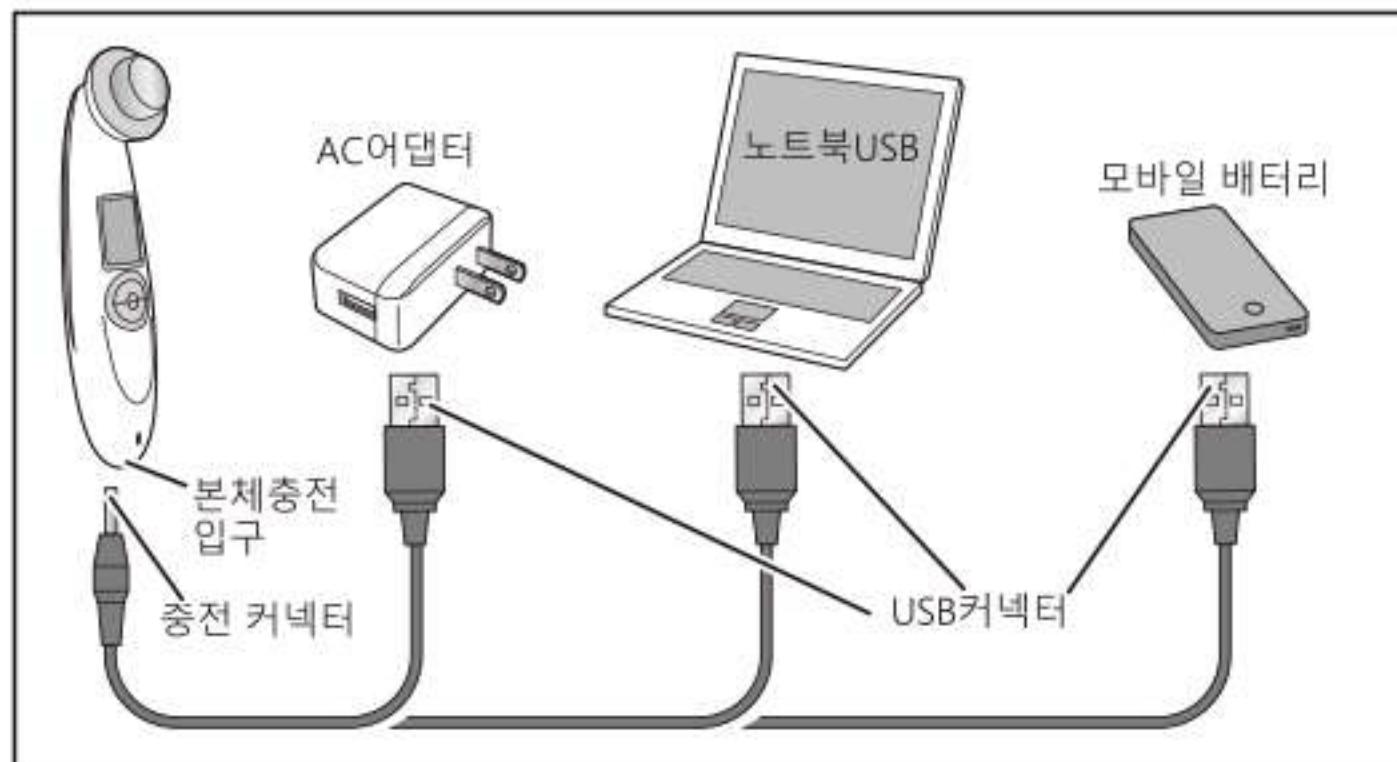


4 버튼 작동

ON/OFF 버튼

전원 ON/OFF와 이온 모드, 초음파 설정을 합니다.



- ON/OFF 버튼을 누르면 전원이 켜지고, 액정패널에 청색 불이 들어오면서 모드 명칭이 표시됩니다.
- 이 상태에서 [ON/OFF버튼]을 누를 때 마다, 이온 도출->이온 도입 + 진동 마사지->이온 도입+초음파[약]->이온 도입+초음파[중]->이온도입+초음파[강]의 순으로 바뀝니다.
- 이온도입+초음파[강] 상태에서 ON/OFF 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.

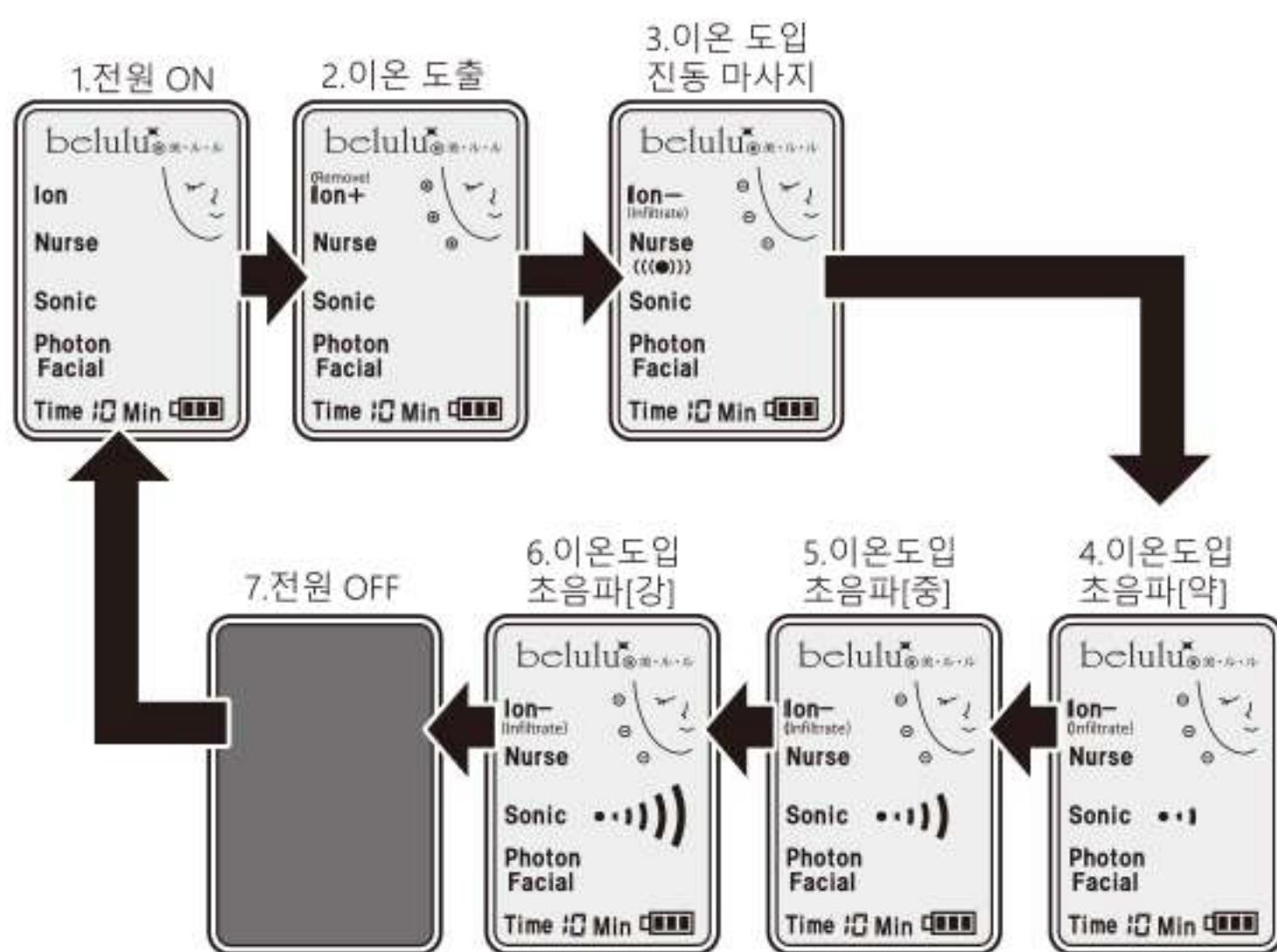

광에스테와 동시사용도 가능합니다. 각 모드가 가동 중에 PHOTON버튼을 누르면 동시 사용이 가능합니다. 광에스테에 사용법은 [6페이지]를 참고해주세요.

PHOTON버튼

LED 라이트의 색을 설정합니다.




- [ON/OFF]버튼을 누르면 전원이 켜지고, 액정 패널에 청색 불이 들어오면서 모드에 이름이 표시 됩니다.
- 이 상태에서 [PHOTON버튼]을 누르면 1.빨강 LED ->초록 LED ->파랑 LED-> LED 라이트 OFF 순서로 바뀝니다.
* LED라이트를 장시간 작동하지 않도록 주의하세요.

액정 패널 점등



빨강LED

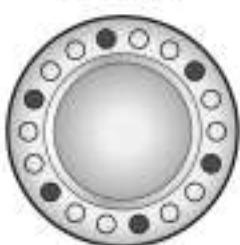

초록LED



파랑LED



LED 라이트 불이 켜지면, 액정패널의 Photon에 「☀」 마크가 표시됩니다.

이온모드, 초음파 모드와 동시에 사용 가능합니다.

LED 라이트가 켜져 있을 때 ON/OFF버튼을 눌러주세요.

이온 모드와 초음파 모드에 대해서는 [ON/OFF] 버튼을 참고해주세요

5 사용전확인

사용 전에 작동확인과, 얼굴을 제외한 다른 부위의 피부에 테스트 해주세요.

작동확인

【 플러스 이온모드 】 (이온 도출)

- 1.[ON/OFF] 버튼을 눌러서, 플러스 이온 모드를 설정해주세요.
(*[ON/OFF]페이지를 참고해주세요.)

2.  아이콘이 움직이고 있을 때 정상적으로 작동 합니다.

【 마이너스 이온모드 】 (이온 도입)

- 1.[ON/OFF] 버튼을 눌러서, 마이너스 이온 모드를 설정해주세요
(*[ON/OFF]페이지를 참고해주세요.)


2.  아이콘이 움직이고 있을 때 정상적으로 작동 합니다.

3. 마이너스 이온일 때 진동 마사지 및 초음파도 동시에 가동 합니다.



【 초음파】

1. [ON/OFF] 페이지를 참고하고, 초음파모드가 [약], [중], [강]으로 바뀌는 것을 확인해 주세요. (이온 도출도 가동 합니다)

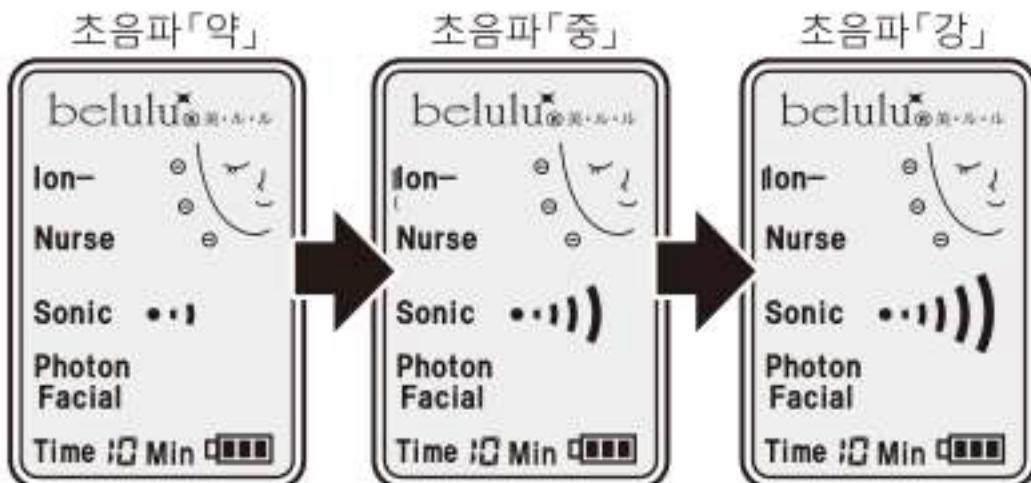

2. 3D헤드에서 나는 [지-]하고 작은 소리가 난다면, 정상 가동 중입니다.
초음파의 강도조절을 [약] [중] [강] 모두 확인 해주세요.

3. 3D헤드에서 소량의 물방울을 떨어트려서, 물이 미세하게 진동하거나,
미스트 같은 현상이 일어나면 정상 가동 중입니다.
물을 너무 많이 적시면 물의 무게로 진동이나 미스트가 발생 하지 않게 됩니다.
1~2 방울 정도로 눈에 쉽게 보일 수 있도록 해주세요.

【 광에스테 】

1. [PHOTON] 의 페이지를 참고해주세요. 빨강 LED ->초록 LED ->파랑 LED-> LED 라이트 순서로 변경되는지 확인해 주세요.
2. LED 라이트
*LED라이트 확인 시는 장시간 라이트를 직시하지 마시고 , 시야에 두지 말아주세요.
3. 액정 패널 [] 마크가 표시되었는지 확인해 주세요.

피부테스트

- 팔 안쪽을 잘 씻고 물기를 잘 닦아냅니다.
- 비루루 전용 젤 또는 쓰시는 화장품(젤 등)을 바르고 본 제품의 모든 기능을 테스트해보세요.
- 팔 안쪽에 테스트 해 보시고, 이상이 없으시면 얼굴에 사용하세요.
만일 피부에 이상이 있는경우. 제품을 사용하지 마시고, 판매처 또는 의사에게 상담하세요.

6 기능과 효과

【 플러스 이온 도출 】 (이온 클렌징)

플러스 이온의 흡인력을 이용하고 모공 속의 오염과 노화 각질을 제거합니다.
일반적인 클렌징 제품보다 세정력이 높고, 손 세안만으로는 해결되지 않는
모공 막힘이나 블랙헤드를 잘 흡착해서 깨끗한 피부로 가꿔줍니다.

【 마이너스 이온 도입 】 (이온 보습)

이온 도출로 정돈 된 모공에 이온 도입으로 미용 성분을 흡수시킵니다.
진동 마사지와 동시 사용으로 미용 성분이 피부의 세세한 부분까지 침투하여
피부의 깊은 부분까지 미용 효과를 발휘합니다.

*진동 마사지 및 초음파가 동시에 작동합니다. 마이너스 이온 만 사용 할 수 없습니다.

【 진동마사지 】

적당한 진동으로 마사지하고 에센스나 젤 크림을 재빨리 피부 깊숙이 침투시킵니다.
또 혈액 순환을 좋게 하고 피부 세포를 활성화시킵니다.

*이온 도입 (마이너스 이온모드)와 동시에 동작합니다. 마사지 모드만 사용할 수 없습니다.

【 초음파 】

초고속 진동에 의한 피부에 자극을 주고 혈류, 림프의 흐름과 신진대사를 촉진시킵니다.
보습 효과를 높이는 다른 리프트 업이나 페이스라인에 긴장감을 주는 효과가 있습니다.

*이온 도입 효과를 보다 좋게합니다

【 광에스테 】

LED라이트에 의한 피부 케어입니다. LED라이트는 색상에 따라 각각의 파장이
피부 속에 닿는 깊이도 다르므로, 색상에 따라 피부에 다양한 효과를 부여합니다.
피부의 고민에 맞추어 색을 선택할 수 있습니다.

**빨강
LED**

630nm파장.
콜라겐을 수치를 올리고 피부의 기미, 주름, 처짐 등을
개선합니다. 자외선으로 인한 손상을 복원하는
기능과 개선 안티 에이징 효과가 기대됩니다.

**파랑
LED**

415nm파장.
여드름의 원인인 활성 산소를 배제하는 작용으로
여드름을 진정시키면서 피부를 정돈 해줍니다.

**초록
LED**

525nm파장.
신진대사를 촉진하고 피부를 다시 태어나게 합니다.
주름살이나 여드름 자국, 흉터 자국 등에 의한
색소 침착을 개선합니다.

선택조합

복수 모드를 조합하고 동시에 실시할 수 있습니다.
시간 단축으로 신속한 케어를 원하는 분께 추천합니다.

플러스이온모드 + 광 에스테

マイ너스 이온 모드(진동마사지) + 광에스테

マイ너스 이온 모드(초음파마사지) + 광에스테


타이머기능

전원을 켜면, 액정 패널에 시간이 표시되어 10분 경과하면 자동으로 전원이 깨집니다.

모드를 선택하면,
액정패널 왼쪽 밑에
[10분]이라고 표시되고
1분마다 카운트다운 됩니다.



기본단계

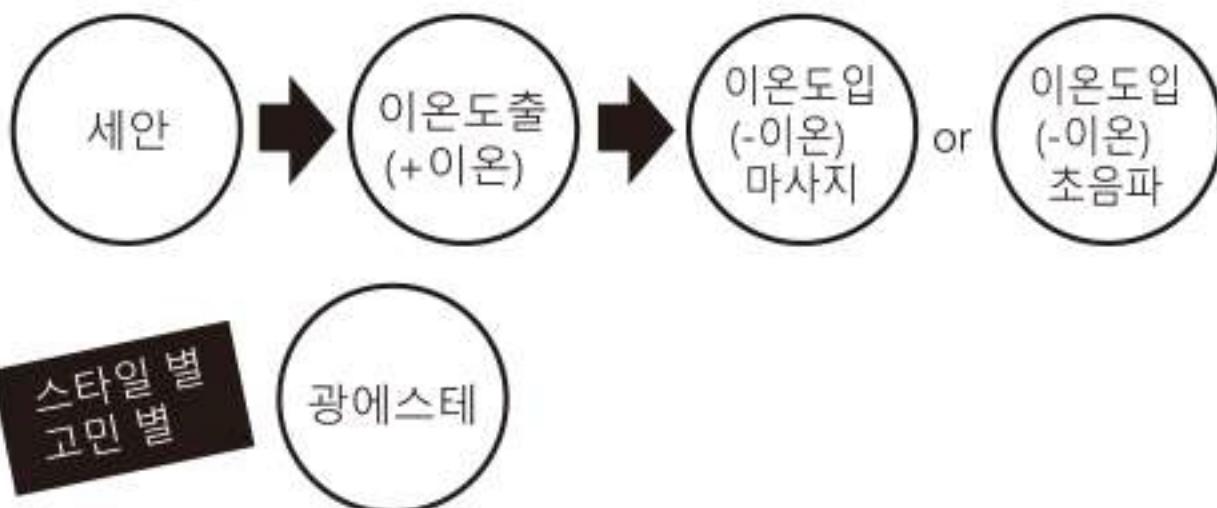

반드시 지켜 주세요.


- 방수기능이 없으므로, 욕실이나 물기 많은 곳에서는 사용하지 말아 주세요.
- 난방 기구 등 고온의 장소에서는 사용하지 마세요.
- 광 에스테 사용 중에는 눈을 감고 사용하시고, LED 라이트를 직접 보거나 장시간 직시하지 마세요.
- 관리를 실시할 때는 꼭 젤, 화장수 등을 사용하세요. 건조한 피부에 사용하면, 3D헤드의 마사지 기능이 원활하지 못해, 피부 트러블의 원인이 될 수 있습니다.
- 본체 측면의 미약 전류 유도 사이드 바에 손이 닿게 잡으세요.
- 3D헤드를 피부에 사용할 때, 강하게 문지르지 마시고 부드럽게 미끄러지듯 사용하세요.
- 사용 시에는 손목 시계와 보석 등 귀금속 류는 착용하지 말아주세요.
- 사용 중 피부에 이상을 느끼거나 피부에 맞지 않는다고 느낀 경우 사용을 중단하고 의사에게 상담하세요. 판매처에 문의 주세요.

【준비물】

- 에센스·미용 젤 또는 스킨
.. 끈적한 느낌이 있고 미용 성분이 고농도로 함유된 것이나 비루루 전용 에센스를 추천합니다.
피부의 고민에 맞는 성분이 다량 함유되어 있는 것을 사용하세요.
- 로션 또는 크림
.. 비루루 사용 종료 후 마무리에 사용합니다.


메이크업을 지우고 세안한 후, 물기를 잘 닦은 후 이용해 주세요.

손으로 세안 했을 때 사라지지 않는 모공 속 메이크업 잔여물과 미세한 노폐물까지 밀착시켜 피부 속을 깨끗하게 정돈해줍니다.

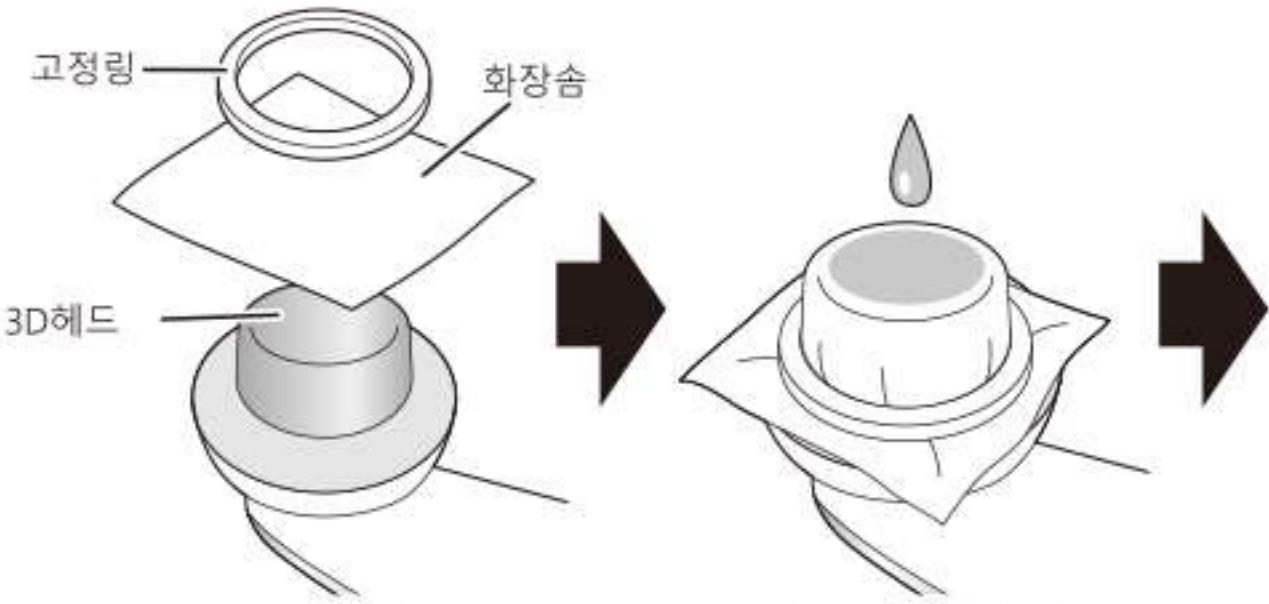

- ① 고정 링으로 3D 헤드에 화장솜을 고정시켜주세요.

- ② 화장솜에 클렌징 워터를 적셔줍니다.

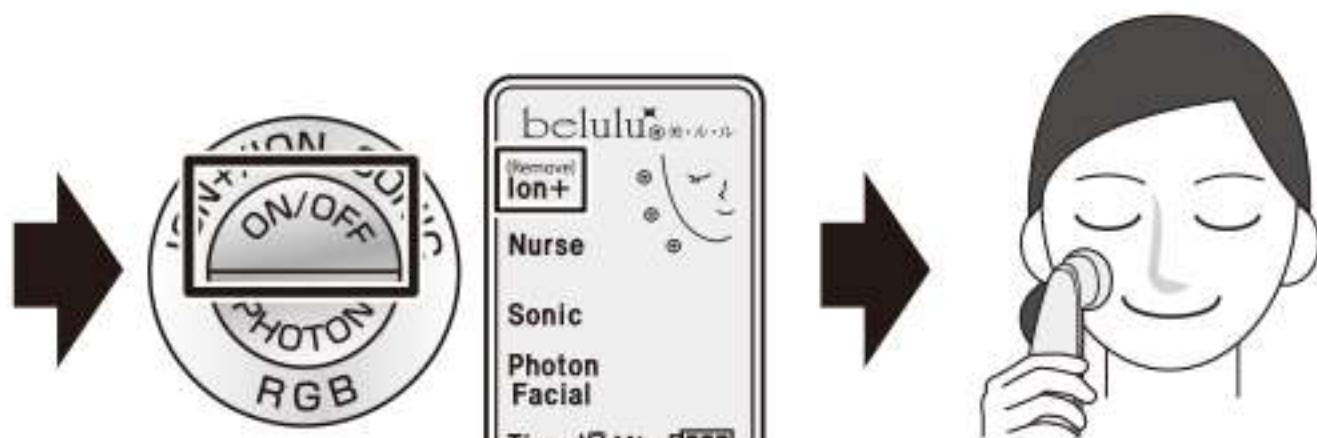

- ③ [ON/OFF] 버튼으로 플러스 이온 모드를 설정합니다.

- ④ 3D 헤드를 피부에 대고, 부드럽게 미끄러지듯 이동합니다.
다음 페이지에 상세한 사용 방법이 기재 되어있습니다.

자주하시는질문

이온도출 모드 시 화장품을 사용해도 괜찮습니까?

이온 도출은 모공 속 잔여물을 흡수하는 기능입니다. 로션을 사용하면 잔여물이 그대로 모공 속에 남기 때문에, 이온 도출 효과를 발휘할 수 없게 됩니다.
반드시 물 또는 클렌징 워터를 사용 해 주세요.

【 사용방법 】

얼굴을 "입 주위 오른쪽", "입 주위 왼쪽", "오른쪽 뺨", "왼쪽 뺨", "코", "이마"로 구분하고 부분마다 3D헤드를 사용하시면 얼굴 전체를 빈틈없이 관리할 수 있습니다. 코 주위 등 특히 노폐물이 쌓이기 쉬운 부분은 3D헤드를 적용 시간을 오래하여 중점적으로 관리합시다. 클렌징 워터는 한 관리 부분이 끝날 때 마다 추가하는 것을 추천합니다.



【 사용시간 예시 】



상기의 시간은 예시입니다.
자신의 피부 상태에 맞춰서
자유롭게 바꿔 주세요.

[아래에서 위로] [안에서 밖으로] 기준으로 움직입니다.

【 입주변 】



턱을 기점으로 뺨
쪽으로 이동합니다.
언중도 똑같이
뺨쪽으로 이동합니
다.

【 뺨 】



코 옆을 기점으로
뺨을 향해서
부드럽게 이동
합니다.

【 코 】



콧날은 상하로 코
주변은 원을 그리듯
이동합니다.

【 이마 】




상하 좌우로 왕복
하며 이동합니다.

이온도출 단계에서 피부에 남은 수분을 확실히 제거 해 주세요.


음이온의 미세 전류에 의해, 보통의 손 두드림으로 불가능한 깊은 부분까지 보습을 도와주고 미용 성분을 침투시킵니다. 진동 마사지가 혈액 순환을 촉진시키므로 부종 해소와 안색을 밝게 합니다.

BELULU 젤,
점성이 강한
화장품
젤, 에센스 등

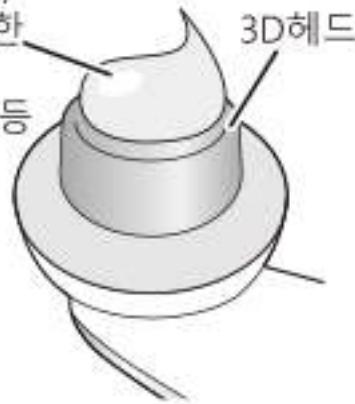

- ① 3D헤드에 BELULU 미용젤 또는 점성이 강한 젤이나 에센스를 올리고 얼굴에 넓게 바르거나, 또는 얼굴에 직접 발라 펼쳐 줍니다.
※로션, 크림은 사용하지 마세요.

마스크 팩 위에 이온 도입 모드를 사용하시는 것을 추천합니다.

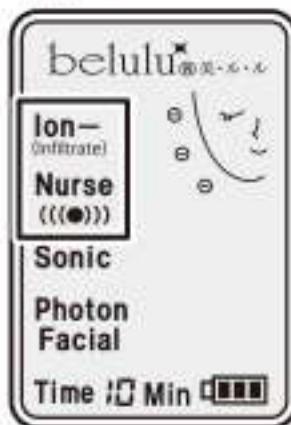

- ③ [ON/OFF]버튼으로 마이너스 이온 + 진동 마사지 모드로 설정합니다.

- ④ 3D헤드를 피부에 대고, 부드럽게 미끄러지듯 이동하며 사용 합니다. 자세한 사용 방법은 다음페이지에 기재되어 있습니다.

어드바이스



BELULU 미용 젤과 점성이 강한 화장품이 없는 경우에는 평소 쓰시는 마스크 팩을 사용한 채로 마스크 팩 위에서 이온 도입을 하시면 됩니다.


이온 도출 단계에서 피부에 남은 수분을 확실히 제거해 주세요

음이온의 미세 전류에 의해 보통의 손 두드림으로 불가능한 깊은 부분까지
보습을 도와주고 미용 성분을 침투시킵니다. 진동 마사지가 혈액 순환을 촉진시키므로
부종 해소와 안색을 밝게 합니다.


BELULU 젤,
점성이 강한
화장품
젤, 에센스 등



- ① 3D헤드에 BELULU 전용 젤 혹은 점성이 강한 젤이나 에센스를 올리고 얼굴에 사용하시거나, 또는 얼굴에 직접 발라 펴쳐 줍니다.
※로션, 크림은 사용하지 마세요.

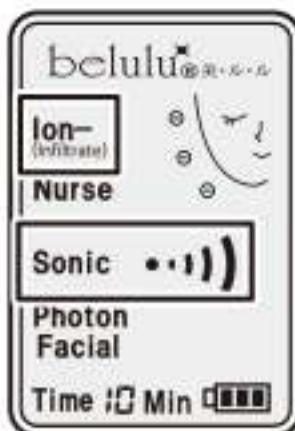

- ③ [ON/OFF]버튼으로
マイ너스 이온 + 초음파 모드로 설정합니다.
이후 초음파 강도를 설정합니다.

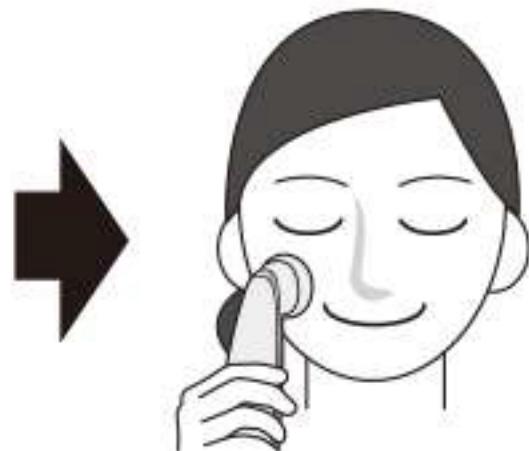

- ④ 3D헤드를 피부에 대고
부드럽게 미끄러지듯 이동하며
사용합니다.
자세한 사용 방법은
다음페이지에 기재되어 있습니다.

어드바이스



BELULU 미용 젤과 점성이 강한 화장품이
없는 경우에는 평소 쓰시는 마스크 팩을
사용한 채로 마스크 팩 위에서
이온 도입을 하시면 됩니다.

【사용방법】

얼굴을 "입 주위 오른쪽", "입 주위 왼쪽", "오른쪽 뺨", "왼쪽 뺀", "코", "이마"로 구분하고 부분마다 3D헤드를 사용하시면 얼굴 전체를 빈틈없이 관리할 수 있습니다. 코 주위 등 특히 노폐물이 쌓이기 쉬운 부분은 3D헤드를 적용 시간을 오래하여 중점적으로 관리합시다. 화장품(젤, 에센스 등)은 한 관리 부분이 끝날 때 마다 추가하는 것을 추천합니다.



【사용시간예시】



상기의 시간은 예시입니다.
자신의 피부 상태에 맞춰서
자유롭게 바꿔 주세요.

[아래에서 위로] [안에서 밖으로] 를 기준으로 움직입니다.
이온 도출과 같은 방법으로, 빙글빙글 원을 그리면서 움직여주세요.

【입 주변】



턱을 기점으로
뺨을 향해서 원을
그리며 이동합니다.

【뺨】



코 옆을 기점으로
눈 머리를 향해서
미끄러지게
이동합니다.

【코】



콧날에 원을 그리며
상하로, 코 주변도
원을 그리듯
이동합니다.

【이마】



상하 좌우로 원을
그리며 부드럽게
돌복하며
이동합니다.

[마이너스 이온 도입 + 초음파]에서 사용을 종료하는 경우,
얼굴에 남은 화장품을 흡수시킨 후 로션, 크림 등으로 유분을 보충합시다

이온 도입에서 얼굴에 남은 젤, 스킨, 에센스는 닦아내지 않고 그대로 사용해주세요.
마스크팩을 사용한 경우, 떼어내고 사용해주세요.
※로션, 크림은 사용하지 마세요.

광 에스테만 하실 경우 화장품을 사용하지 않으셔도 됩니다.

LED 라이트를 장시간 직시하지 마세요. 사용중에 눈을
감거나 보호 안경을 장착한 상태로 사용해주세요.



- ① [PHOTON] 버튼으로 광에스테 모드로 설정해주세요. 피부 고민에 따라서 LED컬러를 설정 해 주세요.

- ② LED 컬러 별로 케어 하고 싶은 부위에 사용해주세요

빨강 LED

630nm파장

콜라겐을 수치를 올리고 피부의 기미, 주름, 처짐 등을 개선합니다. 자외선으로 인한 손상을 복원하는 기능과 개선 안티 에이징 효과가 기대됩니다.

주름이나 늘어짐이 있는 부분에 사용하세요.

파랑 LED

415nm파장

여드름의 원인인 활성 산소를 배제하는 작용으로 여드름을 진정시키면서 피부를 정돈 해줍니다.

여드름, 여드름 자국 등, 신경 쓰이는 부분에 사용하세요.

초록 LED

525nm파장

신진대사를 촉진하고 피부를 다시 태어나게 합니다. 주름살이나 여드름 자국, 흉터 자국 등에 의한 색소 침착을 개선합니다.

기미나 색소침착으로 신경 쓰이는 부분에 사용하세요.

8 사용완료 후

- ON/OFF버튼을 누르고 본체의 전원을 끕니다.
- 얼굴에 남은 젤과 스킨, 에센스를 피부에 흡수 시킵니다.
- 사용이 끝난 후 로션, 크림으로 지방분을 보충합니다.
- 3D헤드에 남은 젤과 스킨, 미용제는 물티슈 등으로 깨끗이 닦아낸 후 마른 수건으로 수분을 제거하고 청결하게 보관하세요.
※시너·벤젠 등의 용제류는 사용하지 마세요.
- 방수가 아니므로, 물로 씻지마세요.
- 청결을 유지하기 위해 상자에 보관하고 먼지가 불지 않도록 보관하세요.
- 직사 광선이나 고온 다습을 피하시고, 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

9 FAQ 자주 묻는 질문들

전원이 켜지지 않아요.	<p>● 방전되지 않았나요? 충전지는 특성상, 전원이 꺼진 상태에서도 조금씩 자연 방전, 충전이 만료되는 경우가 있습니다. 충전 케이블로 1시간 정도 충전을 하셔서 다시 ON/OFF 버튼을 눌러보세요.</p> <p>[해결되지 않는 경우] 본체의 초기 불량 및 고장으로 생각되므로 판매처로 연락 주세요.</p>
충전이 되지 않거나 케이블 각도에 의해 충전이 불안정합니다.	<p>● 케이블을 제대로 연결 하셨나요? 케이블의 플러그가 잘못 연결되어 있으면 충전이 되지 않습니다. 사용설명서[본체의 충전]을 참조 후, 코드가 잘 연결됐는지, 확실히 삽입되어 있는지 확인하십시오.</p>
초음파와 진동이 실행되지 않습니다.	<p>● 작동하는지 잘 확인 해주세요. 초음파는 1초에 약 300만번 진동하고 있으며, 그 속도가 눈에 보이거나 피부에 자극이 느껴지는 것은 아닙니다. , "7페이지 "의 "초음파"항목을 참조 하고, 작동 확인을 해 주세요.</p>

<p>이온 도출 이온 도입이 작동하지 않습니다.</p>	<p>● 작동하는지 잘 확인 해 주세요. 이온 도출·도입은 피부에 미약한 전류를 피부에 흘리는 기능이고, 시각, 자극, 소리로 느껴지는 것은 아닙니다. ※ 이온 도입시 동시에 가동하는 진동 마사지는 진동·소리를 동시에 느낄 수 있습니다. "7페이지"의 "플러스이온 모드" "マイ너ス 이온 모드"의 항목을 참조하고, 동작 확인을 실시하세요.</p>
<p>버튼을 누르면 액정 패널 불이 꺼집니다.</p>	<p>● 고장이 아닙니다. 본 제품의 절전을 위해서, 버튼 조작 후 일정 시간 지나면 액정 패널의 라이트를 자동적으로 소등합니다. 라이트가 소등된 경우는 버튼을 누르면 다시 점등 됩니다.</p>
<p>버튼을 눌러도 모드가 바뀌지 않습니다.</p>	<p>● 고장이 아닙니다. 전원 ON상태에서 일정 시간 경과하면, 액정 패널의 라이트가 소등합니 다. 이 상태에서 버튼을 누르면 라이트는 점등되지만 모드는 바뀌지 않 습니다. 액정 패널 소등 후에 모드를 바꾸고 싶은 경우에는, 한번 버튼 을 누르고 라이트를 점등시킨 뒤 다시 한번 버튼을 눌러야 다음모드로 바뀝니다.</p>
<p>액정 패널 표시가 보기 힘들고, LED광이 약해졌습니다.</p>	<p>● 충전이 얼마 남지 않았습니다. 배터리가 얼마 남지 않은 경우, 액정 패널이나 LED의 빛이 약해 집니다. 액정 패널 하단의 배터리 잔량을 확인하고 잔량이 적은 경우에는 충전을 하세요. [충전해도 문제가 해결되지 않을 경우] 본체의 초기 불량 및 고장으로 생각되므로 판매처로 연락 주세요.</p>
<p>사용 중 [삐-] 소리가 나면서 전원이 꺼졌습니다.</p>	<p>● 고장이 아닙니다. 사용시간 기준으로 각 모드 가동 후 10분 경과하면 자동적으로 전원이 꺼집니다.</p>

사용 중,
누전 된 것 처럼
찌릿찌릿
합니다.

● 누전이 아닙니다.
본 상품의 손잡이 금속부에 미세한 전류를 흘려 피부 안
까지 미용 성분을 침투시키기 때문에 사람에 따라서는
분자 전류에 의한 자극을 느낄 수 있습니다.
분자 전류는 인체에는 무해하지만 민감하신 분은 초음파
의 강도를 낮추고 쓰십시오.

FAQ

Q. 에센스만 사용해야 하나요?

A. 스킨이나 젤도 괜찮지만, 스킨의 경우 수용성으로
피부에 머물기 쉽고, 농도가 짙고, 걸쭉한 것을
추천하고 있습니다. 또한 미용 성분을 고분자상태로
피부깊숙이 침투시키므로 젤이나 미용성분이 고농도로
이루어진 화장품이 효과가 더 좋습니다.

Q. 임신중에 사용해도 괜찮을까요?

A. 임신 중에도 사용 가능하지만, 임신 중에는 호르몬
밸런스가 불안하고 피부도 민감한 상태이므로 사용
의 타이밍에 따라서는 드물게 피부 트러블이 일어
날 경우가 있습니다. 꼭 의사와 상담 후,
피부의 상태를 보면서 사용하시기를 추천하고
있습니다.(미용기의 기능이나 에센스 성분이 산모나
태아에게 영향을 끼치는 일은 없습니다. 안심하세요.)

Q. 3D헤드 부분의 재질이 궁금합니다.

A 스테인레스를 사용합니다. 상처와 부식 및 녹에 강하고, 알레르기 반응이 일어나기 어렵다고합니다.
※모든 사람에게 알레르기가 일어나지 않는건 아닙니다. 민감한 피부일 경우 팔의 안쪽 등에서 테스트를 하신 후 본 제품을 사용해주세요.

Q. 피부 건조함 때문에 세안 후 바로 화장품을 바르고 [이온 도출]을 해도 될까요?

A 이온 도출은 손세안으로 제거되지 못한 노폐물을 흡착시켜 피부속을 깨끗하게 정돈해줍니다. 세안 후 바로 스킨을 바르면, 노폐물이 남은 채로 모공이 막혀버려, 그 후의 이온 유도·도입의 효과가 떨어지게 됩니다. 피부 당김은 피부 내부의 건조함 때문에 철저하게 보습을 해줘야합니다. 이온 유도에서 확실히 노폐물을 제거한 후 → 이온 도입으로 보습을 해주세요. 피부 속이 촉촉해져야, 건조한 피부가 개선됩니다.

Q. 사용해도 효과가 전혀 느껴지지 않습니다.

A. 효과는 개인차가 있습니다.

또한 이 제품은 어디까지나 가정사용을 전제로 만들어 졌고 에스테틱 처럼 강력한 즉효성은 없습니다.
꾸준하게 사용 하시면, 효과를 실감할 수 있습니다.

Q..이온 도출을 해도 화장솜이 갈색이 되지 않습니다.

A. 잔여물이 닦이는 방식에는 개인차가 있으며 반드시 화장솜이 더러워지는 것은 아닙니다. 갈색 얼룩은 파운데이션의 잔여물로 평소 화장을 하지 않는 분이나, 클렌징 세안으로 파운데이션이 깨끗하게 제거 된 경우는, 화장솜은 갈색이 되지 않습니다.
각질과 피지도 이온 유도에서 제거되지만, 하얀색인 화장솜과 색이 같아서, 육안으로 확인하시기 어렵습니다.

Q..매일 매일 사용 하는 것이 좋을까요?

A. 본 제품에 탑재된 기능은 높은 미용 효과를 발휘 하지만, 너무 많이 쓰면 피부에 부담을 줄 수 있습니다.
피부에 부담을 주지 않고 사용하기 위해서, 본 설명서에 기재되어 있는 사용 빈도를 참고해주세요.
단번에 효과를 얻는 것이 아니라 꾸준히 사용하시는게 중요합니다.

보증기간 내 수리 설명

보증 기간 내에는 수리비용을 무상으로 제공합니다.

한국 TEL : 02-576-0701 E-mail : cs@wable.co.kr

일본 TEL : 0120-09-5121 & 050-4560-1423

E-mail : kireido@163.com

중국 TEL : 0771-2875241 E-mail : kireido@163.com

※ 사용 횟수에 관계 없이 구입으로부터 3개월 이상 경과한 경우는 수리품 왕복 배송료를 고객께서 부담합니다.

※ 보증 기간 종료 후, 수리 할 수 있는 경우는 요청에 의한 유상으로 수리할 수 있습니다.

※ 다른 문의 사항 있으시면 연락 주세요.

한국 서비스 접수처

서울특별시 서초구 서운로 26-1 보일빌딩 402 웨이블통상
우편번호 : 06731

일본 서비스 접수처

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25 謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係 〒221-0801

중국 서비스 접수처

广西壮族自治区南宁市西乡塘区龙腾路80号台北中心
绮丽堂售后部

【보증서】

※ 본체 이외의 부속품은 소모품 이므로,
보증 대상 제외품입니다.

이 책은 본보증서의 기재 내용으로 수리를 실시하는 것을 약속하는 것입니다.

구입일로부터 아래 기간 중에 고장이 발생한 경우는 본서 제시한 후 수리를 맡기세요

< 서비스규약 >

- 취급 설명서에 따른 정상적인 사용 상황에서 고장 난 경우는 서비스 가능합니다.
- 보증 기간 내에 고장 나서 수리를 받는 경우는 상품과 보증서를 제시에 의뢰 주세요.
- 다음과 같은 경우에는 보증 기간 내에서도 유상에 됩니다.
 - 사용 상의 오류 및 부당한 수리 및 개조에 의한 고장 또는 손상.
 - 구입 후의 이동, 낙하나 수송 상의 부상.
 - 화재, 지진, 낙뢰 기타 천재 지변, 공해나 이상 전압에 의한 고장 또는 손상.
 - 본 보증서가 없는 경우.

■ 품번 :

■ 品名 : belulu classy

■ 수리보증기간: 판매일부터 1년 간(사용횟수 상관 없이)

■ 고객성명 : _____

■ 주소 : _____

■ 수주번호: _____

판매처 : BELULU

구매일자 : 년 월 일 서명