


belulu Dressy

美・ル・ル ドレッシー

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので大切に保管してください。

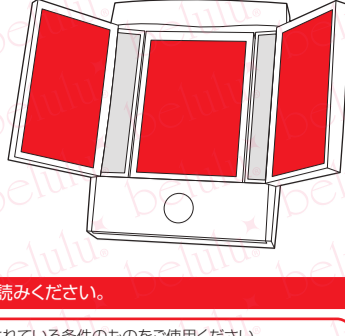

ご使用前に必ずお読みください。

- 使用電源、電源アダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
- 本品をご使用中は保護メガネを着用し、LEDライトを直接見たり、目に照射しないでください。LEDライトを長時間直射しますと、目を傷めるおそれがあります。
- 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
- 電源アダプターのコードを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
- ストープ等高温になる場所や本品や電源アダプターを使用したり放置したりしないでください。
- 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
- 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
- 万一、皮膚に異常が見られた場合は、本製品のご使用を中止して医師に相談してください。
- 前面のリストをよくご確認ください。該当する方は本製品を使用しないでください。
- 本品の分解、改造、お客様ご自身による修理などは絶対にしないでください。本製品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本体や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。

- 本体の水濡れはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾やウエットティッシュ等でやさしく拭いてください。また、ペンジン、シンナー等の溶剤類で拭かないでください。
- 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造、お客様ご自身による修理等をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

美・ル・ル ドレッシー 機能紹介

高光度赤色LEDによる光エステでパーフェクト美肌!

赤色LEDがお肌を活性化させ、コラーゲンの生成をサポートして美しい素肌へ導きます。ハリ・ツヤがアップするのでアンチエイジングケアに最適です。また、三面鏡になっているので、顔の側面など隅々までまんべんなくケアできます。

光が強いのでお手入れ時間も短縮!

これより赤色LED光が素早く肌細胞に作用し効果を発揮するので、一箇所のお手入れ時間はなんとわずか2分半!

朝の忙しい時間でも夜遅く帰ってきて疲れている時でも、あっという間に美肌ケアができちゃいます。

電源自動OFFで省エネ(赤色LEDのみ)


赤色LEDは、2分半経過すると自動的に消灯します。一箇所のお手入れ時間の目安に。

5倍拡大ミラーと3パターンのホワイトライト付き

細かいメイクの時に便利な5倍拡大ミラーと、部屋の明かりの色に応じて選べる3パターンのホワイトライトが付いていますので、朝のメイクがぐっとラクに。

照射面の角度を7段階調節できます

本体仕様 ※セット内容や仕様は予告なく変更になる場合がございます。

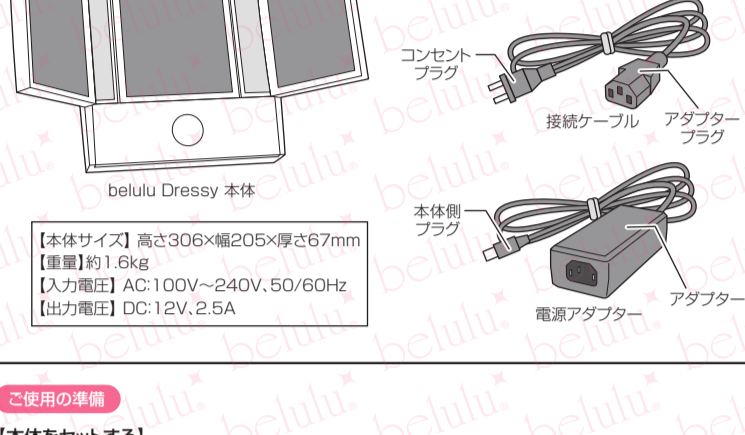


belulu Dressy 本体

【本体サイズ】高さ306×幅205×厚さ67mm
【重量】約1.6kg
【入力電圧】AC: 100V~240V, 50/60Hz
【出力電圧】DC: 12V, 2.5A


ご使用の準備

【本体をセットする】

- 本体背面のスタンドとスタンドストッパーを起こします。
- スタンドストッパーの溝にスタンドを入れて角度を固定します。
- スタンドを入れる溝の位置によって、本体の角度を7段階調節することができます。

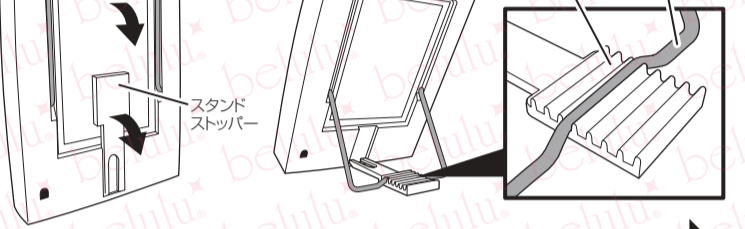


7段階調節

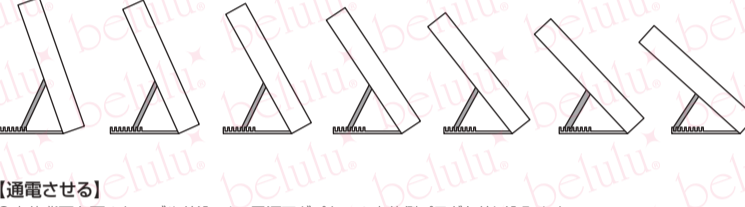

【通電させる】

- 本体背面左下のケーブル差込口に、電源アダプターの本体側プラグを差し込みます。
- アダプターと、接続ケーブルのアダプタープラグをつなぎます。
- 接続ケーブルのコンセントプラグを、家庭用コンセントに差し込みます。

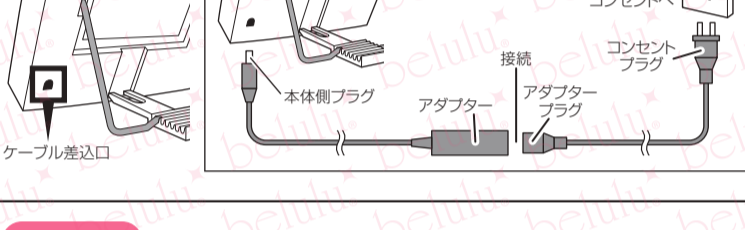

操作方法



【操作ボタン】
全ての操作をこのボタンで行います

【ホワイトライトのパターンを設定する】


- 「通電させる」を参照し、ケーブル類を正しくセットしてください。
- 操作ボタンを軽くタッチすると、「ウォームホワイト」が点灯します。
- 操作ボタンをタッチすることにより、「ナチュラルホワイト」→「クールホワイト」の順に切り替わります。



【使い分け方の一例】

- 【ウォームホワイト】
青みの強い白色蛍光灯を使っている部屋で使用する場合など
- 【ナチュラルホワイト】
昼間などに自然光に近い色味でメイクをしたい場合など
- 【クールホワイト】
電球など赤みのある電灯を使っている部屋で使用する場合など

【赤色LEDの点灯】 非常に強い光が照射されます。目を傷めるおそれがありますので、保護メガネを着用するか、直射しないよう十分ご注意ください。

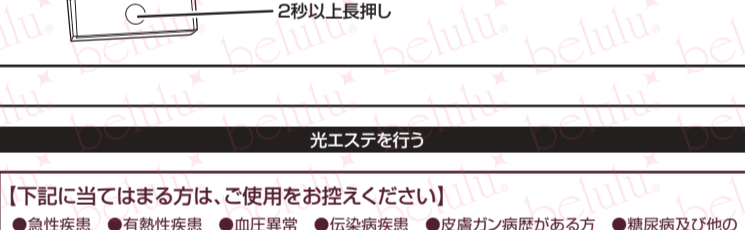

- 操作ボタンを2秒以上長押しすると、赤色LEDが点灯します。
- 赤色LEDを消灯したい場合は、再度操作ボタンを2秒以上長押ししてください。
- 赤色LEDは2分半で自動的に消灯します。

光エステを行う

【下記に当てはまる方は、ご使用をお控えください】

- 急性疾患 ●有熱性疾患 ●血圧異常 ●伝染病疾患 ●皮膚ガン病歴の方が ●糖尿病及び他の疾患による皮膚異常疾患患者の方 ●アトピー性皮膚炎の方 ●過度の日焼けが肌か炎症を起こしている方 ●ニキビが化膿し炎症を起こしている部分がある範囲にわたる方 ●アレルギー体質で特に肌が敏感な方 ●化粧品による皮膚炎を起こしている方 ●特に健康がすぐれない方 ●ステロイド系ホルモン剤等を長期服用されている方

【下記の部位にLED光を当てないでください】

- 悪性腫瘍 ●切り傷 ●整形などでシリコンが使用されている部分
- 粘膜などのデリケートゾーン

【妊娠中・授乳中の方について】

本品は妊娠中・授乳中でもご使用いただけますが、妊娠中・授乳中はホルモンバランスが不安定でお肌もデリケートな状態になっている為、ご使用のタイミングによっては稀に肌トラブルが起る場合がございます。必ず医師とご相談の上、お肌の様子を見ながらご使用いただくことをおすすめしております。(本品が母体や胎児に影響を及ぼすことはありません。)


【ご使用前のご注意】

- 普段通り洗顔してタオルで水気をしっかり拭き取った後、化粧水や美容液を塗ってください。
- 光エステ中は保護メガネを着用し、目を閉じてください。LEDライトを長時間直射しますと、目を傷めるおそれがあります。
- ご使用中は、腕時計やジュエリー等の貴金属類は外してください。
- ご使用中、肌に異常を感じたり、肌に合わないと感じた場合はご使用を中止し、医師に相談するか当社へご連絡ください。

推奨使用頻度 1回2分半を一日一回/週4~毎日

照射時のご注意


- 水平で安定した場所に本体を置いてください。
- 照射パネルをお好みの角度に調節してください。
- 顔の位置は、本体のセンターパネルに合わせてください。
- LED照射パネルから顔までの距離は、20cm~40cm程度空けてください。

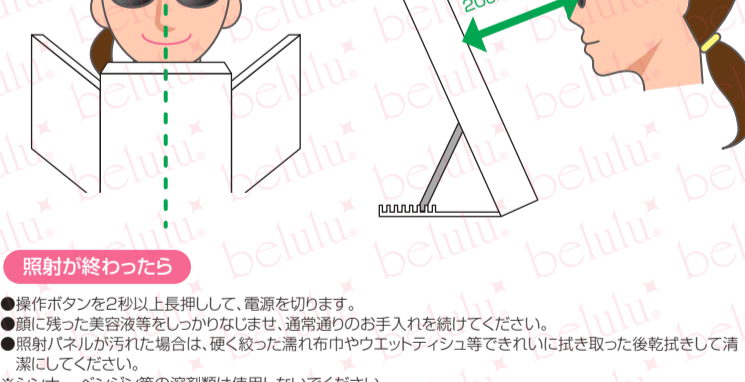

照射が終わったら

- 操作ボタンを2秒以上長押しして、電源を切ります。
- 顔に残った美容液等をしっかり洗い流し、通常通りのお手入れを続けてください。
- 照射パネルが汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾やウエットティッシュ等できれいに拭き取った後乾拭きして清潔にしてください。
- ※シンナー等溶剤類は使用しないでください。
- ※防水ではありませんので、水洗いはしないでください。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所、ゴミやホコリを避け、お子様の手が届かない場所に保管してください。

belulu Dressyの赤色LEDは体にもお使いいただけます

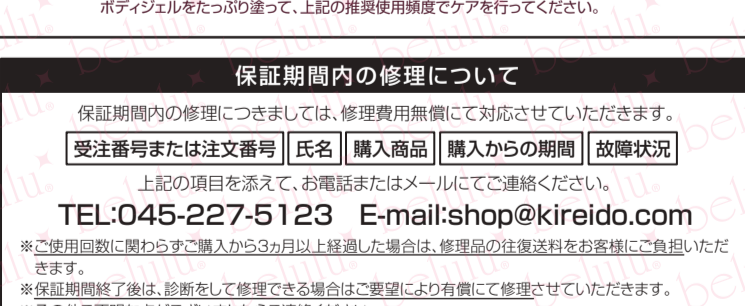

ヒップのたるみ、デコルテのザラつき、背中のカサつき等々...顔だけでなく体のお悩みに、belulu Dressyは効果を発揮します。ボディジェルをたっぷり塗って、上記の推奨使用頻度でケアを行ってください。

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 氏名 購入商品 購入からの期間 故障状況

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

TEL:045-227-5123 E-mail:shop@kireido.com

- ※ご使用回数に関わらずご購入から3か月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。
- ※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。
- ※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先

〒231-0027
神奈川県横浜市中区扇町2-5-15 リラックスビル6F
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

本書は本書記載内容で修理を行うことを約束するものです。お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

《故障規約》

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
 - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - c. 火災、地震、落雷その他の天災地災、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - d. 本書の提示がない場合。
 - e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

●通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。

●この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。

●美顔器本体以外の付属品は消耗品の為、保証対象外となります。

■品番: ■品名:belulu Dressy

■修理保証期間:販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)

■お客様名: _____

■ご住所: _____

■受注番号: _____

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル

販売日付: 年 月 日 印