

belulu PoreClear

美・ル・ル ポアクリア

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので大切に保管してください。



ご使用前に必ずお読みください。

- 警告**
- 使用電圧、充電ケーブルなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
 - 本製品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
 - 万一、煙や臭気、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
 - 充電ケーブルを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
 - ストープ等高温になる場所で本品やケーブルを使用したり放置したりしないでください。
 - 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
 - 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
 - 万一、皮膚に異常が見られた場合は、本製品のご使用を中止して医師に相談してください。
 - 下記のリストをよくご確認ください。該当する方は本製品を使用しないでください。
 - 強い力で吸引しますので、皮膚が引き込まれないよう十分ご注意ください。吸引口を皮膚に強く押し当てたり、3秒以上当て続けてください。
 - 本品の分解、改造、お客様ご自身による修理などは絶対にしないでください。本製品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本体や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。

- 注意**
- 皮膚の弱い部分への過度のご使用はお避けください。
 - 使用中、痛み等があった場合は、すぐに吸引口を肌から離してください。
 - 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
 - 本体の水洗いはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。また、ベンジン、シンナー等の溶剤類は拭かないでください。
 - 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造、お客様ご自身による修理等をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

〈下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください〉

- 急性疾患 ●有熱性疾患 ●血圧異常 ●伝染病疾患 ●皮膚ガン病歴がある方 ●糖尿病及び他の疾患による皮膚異常疾患患者の方 ●アレルギー性皮膚炎の方 ●過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方 ●ニキビが化膿し炎症を起こしている部分が広範囲にわたる方 ●アレルギー体質で特に肌が敏感な方 ●化粧品による皮膚炎を起こしている方 ●特に健康がすぐれない方 ●ステロイド系ホルモン剤等を長期間服用されている方 ●アザがでやすい方

〈下記の部位には使用しないでください〉

- 悪性腫瘍 ●整形などでシリコンが使用されている部分 ●粘膜などのデリケートゾーン ●傷口・肌荒れ等がある部分 ●肌が炎症を起こしている部分

美・ル・ル ポアクリア 機能紹介

強力バキュームで毛穴の汚れを残さず吸引

普通の洗顔ではどうしても残ってしまう毛穴の奥の汚れを根こそぎ吸引。黒ずみ・ニキビ知らずの肌を整えます。

用途に合わせて選べる3種類の吸引ヘッド付き

形状の違う3種類の吸引ヘッドを付け替えることで、角質のケアや小ジワのケアなど、様々なお手入れがピンポイントでできます。

【円型ヘッド小】	【ダイヤモンドパウダーヘッド】	【楕円ヘッド】
吸引力が弱いので、目の周りや口周りなど、皮膚の薄い部分のケアに最適です。小鼻のキワなど細かい部分もスムーズにお手入れできます。	吸引口にダイヤモンドパウダー入りのストーンが付いており、剥がれ落ちた古い皮膚や角質を除去します。くすみやカサつきが気にならない肌。	円形ヘッドを押しつぶしたような形状の楕円ヘッドは、シワのケアに最適です。吸引口がシワにフィットし、吸引することでシワが目立ちにくくなります。

見やすい液晶パネル搭載

電池残量と吸引力の強さが表示されるので、充電のタイミング等が一目で分かります。

初めての方、肌が弱い方でも安心！吸引力を調節可能

吸引力を5段階調節できます。お好みに合わせて設定してください。

ヘッド部分は取り外し・分解可能

ヘッド部分の中には、吸引した汚れをキャッチするスポンジが装着されています。ヘッドは取り外して水洗い可能なので、いつも高い吸引力を清潔を保てます。※スポンジ以外の部品は水洗いしないでください。

本体仕様

※付属品の内容や仕様は、予告なく変更になる場合がございます。

充電ケーブル

液晶パネル

ポアクリア本体

付け替え用ヘッド3種

【セット内容】

- belulu PoreClear本体
- 付け替え用ヘッド3種 ●充電ケーブル
- 保証書付き取扱説明書(本書)

【製品仕様】

- 定格電圧: AC100-240V (50Hz/60Hz)
- 定格消費電力: 3W
- 重量: 146g
- サイズ: 高さ15×幅5×厚み5cm

【本体の充電】

- ご購入後初めて使用する場合や長時間使用しなくなった場合、電池残量が少なくなった場合は、本体を充電してください。
- 必ず電源を切ってください。
- 充電ケーブルの充電ジャックを本体の充電口に、USBコネクタをパソコンや付属のUSB式アダプター等のUSBポートに接続します。
- 液晶パネルが青色に点灯し、電池残量アイコンが動きます。
- 充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電時間や稼働時間は、本製品の使用頻度によって異なります。
- 充電が完了すると、電池残量アイコンが下記イラスト80~100%の状態まで静止しますので、ケーブルを外してください。
- 充電しながらのご使用はできません。充電中以外も、ケーブルを本体から抜いてください。
- 充電に適した室温は、15~30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温下で充電を行なってください。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。
- 内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合でも月に1回充電を行なってください。
- 正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。

電池残量



ボタン操作

【吸引力設定ボタン】
押しごとに、吸引力を弱めることができます。


【吸引力設置ボタン+】
押しごとに、吸引力を強くすることができます。

【電源ボタン】
電源のON/OFFする際に使用します。

【液晶パネル】

電池残量 吸引力

- 電源ボタンを押すと電源がONになり、液晶パネルが青色に点灯して電池残量が表示されます。※稼働はしません。
- 吸引力プラスボタンを押すと、吸引力レベル1で吸引込みが始まります。
- 吸引力プラスボタンを押すごとに吸引力が強くなり、吸引力マイナスボタンを押すごとに吸引力が弱くなります。
- 電源ボタンを押すと、電源がOFFになります。

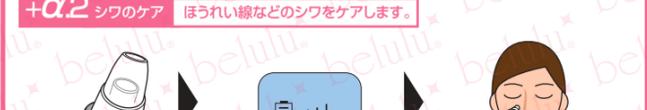

操作中や電源をOFFにした際、液晶パネルのアイコン表示が残像のように薄く残る場合がございますが、異常ではありません。時間経過で徐々に消えます。

1. 毛穴・角質ケア 毛穴の汚れを吸引しながら、洗顔で落とさきれなかった古い皮膚や角質を除去します。

- ① 通常通り洗顔し、水気をよく拭き取ってください。
- ② ダイヤモンドパウダー付きヘッドを本体にセットします。
- ③ 吸引力設定ボタンで吸引力の強さを設定します。初めての方や肌が弱い方は、レベル1から始めてください。
- ④ 【吸引ヘッドの動かし方】を参照し、顔全体をまんべんなくタッピングします。

+α.1 ピンポイントケア 顔の細かい部分や皮膚が薄い部分をケアします。

- ① 円型ヘッド小を本体にセットします。
- ② 吸引力設定ボタンで吸引力の強さを設定します。
- ③ 鼻周りや口周りなど、細かい部分や皮膚が薄い部分をやさしくタッピングします。

+α.2 シワのケア ほうれい線などのシワをケアします。

- ① 楕円ヘッドを本体にセットします。
- ② 吸引力設定ボタンで吸引力の強さを設定します。
- ③ 小ジワが気になる部分をやさしくタッピングします。

吸引ヘッドの動かし方

【ダイヤモンドパウダー付きヘッド】
目の周りなど、皮膚が薄い部分には当てないでください。

額・フェイスラインを起点に、肌を持ち上げるように頬に向かって下から上へ。

鼻の横を起点に、顔の中心から外側へ。

額の中心から左右交互に。

鼻はキワや周辺を細かくタッピング。

【円型ヘッド小】

口周りからフェイスラインへ。

小鼻の周りから外側へ向かう。

目の周りは特にやさしく。

【楕円ヘッド】

ほうれい線などのシワに沿って、下から上に持ち上げるように。

お手入れが終わったら

- 本品使用後は毛穴が開き、汚れが入りやすい状態になっています。すぐに化粧水で毛穴を引き締め使用してください。
- 本体が汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾や消毒用アルコールを浸み込ませたやわらかい布等でやさしく拭いてください。
- 防水仕様ではありませんので、水洗いはしないでください。
- シンナー・シンナー等の溶剤は使用しないでください。
- 清潔を保つため、箱等に入れホコリやホコリがつかないように保管してください。
- 直射日光や高温多湿を避け、お子様の手が届かない場所に保管してください。

吸引部分のクリーニング

本品の吸引口部分には吸引した汚れをキャッチするスポンジがセットされています。吸引力やパワーが低下したと感じる場合はスポンジに汚れが溜まって目詰まりを起こしている状態になっています。このような場合は、下記の手順に従いスポンジの洗浄を行ってください。

- 吸引ヘッドを反時計回りに回って取り外します。
- スポンジキャップを外し、汚れキャッチスポンジを取り出します。
- 汚れキャッチスポンジは水と中性洗剤で洗ってよく絞り、しっかりと乾かしてください。
- スポンジを元通りにセットし、キャップを閉めてください。

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 氏名 購入商品 購入からの期間 故障状況

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

TEL:045-227-5123 E-mail:shop@kireido.com

※ご使用回数に関わらずご購入から3か月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先 〒231-0027 神奈川県横浜市中区扇町2-5-15 リラックスビル6F 株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。 ※本体以外の付属品は消耗品の為、保証対象外となります。

お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

【修理規約】

1. 取り扱った説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご連絡ください。
3. 次のような場合には、保証期間中でも有償になります。
 - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - d. 本書の提示がない場合。
 - e. 本書にお客様名、お買い上げ日、記入がされていない場合、あるいは文字を書き換えた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

●品番: ●品名:belulu PoreClear

●修理保証期間:販売日から1年間(ご使用履歴に関わらず)

●お客様名:

●ご住所:

●受注番号:

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル
販売日付: 年 月 日 印

- 通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くては問題ございません。ただし、お問い合わせや修理依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。
- この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではないにもかかわらず、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。