


belulu® Rebirth

美ルル リバース

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして
誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
尚、本書の末尾に保証書が付いておりますので
大切に保管してください。

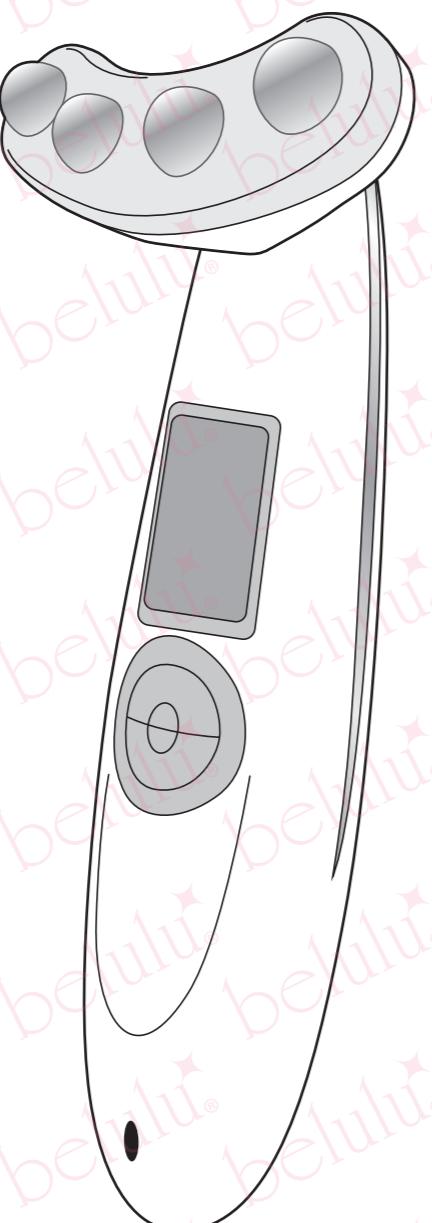

ご使用前に必ずお読みください。

- ⚠ 警告
- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
 - 本品をご使用中は、LEDライトを直接見たり、目に照射しないでください。LEDライトを直視しますと、目を傷めるおそれがあります。
 - 本品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
 - 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
 - ケーブルを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
 - ストーブ等高温になる場所で本品やケーブルを使用したり放置したりしないでください。
 - 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
 - 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
 - 万一、皮膚に異常が見られた場合は、ご使用を中止して医師に相談してください。
 - 下記のリストをよくご確認いただき、該当する方は本品を使用しないでください。
 - 本品の分解、改造などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。

- ⚠ 注意
- 皮膚の弱い部分への過度のご使用はお避けください。
 - 使用中、痛み等があった場合は、すぐに3Dヘッドを肌から離してください。
 - 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
 - 約4~8時間で充電が完了します。完了後はそれ以上充電しないでください。
 - 充電中以外は充電ケーブルを本体から外してください。
 - 本品の水洗いはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。ベンジン、シンナー等の溶剤類で拭かないでください。
 - 上記の注意・警告に従わぬ場合など、誤ったご使用・分解・改造をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任は負いかねます。

〈下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください〉


- 急性疾患
- 有熱性疾患
- 血圧異常
- 伝染病疾患
- 心臓疾患
- 医療用電子器具を使用されている方(ペースメーカーなどの体内埋込式医用電子機器、人工心肺などの生命維持用電子機器、心電図などの装着型医用電子機器)
- 皮膚ガン病歴がある方
- 糖尿病および他の疾患による皮膚異常疾患者の方
- 皮膚のトラブル(アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、ニキビが化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌が敏感な方)
- 化粧品による皮膚炎を起こしている方
- 特に健康がすぐれない方
- ステロイド系ホルモン剤等を長期間服用されている方

〈下記の部位には使用しないでください〉

- 悪性腫瘍
- 切り傷
- 骨や関節の上
- 整形などでシリコンが使用されている部分
- 声帯部分
- 頭髪、目や耳の周り、粘膜などのデリケートゾーン

2 セット内容・名称

※製品仕様や外観・内容は予告無く変更になる場合があります。

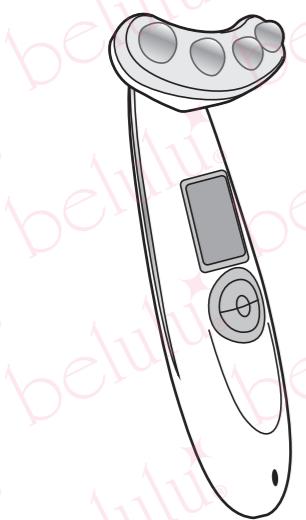


belulu Rebirth本体



保護メガネ(オプション)



充電ケーブル

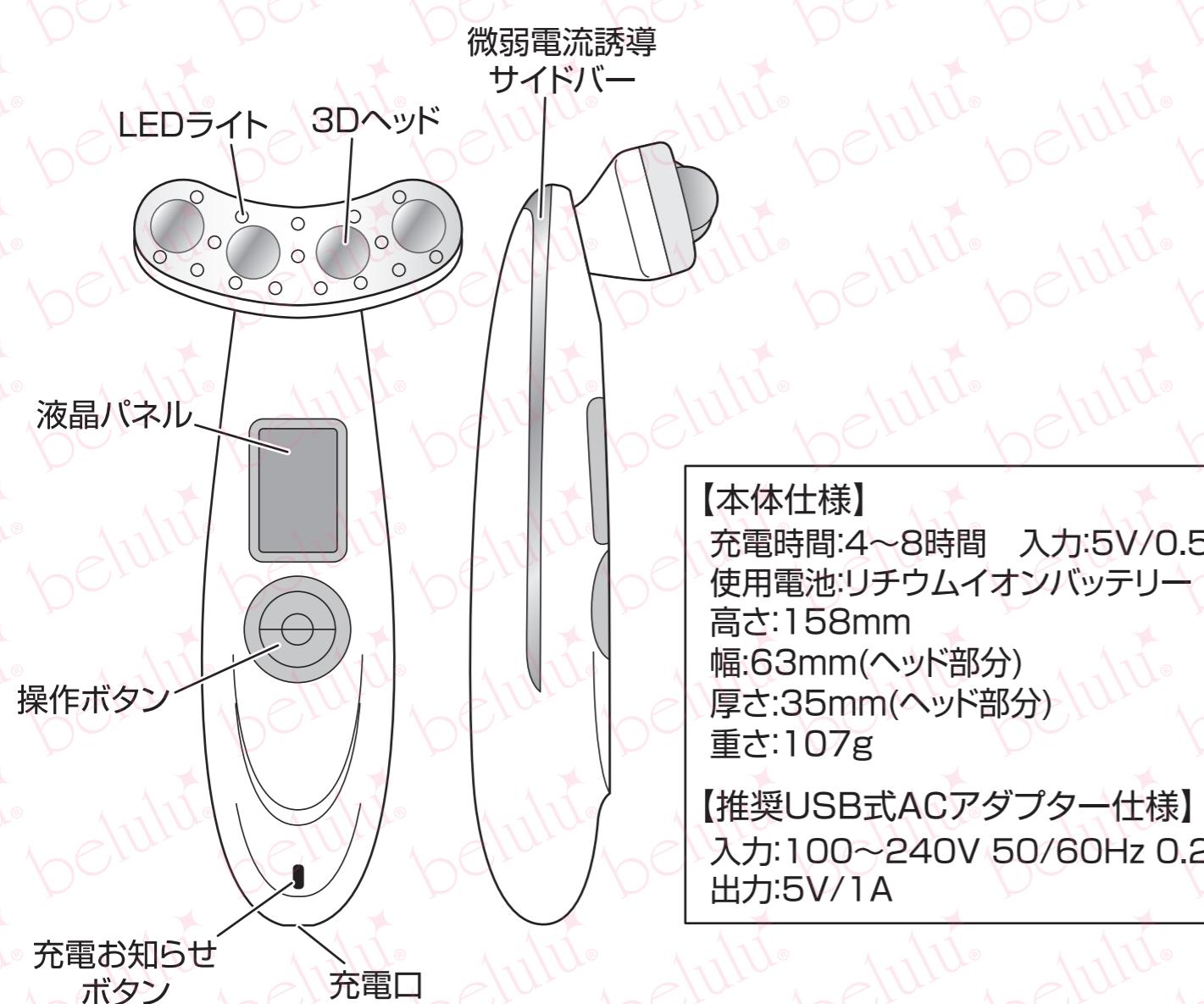

【本体仕様】

充電時間:4~8時間 入力:5V/0.5A
使用電池:リチウムイオンバッテリー
高さ:158mm
幅:63mm(ヘッド部分)
厚さ:35mm(ヘッド部分)
重さ:107g

【推奨USB式ACアダプター仕様】

入力:100~240V 50/60Hz 0.2A
出力:5V/1A

3 本体の充電

●液晶パネル右下に、充電残量が3段階で表示されます。残量が残り1または0になりましたら、充電を行ってください。



残量
75~100%



残量
50~74%



残量
25~49%



残量
0~24%

※充電残量表示はおよその数値です。

●ご購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合は、本体を充電してください。

●充電の際は、必ず電源を切ってください。

●充電ケーブルの充電コネクターを本体の充電口に、USBコネクターをパソコンやUSB付きACアダプター等のUSBポートに接続します。

●充電お知らせランプが赤色に点灯します。

※充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。

●充電時間や稼働時間は、本品の使用頻度によって異なります。


●充電が完了すると充電お知らせランプが緑色に点灯しますので、ケーブルを外してください。

●充電しながらのご使用はできません。充電中以外は、ケーブルを本体から抜いてください。

■充電に適した室温は、15~30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温下で充電を行ってください。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。

■内蔵電池保護のため、長期間ご使用しない場合でも月に1回充電を行ってください。

■正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。

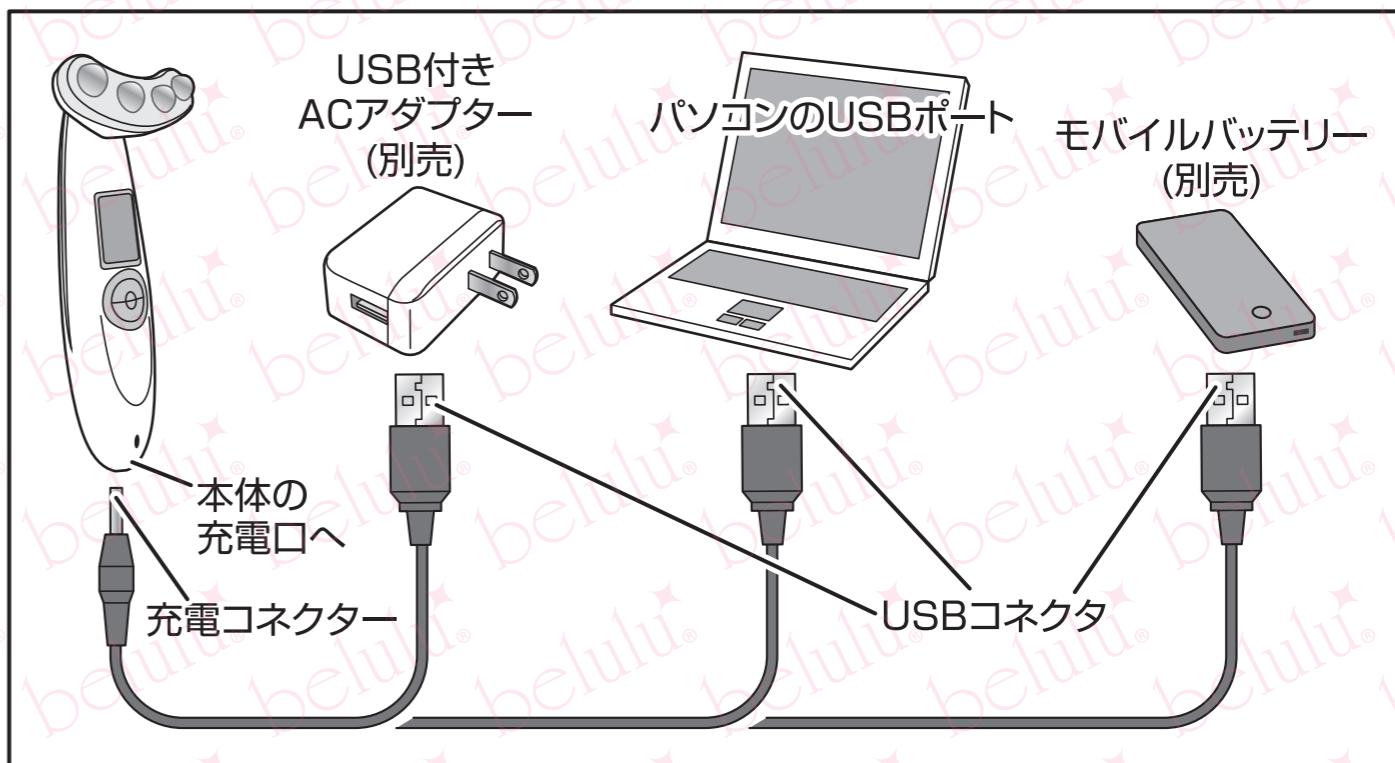


4 ボタン操作

ON/OFFボタン

電源のON/OFFとEMS/RF温熱モードの設定を行ないます。



- ON/OFFボタンを押すと電源がONになり、液晶パネルが青色に点灯して各アイコンが表示されます。
- この状態でON/OFFボタンを押すと、EMS/RF温熱モードが作動します。(強さレベル「弱」) ON/OFFボタンを押すごとに強さレベルが上がります。
※充電をONにした上で強さレベルを設定しないと、EMS/RF温熱は作動しません。
- 強さレベル「強」の状態でON/OFFボタンを押すと、電源がOFFになります。
- 強さレベルを下げたい場合は、一度電源をOFFにしてから再度設定してください。

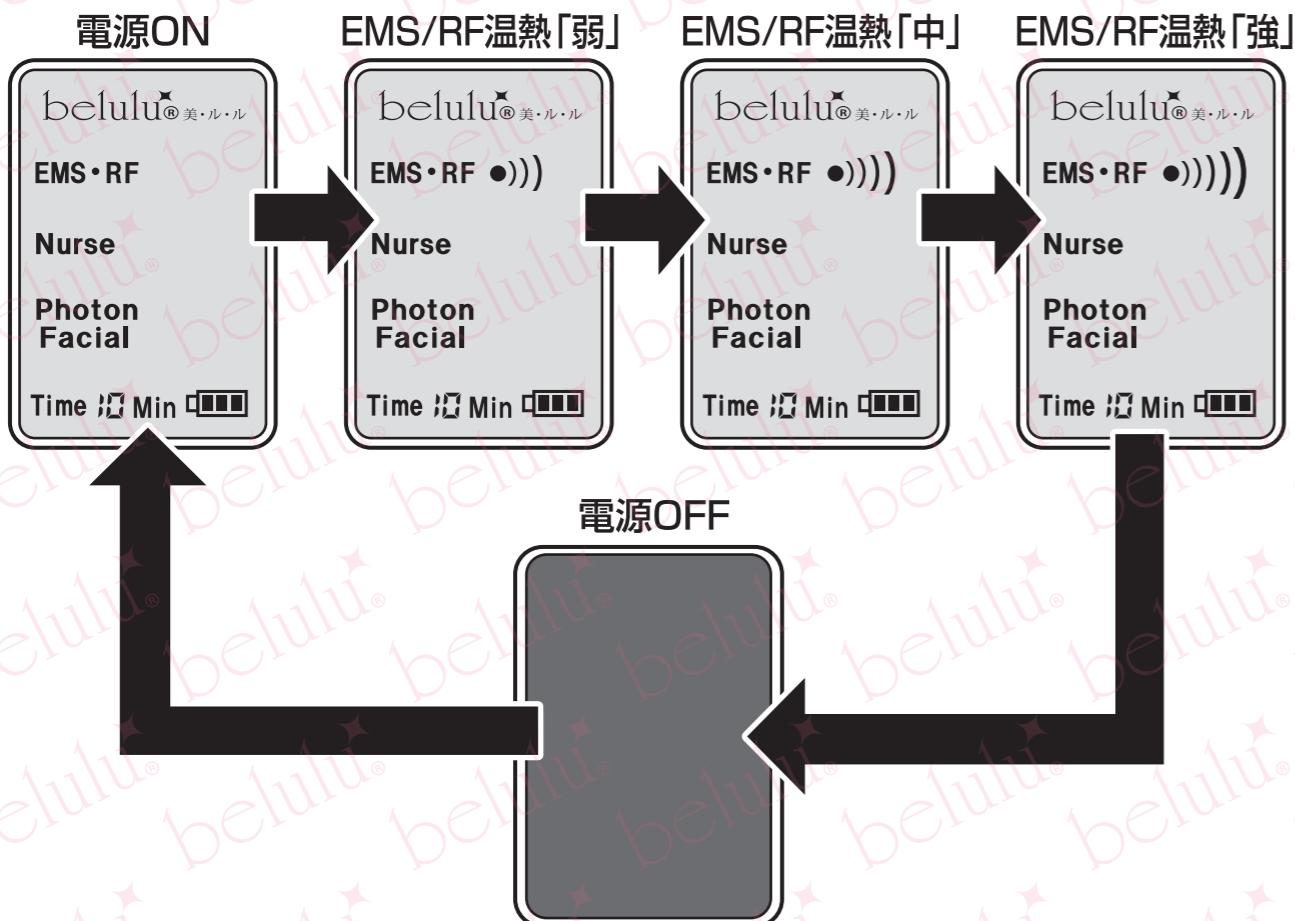

光エステ・振動エステ(Nurse)モードとの同時使用も可能です。

EMS/RF温熱モード中にPHOTONボタンを押してください。


各モードに関しましては【PHOTONボタン】の項目をご参照ください。

PHOTONボタン

LEDライトのカラーとマッサージモードの設定を行ないます。



- ON/OFFボタンを押すと電源がONになり、液晶パネルが青色に点灯して各アイコンが表示されます。
- この状態でPHOTONボタンを押すごとに振動エステ(Nurse)→赤LED→緑LED→青LED→3色順番点滅の順に切り替わります。
※LEDライトを長時間直視しないようご注意ください。
- 3色順番点滅の状態でPHOTONボタンを押すと、LEDライトすべてのアイコン表示が消え、液晶パネルのみ点灯している状態になります。
- LEDライトの変更やモードを変更したい場合は、再度PHOTONボタンを押して設定してください。

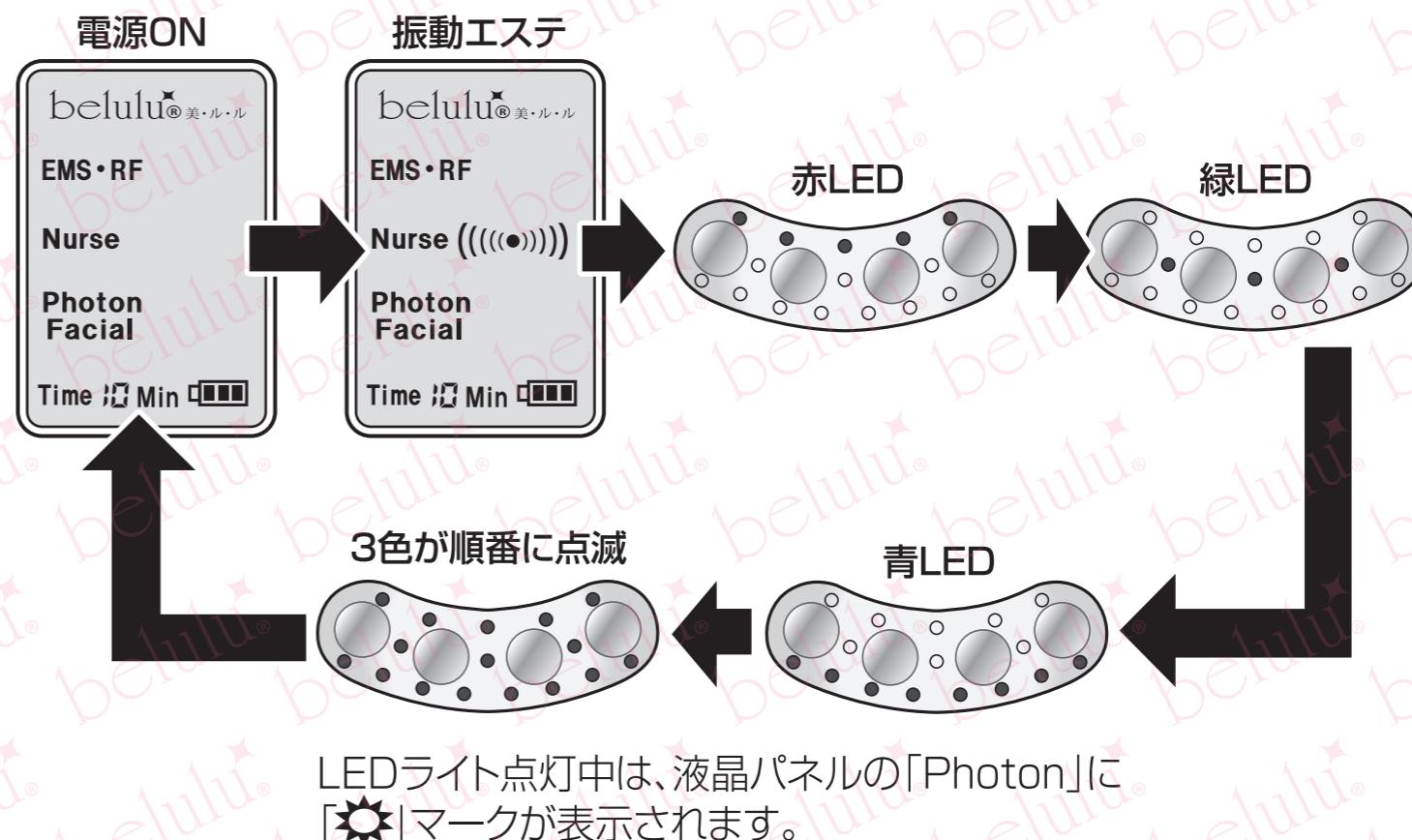

LEDライト点灯中は、液晶パネルの「Photon」に
[★]マークが表示されます。

EMS/RF温熱モードとの同時使用も可能です

振動エステ及び光エステモード中にON/OFFボタンを押してください。

各モードに関しましては、【ON/OFFボタン】の項目をご参照ください。

5 ご使用の前に

ご使用される前に、動作確認とパッチテストを行なってください。

動作確認

【EMS/RF温熱モード】

- 1.【ON/OFFボタン】のページを参照し、EMS/RF温熱モードに設定します。
- 2.液晶パネルのRFとEMSに強さレベルが表示されることを確認してください。
- 3.3Dヘッドをお肌に当て、軽い刺激を感じれば正常に稼働しています。
※刺激の感じ方には個人差があります。

EMS・RF ●))))

【振動エステモード】

- 1.【PHOTONボタン】のページを参照し、振動エステモードに設定します。
- 2.液晶パネルの「Nurse」にアイコンが点灯することを確認してください。
- 3.音と振動が発生していることを確認してください。

Nurse (((●))))

【光エステ】

- 1.【PHOTONボタン】のページを参照し、LEDライトのカラーが「赤」→「緑」→「青」→「3色順番点滅」に正常に切り替わるかご確認ください。
- 2.LEDライトの点灯に欠けがないかご確認ください。
※LEDライト確認時は長時間ライトを直視せず、視界に少し入る程度になるようご注意ください。
- 3.液晶パネルに「☀」マークが表示されるかご確認ください。

【エレクトロポレーション・メソセラピー】

- 1.音や振動は発生しません。
- 2.個人差がありますが、軽いピリッとした刺激を感じます。

パッチテスト

- 腕の内側をよく洗い、水気をしつかり拭き取ります。
- 付属の美容ジェルまたはお使いのジェルを塗り、本機のすべての機能をお試しください。
- 異常がないことを確認してから顔のケアを行なってください。万一、皮膚に異常が見られた場合は本品を使用せず、当社または医師にご相談ください。

6 機能と効果

U字型のヘッドが目元や口元、フェイスラインのたるみにぴったりフィットしてグイッとリフトアップ。

EMS、エレクトロポレーションとの相乗効果でエイジングケアに効果を発揮します。

【EMS】週3回まで

筋肉に刺激を与えて強制的に筋肉運動をさせることで、表情筋が鍛えられ、すっきりとした小顔効果が期待できます。
また、新陳代謝を活発にしてコラーゲンの生成を助けます。
※RF温熱と同時にされます。EMS単体の使用はできません。

【RF温熱】(ラジオ波) 週3回まで

高い周波数でお肌を温めます。1MHzのラジオ波による温熱効果でお肌を内側から広い範囲にわたってじんわり温め、血行を促進し肌細胞の活性化や老廃物の排除を促します。
※EMSと同時にされます。RF温熱単体の使用はできません。

【振動エステ】週3回まで

適度な振動で美容液やジェルを素早く皮膚の奥深くに浸透させます。
また、血行を良くして肌細胞を活性化させます。

【エレクトロポレーション】週3回まで

特殊な電気を与えることにより肌細胞に美容成分の通り道となる微細な孔を開け、通常では浸透しない高分子の美容成分をそのままお肌の深い部分まで届けます。
ヒアルロン酸やコラーゲンなど、高分子の美容成分が含まれた美容液を使用することで、より効果が発揮されます。

※EMS/RF温熱に設定すると、自動的にメソセラピーと同時稼働します。
単体での使用はできません。

【メソセラピー】週3回まで

エレクトロポレーションの微弱電流との組み合わせにより、脂肪溶解効果のあるスリミングジェルの浸透、効果を高めます。
通常の美容ジェルをお使いいただく場合は脂肪溶解はされません。

※EMS/RF温熱に設定すると、自動的にエレクトロポレーションと同時稼働します。
単体での使用はできません。

【光エステ】週3回～毎日

LEDライトによる肌ケアです。

LEDライトは色ごとに波長が異なり肌の奥に届く深さも違うため、色によって肌に様々な効果をもたらします。

お肌の悩みに合わせてカラーを選べます。

赤色 LED

630nm波長。

コラーゲンを増やしてシミ・シワ・たるみなどの年齢肌を改善します。紫外線によるダメージを修復する働きもあり、アンチエイジング効果が期待できます。

緑色 LED

525nm波長。

新陳代謝を促進し、お肌のターンオーバーを正常にします。シワやニキビ痕、傷跡などの色素沈着を改善します。

青色 LED

415nm波長。

ニキビの原因といわれている活性酸素を排除する働きがあります。できてしまったニキビを沈静化し、さらにニキビができにくく肌に整えます。

3色 点滅

赤・緑・青が順番に点滅。

お肌の環境を正常に整え、トラブル知らずのお肌に。

選べる組み合わせ

本品は、複数のモードを組み合わせて同時に使うことができます。

時短で素早くケアを行いたい方におすすめです。

EMS RF温熱 + 振動エステ

EMS/RF温熱の強さレベルをL(弱)、M(中)、H(強)の3段階から選択できます。

EMS RF温熱 + 光エステ

EMS/RF温熱の強さレベルをL(弱)、M(中)、H(強)の3段階から選択できます。

光エステのLEDカラーを4パターンから選択できます。

カウントダウン機能

電源をONにすると液晶パネルに時間が表示され、10分経過すると、自動的に電源が切れます。
お手入れ時間の目安にしてください。

モードを選択すると、液晶パネルの右下に「10Min(10分)」と表示され、1分毎にカウントダウンされます。



7 お手入れを始めましょう!

必ずお守りください

- 防水ではありませんので、浴室内や水気の多い場所では使用しないでください。
- 暖房器具の近くなど、高温になる場所では使用しないでください。
- 光エステ使用中は目を閉じ、LEDライトを直接見たり長時間直視しないでください。
- ケアを行なう際は、必ず美容液またはジェル、化粧水などをご使用ください。乾いた肌に使用しますと、3Dヘッドが滑りにくくなったり、肌トラブルの原因になります。(光エステのみ行なう場合は塗らなくても構いません)
- 本体側面の微弱電流誘導サイドバーに手が触れるように握ってください。
- 3Dヘッドは肌に対して真っ直ぐ当ててください。また、肌に強く押し付けたりこすったりせず、やさしく滑らせるようにして動かしてください。
- ご使用時は、腕時計やジュエリー等の貴金属類は外してください。
- ご使用中、肌に異常を感じたり、肌に合わないと感じた場合はご使用を中止し、医師に相談するか、当社へご連絡ください。


【用意するもの】

- 美容液・美容ジェルまたは化粧水
…とろみがあり、無添加で美容成分が高濃度に配合されたもの。付属の美ルル専用美容液が特におすすめです。
成分をお肌の奥まで浸透させますので、お肌の悩みに合わせた成分が多く配合されているものをお選びください。
- 乳液またはクリーム
…全てのお手入れの仕上げに使用します。

お手入れ方法の一例を紹介しています。ご自身のお悩みに合わせて、機能を組み合わせてお使いください。

- 通常通りメイクを落として洗顔し、水気をしっかり拭き取ってください。
- ヘッド部分にジェルを大量につけると、LEDライトのパネルの隙間からジェルが入り込む場合があります。少しづつ追加しながらご使用ください。
- 顔への塗付を推奨しております。

ほうれい線やフェイスラインのたるみが気になる EMS/RF温熱で強制顎筋トレ!

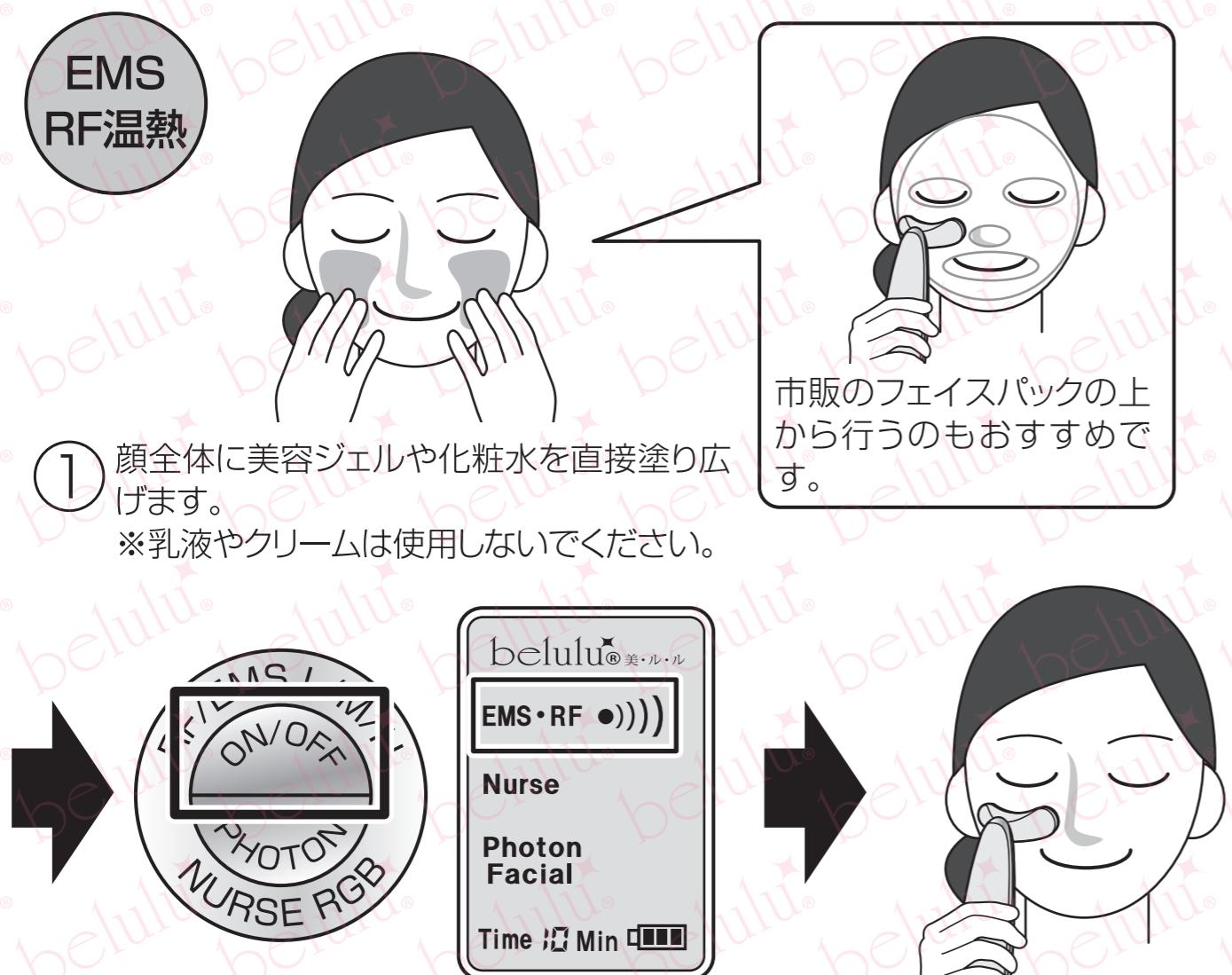

洗顔後の肌のつっぱりや、乾燥肌が気になる

エレクトロポレーション

メソセラピー

振動エステ

EMS
RF温熱

※自動的に稼働


エレクトロポレーション/メソセラピー+マッサージ(Nurse)で徹底保湿




- ① 顔全体に美容ジェルや化粧水を直接塗り広げます。
※乳液やクリームは使用しないでください。



市販のフェイスパックの上から行うのもおすすめです。

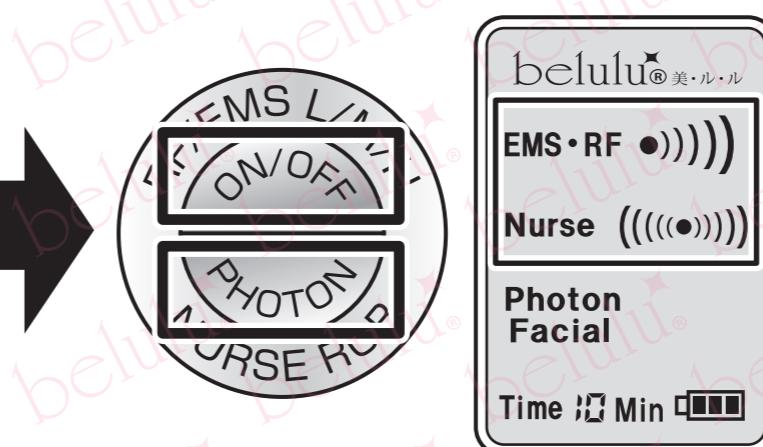

- ② ON/OFFボタンでEMS/RF温熱モードに、PHOTONボタンで振動エステに設定してください。
EMS/RF温熱の強さレベルもお選びください。

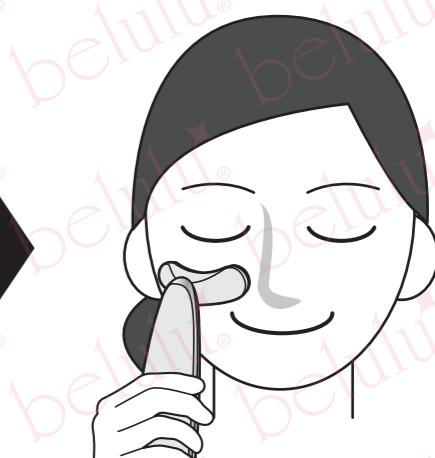

- ③ 3Dヘッドを肌に軽く当て、やさしく肌の上を滑らせます。
P.14に詳しいお手入れ手順が記載されています。



美容ジェルやとろみのある化粧水が無い場合は、100円ショップ等で売られている圧縮タイプのシートマスクに化粧水や美容液を含ませたものを顔に貼り、その上から保湿を行うのもおすすめです。

肌のくすみが気になる



EMS/RF温熱とマッサージで血行促進&緑LEDで色素沈着を改善



- ① 顔全体に美容ジェルや化粧水を直接塗り広げます。
※乳液やクリームは使用しないでください。



市販のフェイスパックの上から行うのもおすすめです。

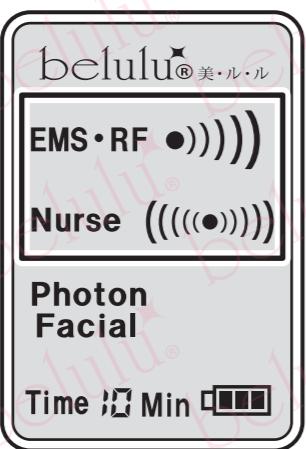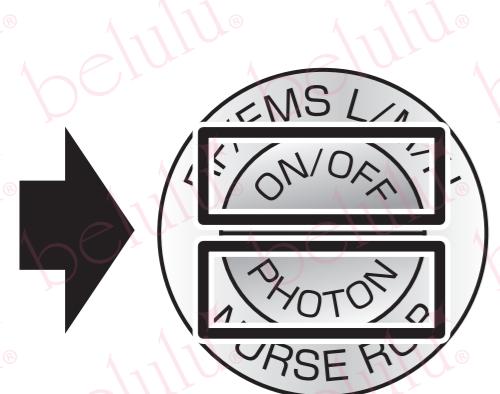


- ② ON/OFFボタンでEMS/RF温熱モードに、PHOTONボタンで振動エステに設定してください。
EMS/RF温熱の強さレベルもお選びください。



- ③ 3Dヘッドを肌に軽く当て、やさしく肌の上を滑らせます。
P.14に詳しいお手入れ手順が記載されています。

- ④ EMS/RF温熱+振動エステが終了したら、PHOTONボタンを押して緑色LEDに設定します。
ヘッド部分を肌から1cmほど離し、くすみが気になる部分にまんべんなく光を当てます。

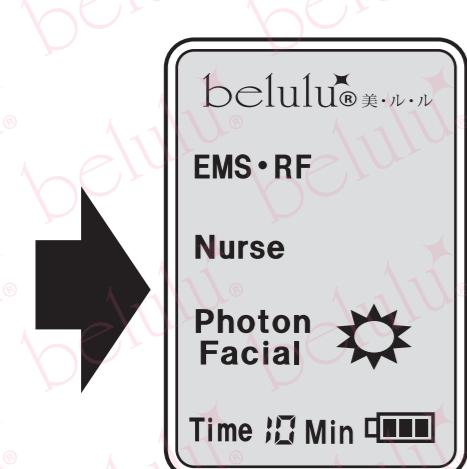


※フェイスパックをご使用の場合は外してください。


【お手入れのコツ】

顔を「口周り右」「口周り左」「右頬」「左頬」「鼻」「額」にエリア分けし、エリアごとに3Dヘッドを滑らせると、顔全体を満遍なくケアできます。
口の周りなど、特に乾燥しやすい部分は3Dヘッドをあてる時間を長くするなど、重点的にケアしましょう。
美容ジェルや化粧水、美容液は、滑りが悪くなつたと感じた時に都度追加することをおすすめします。

【お手入れ時間の目安】

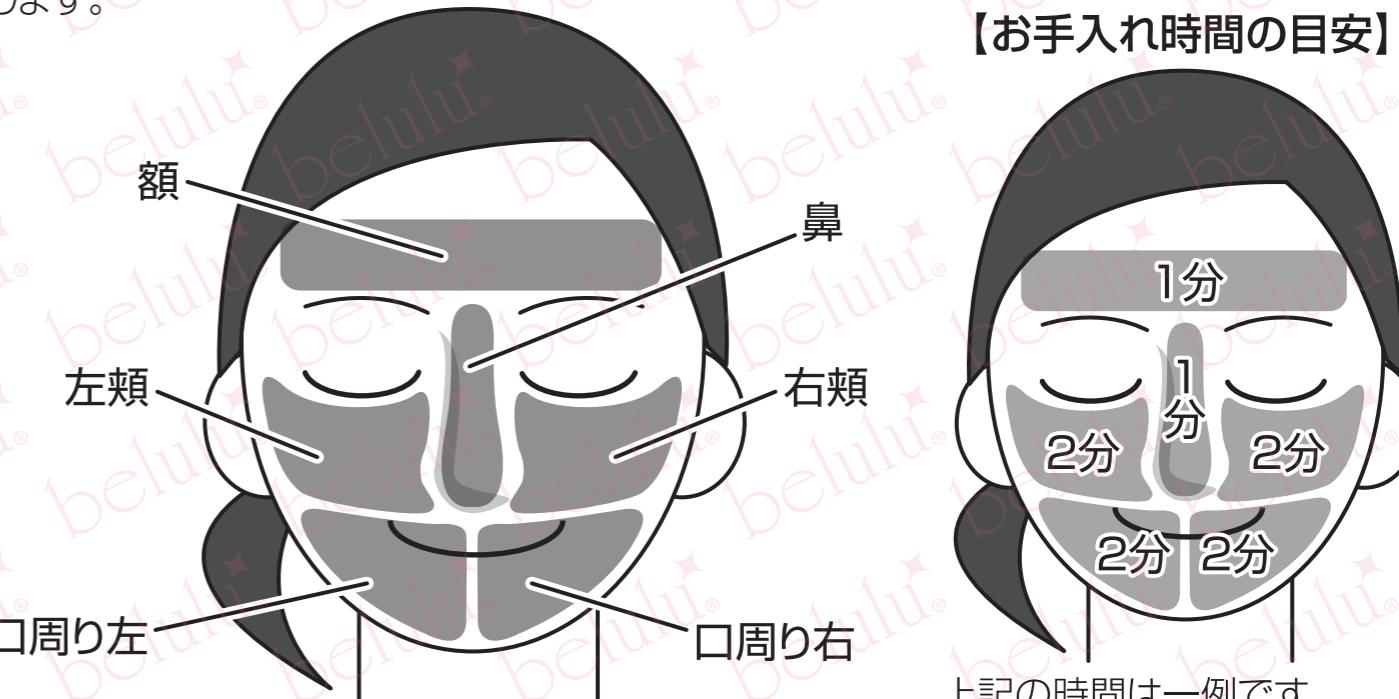


上記の時間は一例です。
ご自身のお肌の状態に応じて
自由に変えてください。

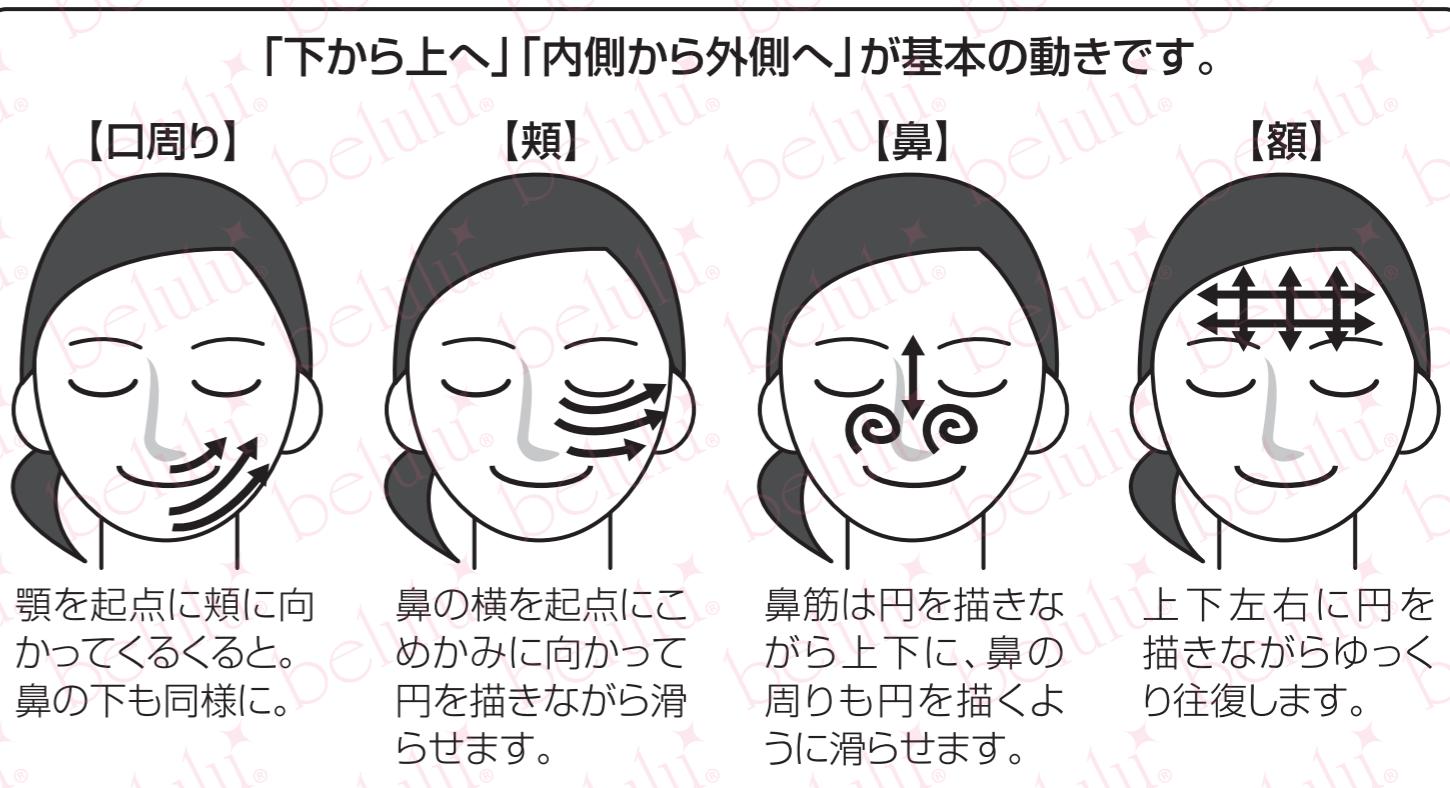


意外と年齢が出やすいデコルテを若々しくする



- ① デコルテ部分に美容液や美容ジェルをたっぷり塗ります。

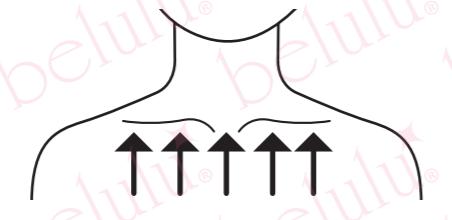


- ② バストの上から鎖骨に向かって持ち上げるように滑らせます。

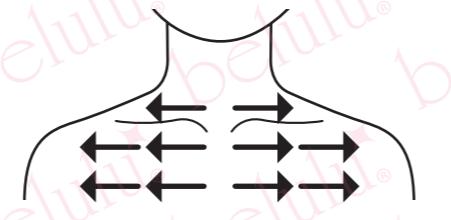

- ③ 鎁骨の周りやバストの上を内側から外側に向かって滑らせます。


ハリのあるふっくらバストに

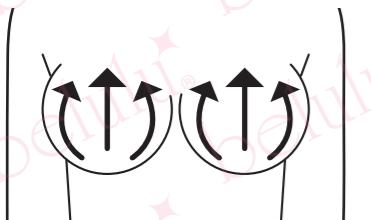

- ① バストに美容ジェルやバストアップジェルなどをたっぷり塗り、バストを下から上へ持ち上げるように滑らせます。



- ② 背中や脇の肉をかき集めるように外側からバストに向かって滑らせます。

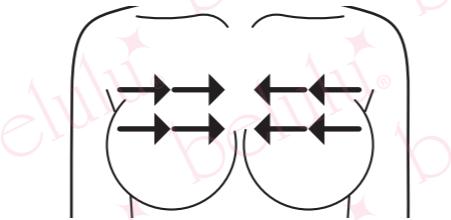


- ③ バストの上部を外側から中央に向かって滑らせます。

ツヤツヤのヒップになりたい



- ① ヒップに美容ジェルなどをたっぷり塗り、ヒップを下から上へ持ち上げるように滑らせます。

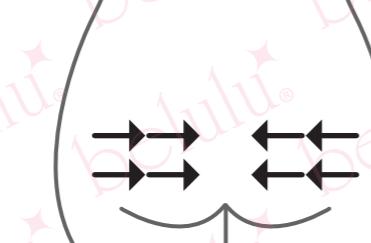

- ② 外側から内側へ寄せるように滑らせます。

8 お手入れが終わったら

- ON/OFFボタンを押して本体の電源を切ります。
- 顔に残ったジェルや化粧水、美容液をお肌にしっかりとなじませます。
- いつも通りに、お手持ちの乳液やクリームでフタをして脂分を補給しましょう。
- 3Dヘッドに残ったジェルや化粧水、美容液は、ウェットティッシュ等できれいに拭き取った後乾拭きして清潔にしてください。
※シンナー・ベンジン等の溶剤類は使用しないでください。
※防水ではありませんので、水洗いはしないでください。
- 清潔を保つため、箱等に入れゴミやホコリがつかないように保管してください。
- 直射日光や高温多湿を避け、お子様の手が届かない場所に保管してください。

9 故障かな?と思ったら -よくあるお問い合わせ-

●充電が切れていませんか?

充電池は特性上、電源を入れていない状態でも少しづつ自然放電し、充電切れになる場合があります。

充電ケーブルで1時間程度充電を行い、再度ON/OFFボタンを押してみてください。

電源が入らない

【解決しない場合は】

本体の初期不良及び故障が考えられますので、当社へご連絡ください。

充電ができない・ ケーブルの角度によっては充電が 不安定になる

●ケーブルは正しくつながっていますか?

ケーブルの差し込み場所が間違っていたり、差し込みが不十分な状態ですと通電しないため、充電が行われません。

【本体の充電】をご参照の上、差し込み場所に間違いがないか、しっかり差し込まれているかご確認ください。

EMS/RF温熱が稼働しない

●動作確認を行ってください。

EMS/RF温熱は振動が目に見えたり、音が発生するものではございません。

気になる場合は、「ご使用の前に」の【EMS/RF温熱モード】の項目を参照し、動作確認を行ってください。

【動作確認しても作動していない場合は】

本体の初期不良及び故障が考えられますので、当社へご連絡ください。

エレクトロポレーション/メソセラピーが稼働しない	<p>●動作確認を行ってください。</p> <p>エレクトロポレーション/メソセラピーは振動が目に見えたり、音が発生するものではございません。気になる場合は、「ご使用の前に」の【エレクトロポレーション・メソセラピー】の項目を参照し、動作確認を行ってください。</p> <p>【動作確認しても作動していない場合は】</p> <p>本体の初期不良及び故障が考えられますので、当社へご連絡ください。</p>
ボタンを押してしばらくすると、液晶パネルのライトが消えてしまう	<p>●故障ではありません。</p> <p>本機は節電の為、ボタン操作後一定時間経つと、液晶パネルのライトを自動的に消灯します。ライトが消灯した場合は、ボタンを押すと再度点灯します。</p>
ボタンを押してもモードが切り替わらない	<p>●故障ではありません。</p> <p>電源ONの状態で一定時間経過すると、液晶パネルのライトが消灯します。この状態でボタンを押してもライトが点灯するのみで、モードは切り替わりません。液晶パネル消灯後にモードを切り替える場合は、一度ボタンを押してライトを点灯させた後、再度ボタンを押す必要があります。</p>
液晶パネルの表示が見づらくなったり、LEDの光が弱くなってきている	<p>●充電が残りわずかです。</p> <p>電池残量が少なくなりますと、液晶パネルやLEDの光が弱くなります。ケーブルをつないで充電を行ってください。</p> <p>【充電しても症状が変わらない場合は】</p> <p>本体の初期不良及び故障が考えられますので、当社へご連絡ください。</p>
お手入れ中、「ピー」と音がして電源が切れた	<p>●故障ではありません。</p> <p>お手入れ時間の目安にしていただく為、各モード稼働後10分経過しますと自動的に電源がオフになります。</p>

使用中、漏電しているように手がピリピリする	<p>●漏電ではありません。</p> <p>本機は持ち手の金属部に微電流を流し、肌のバリアゾーンを抜けて皮膚の深部まで美容成分を浸透させるもので、人によっては微電流により刺激を感じる場合があります。微電流は人体には無害ですが、気になる場合は強さレベルを下げてお使いください。</p> <p>【強さレベルを下げるでも痛みが我慢できない場合は】</p> <p>返品・返金を承りますので、当社へご連絡ください。ただし、商品到着日から7日間までとさせていただきます。</p>
-----------------------	---

よくあるお問い合わせ
<p>Q. 使うのは美容液でなければいけませんか?</p> <p>A. 化粧水やジェルでも大丈夫ですが、化粧水の場合、水溶性で、肌に留まりやすいとろみのあるものをおすすめしております。また、美容成分を高分子のまま肌の奥まで浸透させるため、美容成分が高濃度で無添加のものを使用することで、より効果が発揮されます。美ルル専用の美容ジェルも販売しておりますので、是非ご利用ください。</p>
<p>Q. 妊娠中ですが、使っても大丈夫ですか?</p> <p>A. 妊娠中もご使用いただけますが、妊娠中はホルモンバランスが不安定でお肌もデリケートな状態になっている為、ご使用のタイミングによっては稀に肌トラブルが起こる場合がございます。必ず医師とご相談の上、お肌の様子を見ながらご使用いただくことをおすすめしております。(美顔器の機能や美容液の成分が母体や胎児に影響を及ぼすことはありませんので、ご安心ください。)</p>

Q. 3Dヘッド部分の材質は何ですか?

A.ステンレスを使用しております。
傷や腐食・サビに強く、アレルギーが起こりにくいとされています。
※すべての人にアレルギーが起こりにくいわけではありません。ご心配な場合は、腕の内側等でパッチテストを行ってください。

Q. 肌に合わなかった場合はどうすればいいですか?

A.商品到着日から7日間以内であれば返品・返金を承りますので、当店へご連絡ください。
※ただし、送料はお客様ご負担とさせていただいております。

Q. 毎日時間をかけてお手入れした方が良いのでは?

A.本品に搭載されている機能は高い美容効果を発揮しますが、その分頻繁に使いすぎるとお肌に負担をかけてしまいます。
お肌に負担をかけずにお手入れをしていただくために、本書に記載されている使用頻度をお守りください。
毎日の頻繁な使用で一気に効果を得るものではなく、日々じっくりと続けていただくことが大切です。

Q. 使っても効果がまったく感じられないのですが…

A.効果の現れ方には個人差があります。
また、本品はあくまでご家庭でお使いいただくことを前提に作られており、エステのようなパワーや即効性はございません。
毎日コツコツ続けていただくことで、効果を実感していくものになります。

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 **氏名** **購入商品** **購入からの期間** **故障状況**

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

E-mail:support@kireido.com

固定電話:0120-09-5121 携帯・スマートフォン:050-4560-1423

※ご使用回数に関わらずご購入から3ヶ月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。

※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先

〒221-0801

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

※本体以外の付属品は消耗品の為、
保証対象外となります。

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、修理を依頼してください。

〈修理規約〉

- 取扱説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
- 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

■品番: ■品名:belulu rebirth

■修理保証期間:販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)

■お客様名: _____

■ご住所: _____

■受注番号: _____

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル

販売日付: 年 月 日 印

●通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。

ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。

●この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。