

belulu Vivid

美ルル ビビッド

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いておりますので大切に保管してください。



ご使用前に必ずお読みください。

- 警告**
- 使用電池は、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
 - 本品の破損、故障、変形など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
 - 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
 - ストーブ等高温になる場所で本品を使用したり放置したりしないでください。
 - 本品は防水仕様ではありません。水洗いしたり、浴室など湿気の高い場所での放置使用は絶対にしないでください。
 - 肌に異常が見られた場合は、本品を中止して医師に相談してください。
 - 下記の記事をよくご確認いただき、該当する方は本品を使用しないでください。
 - 本品の分解、改造などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。
- 注意**
- 皮膚の弱い部分への過度のご使用はお避けください。
 - 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
 - 長時間使用しない場合は、電池を外してください。
 - 汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。ベンジン、シンナー等の溶剤類で拭かないでください。
 - 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

〈下記に当てはまる方は、ご使用をお避けください。〉

- 急性疾患 ●有熱性疾患 ●血圧異常 ●伝染病疾患 ●心臓疾患 ●医用電子器具を使用されている方(ペースメーカーなどの体内植込式医用電子機器、人工心肺などの生命維持用電子機、心電図などの装着型医用電子機器) ●皮膚ガン病歴がある方 ●糖尿病および他の疾患による皮膚異常疾患患者の方 ●妊娠中の方 ●授乳中の方 ●皮膚のトラブル(アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、ニキビが化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌が敏感な方) ●化粧品による皮膚炎を起こしている方 ●特に健康がすぐれない方 ●ステロイド系ホルモン剤等を長期服用されている方

〈下記の部位には使用しないでください〉

- 悪性腫瘍 ●切り傷 ●整形などでシリコンが使用されている部分 ●頭髮、粘膜などのデリケートゾーン


美ルル Vivid 機能紹介

肌質改善・リフトアップの2つの機能でハリ・ツヤに満ちた肌に

肌質改善

肌に適度な刺激を与えることで、肌の再生を促します。
活力のある強い肌に導きます。


お疲れ肌 くすみ 化粧ノリの改善

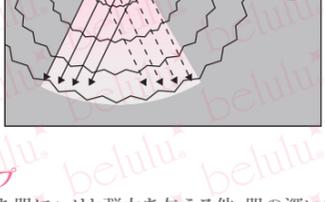

リフトアップ


たるんできた肌にハリと弾力を与える他、肌の深い部分まで美容・栄養成分を届けます。

たるみ フェイスラインの崩れ 年齢肌

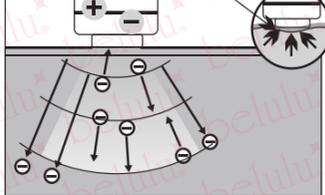


製品仕様


※製品仕様は、予告なく変更される場合がございます。

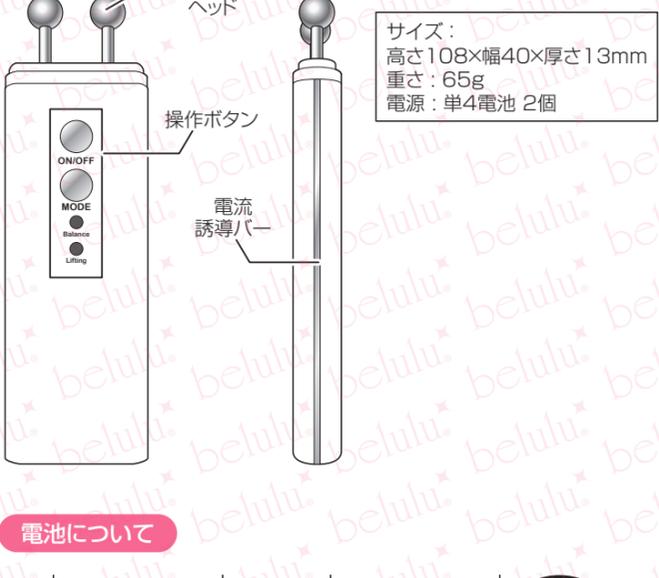

電池について

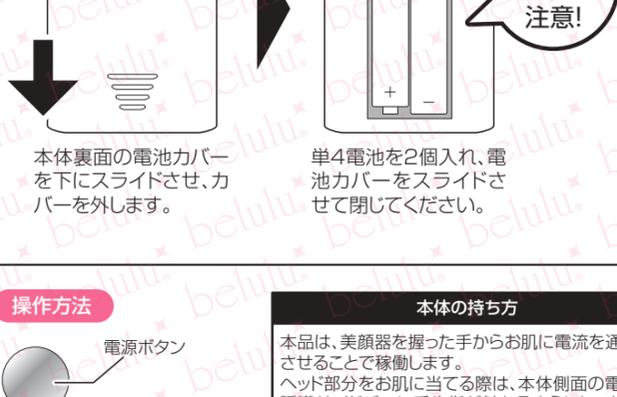

操作方法

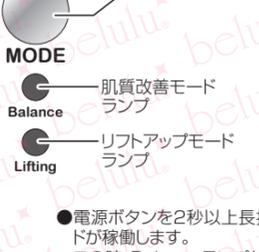

本体の持ち方

本品は、美顔器を握った手からお肌に電流を通電させることで稼働します。
ヘッド部分をお肌に当てる際は、本体側面の電流誘導サイドバーに手や指が触れるようにしっかり握ってください。
電流誘導サイドバーに手や指が触れていないと、通電せず稼働しません。

- 電源ボタンを2秒以上長押しすると、電源がONになり、肌質改善モードが稼働します。この時、Balanceランプが点灯します。
- モード切替ボタンを押すとリフトアップモードに切り替わり、Liftingランプが点灯します。
- モード切替ボタンを押すごとに、肌質改善モードとリフトアップモードが交互に切り替わります。
- 電源ボタンを2秒以上長押しすると、電源がOFFになります。



お手入れ方法

推奨使用頻度：週3回まで、一日1回まで、各モード両顔5分まで

- 防水ではありませんので、浴室内や水気の高い場所では使用しないでください。
- LEDライトを直接見たり長時間直射しないでください。
- ケアを行う際は、必ず美容液またはジェル、シートマスクをご使用ください。乾いた肌に直接使用しますと、3Dヘッドが滑りにくくなったり、肌トラブルの原因になります。
- ヘッドは肌に対して真っ直ぐ当ててください。また、肌に強く押し付けたりこすったりせず、やさしく滑らせるように動かしてください。
- ご使用時は、腕時計やジュエリー等の貴金属類は外してください。
- ご使用中、刺激を感じた場合はマッサージヘッドを離し、ジェル等を追加してください。
- ご使用中、肌に異常を感じたり、肌に合わないと感じた場合はご使用を中止し、医師に相談するか、当社へご連絡ください。

【肌質改善】 栄養・美容成分が豊富で、お肌に留まりやすいとろみのある美容ジェルまたはシートマスクをお使いください。



【リフトアップ】 美容成分が豊富で、お肌に留まりやすいとろみのある美容ジェルまたはシートマスクをお使いください。



お手入れ終了後

- 顔に残ったジェルや美容液をなじませ、乳液やクリームでお肌を整えてください。
- 電源ボタンを2秒以上長押しして電源を切り、ヘッド部分の汚れを硬く絞った濡れ布巾できれいに拭き取ってください。
- ※水洗いはしないでください。
- ※ベンジン・シンナーなどの溶剤類は使用しないでください。
- ゴミ・ホコリ・高温多湿・直射日光を避け、お子様の手が届かない場所に保管してください。

Q&A

- Q.お肌にビリビリ・チクチクとした刺激を感じますが漏電や感電していませんか？
A.本品はお肌に微弱な電流を流すことでお肌を活性化させるもので、漏電や感電ではありません。刺激の感じ方には個人差がありますが、気になる場合はジェルを多めに塗ると多少軽減されます。
- Q.肌質改善モードとリフトアップモードを両方行なう方がいいのでしょうか？
A.両方行うとより効果的ですが、お肌の状態に合わせてお好きなモードのみお使いいただいても構いません。
- Q.敏感肌でも使用できますか？
A.ご使用いただけますが、1回のお手入れ時間を短くし、お肌の様子を見ながらお使いください。美容ジェルを多めに塗るとヘッド部分とお肌の摩擦が軽減され、負担が軽くなります。

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号	氏名	購入商品	購入からの期間	故障状況
-------------	----	------	---------	------

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

E-mail:support@kireido.com

固定電話:0120-09-5121 携帯・スマートフォン:045-227-5121

- ※ご使用回数に関わらずご購入から3か月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただけます。
- ※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。
- ※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先 〒231-0027 神奈川県横浜市市中区扇町2-5-15 リラックスビル6F 株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】 ※乾電池は消耗品の為、保証対象外となります。

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

〈修理規約〉

- 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
- 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償となります。
 - a.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 b.お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - c.火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。 d.本書の提示がない場合。
 - e.本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

●品番: ●品名:belulu Vivid

●修理保証期間:販売日から6ヵ月間(ご使用回数に関わらず)

●お客様名:

●ご住所:

●受注番号:

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル
販売日付: 年 月 日 印

●通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くて問題ございません。
ただし、お問い合わせや修理依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。
●この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。)

のみに従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。