


美ルル ヒカリプラス
belulu® hikari plus
★フォトフェイシャルLEDミラー★

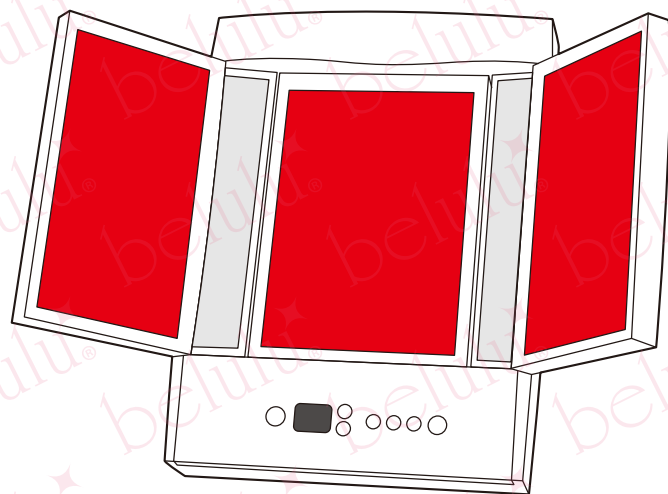

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。

警告

- 使用電圧、電源アダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
- 本品をご使用中は遮光グラスを着用し、LEDライトを直接見たり、目に照射しないでください。LEDライトを長時間直視しますと、目を傷めるおそれがあります。
- 本製品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
- 電源アダプターのコードを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
- ストーブ等高温になる場所で本品や電源アダプターを使用したり放置したりしないでください。
- 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
- 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
- 万一、皮膚に異常が見られた場合は、本製品のご使用を中止して医師に相談してください。
- 中面のリストをよくご確認いただき、該当する方は本製品を使用しないでください。
- 本品の分解、改造、お客様ご自身による修理などは絶対にしないでください。本製品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本体や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。

注意

- 本製品のご使用時や保管時は、水平で安定した場所に置いてください。
- 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。特にミラーやLED照射パネルは割れやすいため、十分ご注意ください。
- 本体の水洗いはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾やウエットティッシュ等でやさしく拭いてください。また、ベンジン、シンナー等の溶剤類で拭かないでください。
- 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造、お客様ご自身による修理等をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任は負いかねます。

保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号 氏名 購入商品 購入からの期間 故障状況

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

E-mail:support@kireido.com

固定電話:0120-09-5121 携帯・スマートフォン:050-4560-1423

※ご使用回数に関わらずご購入から3ヵ月以上経過した場合は、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。

※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先

〒221-0801

神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25 謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

【保証書】

※本体以外の付属品は消耗品の為、保証対象外となります。

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

〈修理規約〉

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
 - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - d. 本書の提示がない場合。
 - e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

■品番:KRD1052

■品名:belulu hikari plus

■修理保証期間:販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)

■お客様名:

■ご住所:

■受注番号:

販売店:株式会社ビューティフルエンジェル


販売日付: 年 月 日 印

- 通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。

ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。


- この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。

本体仕様 ※セット内容や仕様は予告なく変更になる場合がございます。

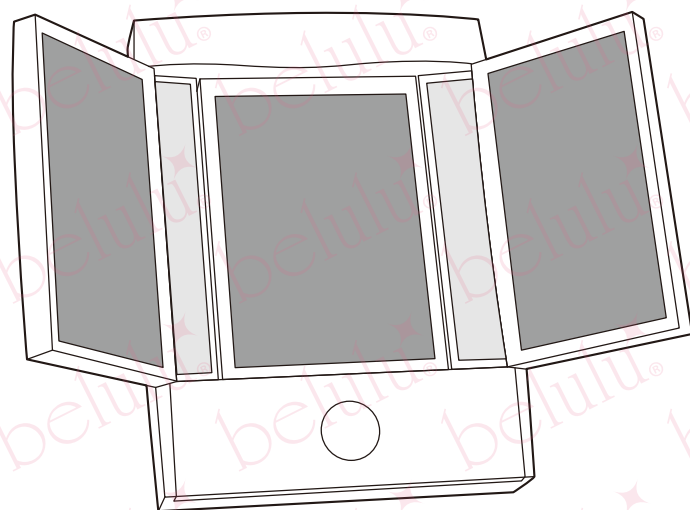


美ルル ヒカリ プラス 本体


【本体サイズ】高さ305×幅230×厚さ60mm
 【重量】約1,300g
 【入力電圧】AC:100V～240V、50/60Hz
 【出力電圧】DC:12V、3A、36W

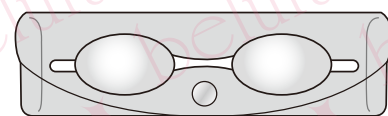

遮光グラス

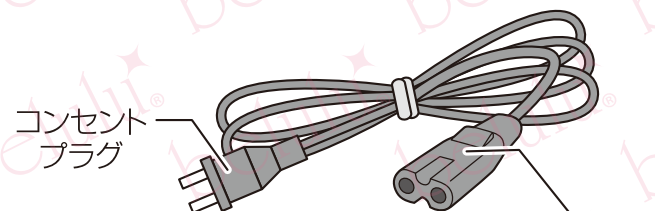

接続ケーブル アダプタープラグ

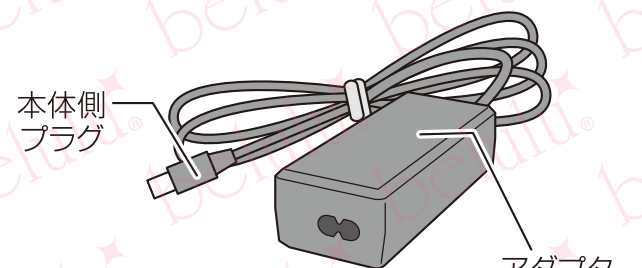


電源アダプター アダプター


ご使用の準備

【本体をセットする】

- 本体背面のスタンドとスタンドストッパーを起こします。
- スタンドストッパーの溝にスタンドを入れて角度を固定します。
- スタンドを入れる溝の位置によって、本体の角度を7段階調節することができます。

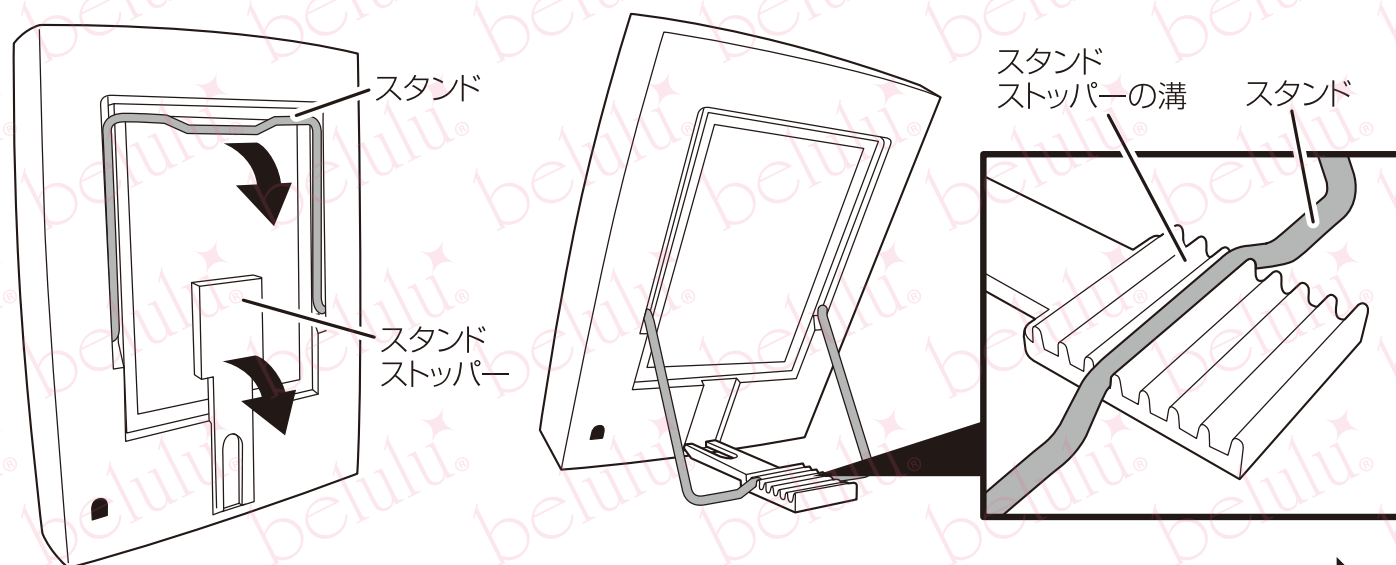

7段階調節

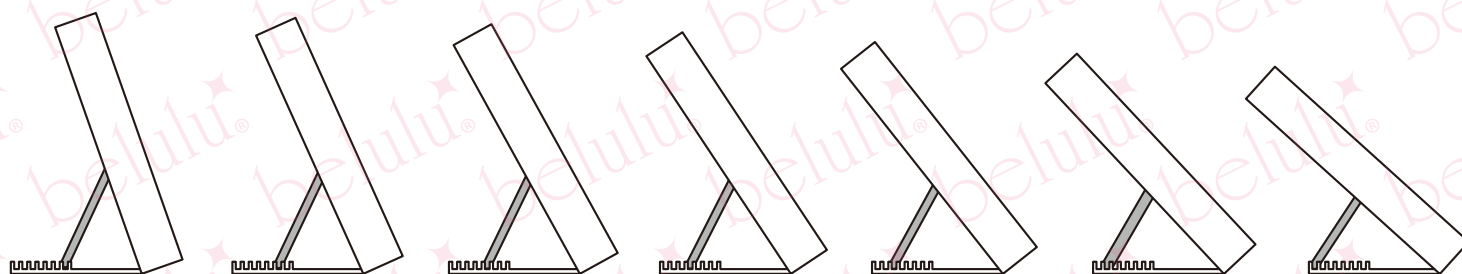

美ルル ヒカリ プラス 機能紹介

高光度LEDによる光エステでパーフェクト美肌！

色によって肌に様々な効果をもたらす高光度LEDを搭載。
 また、三面鏡になっているので、顔の側面など隅々までまんべんなくケアできます。

光が強いのでお手入れ時間も短縮！

高光度LED一つ一つが強力に発光し、光が素早く肌細胞に作用し効果を発揮するので、朝の忙しい時間でも夜遅く帰ってきて疲れている時でも、あっという間に美肌ケアができちゃいます。

3パターンのメイクアップライトと5倍拡大ミラー付き

メイクに便利な明るいメイクアップライトと5倍拡大ミラーを搭載。
 メイクアップライトはお部屋の明かりの色に合わせて3パターンから選べます。

照射面の角度を7段階調節できます

赤LED

コラーゲンを増やしてシワやたるみなどの年齢肌を改善します。紫外線によるダメージを修復する働きもあり、エイジングケア効果が期待できます。

青LED

ニキビの原因といわれている活性酸素を排除する働きがあります。できてしまったニキビを沈静化し、さらにニキビができてにくい肌に整えます。

黄色LED

新陳代謝を促進し、お肌のターンオーバーを正常に戻します。シミやニキビ跡、傷跡などの色素沈着を改善します。

基本の3色を自由に組み合わせ!(全7通り)

赤LED + 青LED

赤LED + 黄色LED

黄色LED + 青LED

赤LED + 青LED + 黄色LED

複数のケアが一度にできるので、忙しくてじっくりお手入れする時間がない方におすすめです。

美ルル ヒカリ プラスは体にもご使用いただけます！

デコルテのザラつきや背中ニキビなど、体の悩みにも、効果を発揮します。
 上記のLED各色の効能を参照し、悩みに合わせた色のLEDでケアを行なってください。

例えば...



- 背中ニキビのケアに青LED
 - 首元の年齢サインに赤LED+黄色LED
- など。※一例です。

使用方法


【通電させる】

- 本体背面左下のケーブル差込口に、電源アダプターの本体側プラグを差し込みます。
- アダプターと、接続ケーブルのアダプタープラグをつなぎます。
- 接続ケーブルのコンセントプラグを、家庭用コンセントに差し込みます。

※通電だけしている状態で、電源は入っておりません。

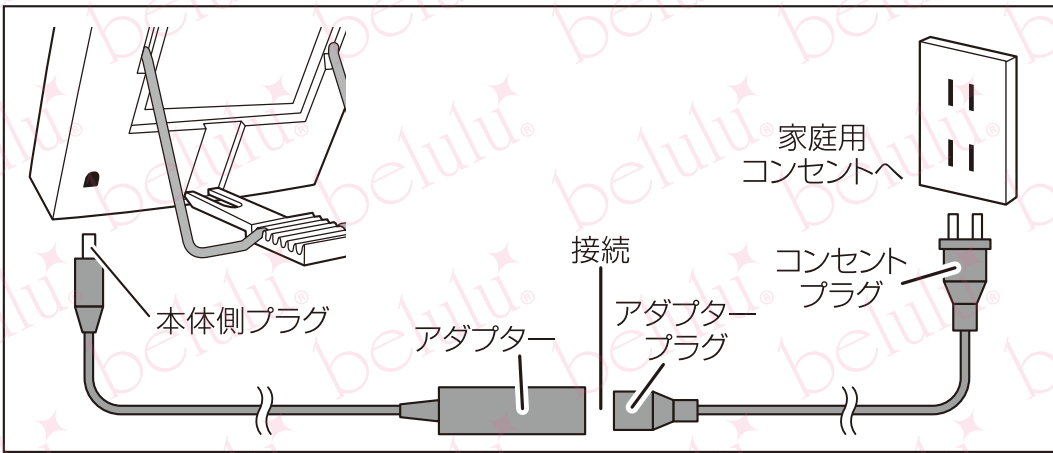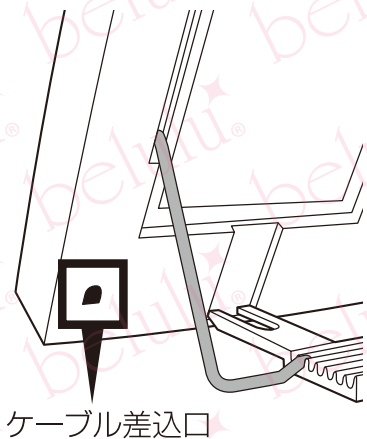


【操作ボタン】

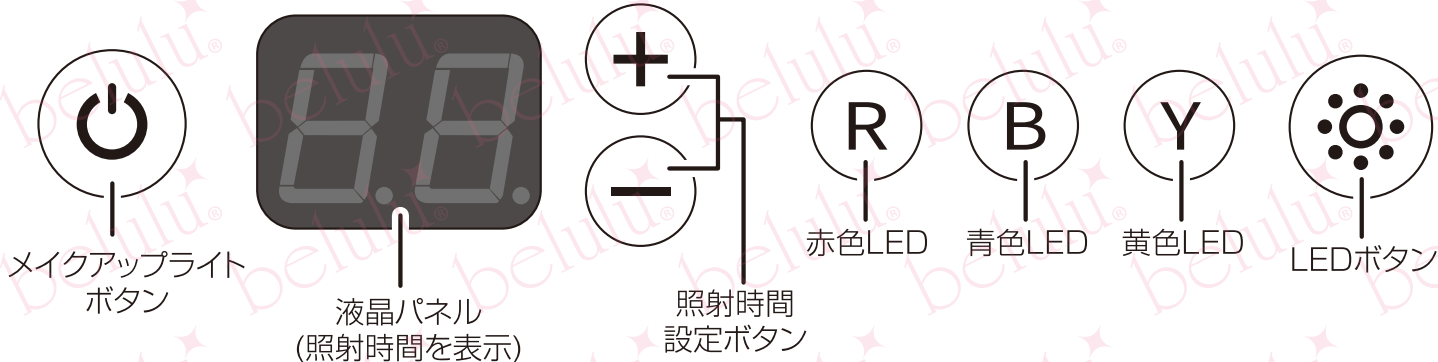

【メイクアップライトのパターンを設定する】

- 「通電させる」を参照し、ケーブル類を正しくセットしてください。
- メイクアップライトボタンを1回押すと、「ナチュラルホワイト」が点灯します。
- ボタンを押すごとに、「クールホワイト」→「ウォームホワイト」→「ライトOFF」の順に切り替わります。

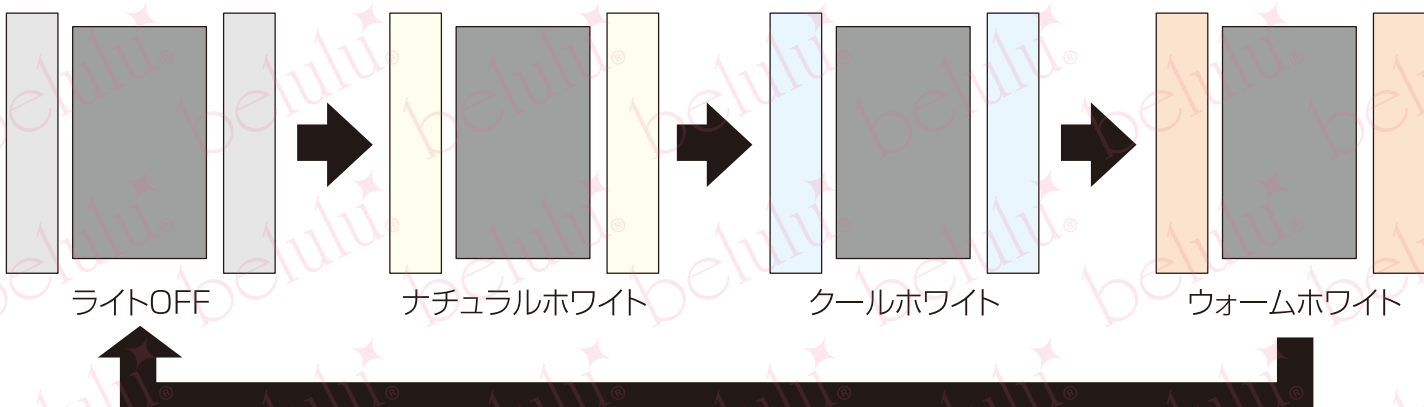


【使い分け方の一例】

- 【ウォームホワイト】
青みの強い白色蛍光灯を使っている部屋で使用する場合など
- 【ナチュラルホワイト】
昼間などに自然光に近い色味でメイクをしたい場合など
- 【クールホワイト】
電球など赤みのある電灯を使っている部屋で使用する場合など

【LED照射を行う】 ●「通電させる」を参照し、ケーブル類を正しくセットしてください。

照射時のご注意

- 水平で安定した場所に本体を置いてください。
- 照射パネルをお好みの角度に調節してください。
- 顔の位置は、本体のセンターパネルに合わせてください。
- LED照射パネルから顔までの距離は、20cm～40cm程度空けてください。

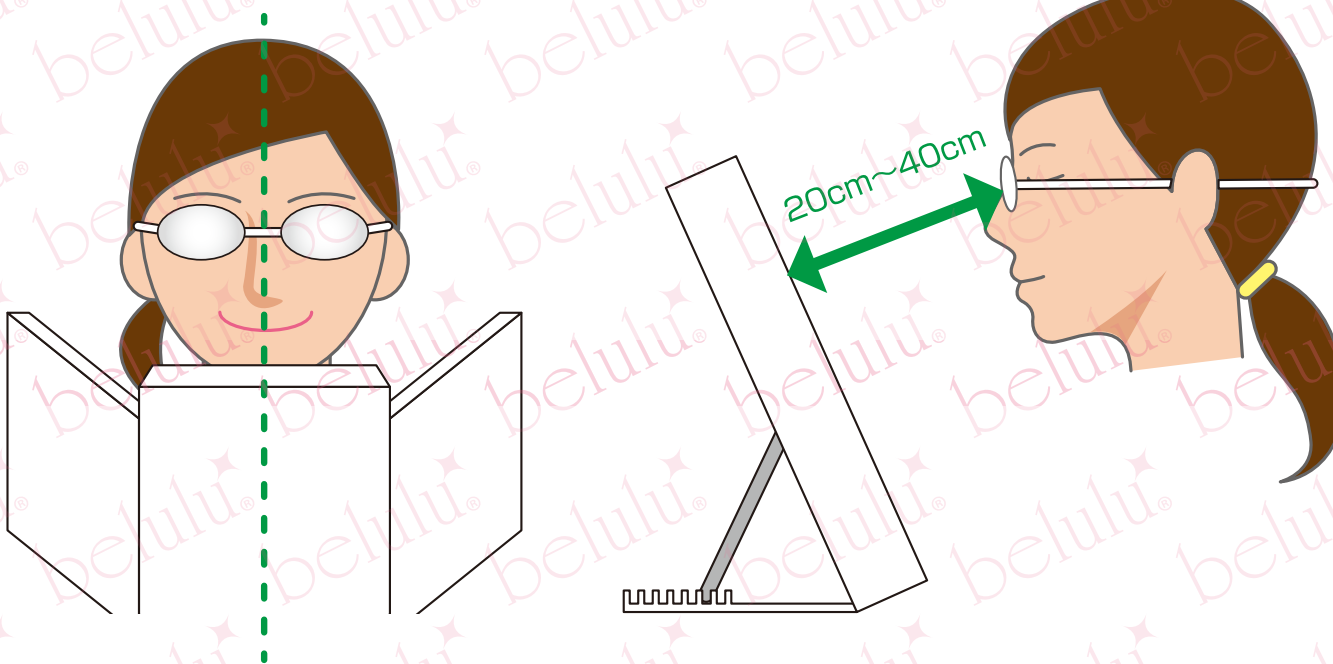

1 LEDの色を設定します

照射したい色のボタンを1回押します。

【赤色LEDを照射する場合】



「R」ボタンを1回押します。

【青色・黄色LEDを同時照射する場合】



「B」ボタン、「Y」ボタンを1回ずつ押します。
押す順番は自由です。

【3色すべてを同時照射する場合】



「R」ボタン、「B」ボタン、「Y」ボタンを1回ずつ押します。
押す順番は自由です。

2 照射時間を設定します

1～60分の範囲内で1分単位の設定が可能です。




液晶パネルに照射時間が表示されます。
初期設定は20分です。



照射時間を長くする場合は、「+」ボタンを押してお好みの時間に設定します。
ボタンを1回押すごとに1分ずつ時間が追加されます。



照射時間を短くする場合は、「-」ボタンを押してお好みの時間に設定します。
ボタンを1回押すごとに1分ずつ時間が減ります。

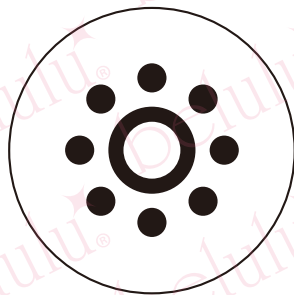

すべての設定が完了したら、LEDボタンを押してください。
LEDが照射されます

- LED照射開始後にLEDボタンを押すと、LEDが消灯します。
LED照射開始後に色・時間変更や途中で終了したい場合は、LEDボタンを押してください。
- 液晶パネルの時間表示は、1分単位でカウントダウンされます。
- 1分ごとにお知らせアラームが鳴ります。
- 照射時間が終了するとアラームが鳴り、LEDが自動的に消灯します。

本品はLEDの発光が非常に強いいため、光源を長時間直視しないよう十分ご注意ください。
※多少視界に入る程度であれば問題ございません。
顔への照射中は付属の遮光グラスを装着してください。

ご使用後

- ライト等はすべて消灯し、ケーブル類をすべて外してください。
- 汚れが気になる場合は、硬く絞った濡れ布巾や消毒用アルコールを浸み込ませたやわらかい布等でやさしく拭いてください。
※防水仕様ではありませんので、水洗いはしないでください。
※ベンジン・シンナー等の溶剤は使用しないでください。
- LED照射パネル保護のため、左右の扉を閉めて保管してください。