

belulu® Smart

美・ル・ル スマート

取扱説明書



この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が添付してありますので大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。

- 警告**
- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
 - 本品をご使用中は、LEDライトを直接見たり、目に照射しないでください。LEDライトを直射すると、目を傷めるおそれがあります。
 - 本品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
 - 火、煙や臭気、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
 - 電源アダプターのコードを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
 - ストーブや暖房器具など、高温になる場所で本品や電源アダプターを放置しないでください。
 - 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用は避けてください。
 - 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
 - 万一、皮膚に異常が見られた場合は、本品を中止して医師に相談してください。
 - 下記のリストをよくご確認ください。該当する方は本品を使用しないでください。
 - 本品の分解、改造などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のラブリに限りましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。
- 注意**
- 皮膚の弱い部分への過度のご使用はお避けください。
 - 使用中、痛み等があった場合は、すぐに3Dヘッドを肌から離してください。
 - 痒さや腫れ、かゆみなど強い症状を訴えたい場合は、
 - 約4〜8時間充電が完了します。完了後はそれ以上充電しないでください。
 - 充電中以外には充電ケーブルを本体から外してください。
 - 本品の水はしみません。汚れた場合は、柔らかい濡れ布巾でやさしく拭いてください。ペンシル、シンナー等の溶剤類で拭かないでください。
 - 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ってご使用・分解・改造をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

《下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください》

- 急性疾患 ●有熱性疾患 ●血圧異常 ●伝染病疾患 ●心臓疾患 ●医用電子器具を使用されている方（ペースメーカーなどの体内埋込式医用電子機器、人工心臓などの生命維持用電子機器、心臓図などの装置型医用電子機器） ●皮膚がん病歴がある方 ●糖尿病および他の疾患による皮膚異常疾患の方 ●妊娠中の方 ●授乳中の方 ●皮膚のトラブル（アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、ニキビが化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌敏感の方） ●化粧品による皮膚炎を起こしている方 ●特に健康がすぐれない方 ●ステロイド系ホルモン剤等を長期間服用されている方

《下記の部位には使用しないでください》

- 悪性腫瘍 ●切り傷 ●骨の関節の上 ●整形などでシリコンが使用されている部分 ●声帯部分 ●頭髪、目や目の周り、粘膜などのデリケートゾーン

■ご購入後初めて使用する場合は、本体を約1時間充電することをおすすめします。■

-1-

美・ル・ル スマート 機能紹介

光エステ(Photon)

3色のLEDがお肌を活性化させ、美肌に導きます。
各LEDの機能は、下記の「LEDライトのカラーと効果」をご参照ください。

超音波(Sonic)

超音波の高速振動により、お肌の余分な角質や内部に入り込んだ汚れをはじき出され、お肌が柔らかくなります。
また、新陳代謝が活発になり、老廃物の排出やむくみ改善が期待できます。

イオン導出(プラスイオンモード)

超音波振動がプラスイオンの吸引能力を利用し、毛穴の奥の汚れや老化角質をしっかりと排除。通常のメイク格としてより洗浄力が高く、手の届かない毛穴つまりや黒ずみをゴッソリかき出すので、生まれたてのきれいな肌。

超音波(SONIC)と同時に使うことで、より効果が高まります。

イオン導入(マイナスイオンモード)

マッサージと同時に行うことによりマイナスイオンの渗透力を高め、美容成分が肌の細かいところまで浸透し、深いレベルまでの美容効果を発揮します。
イオン導入できれいな肌になった毛穴に、イオン導入で美容成分をしっかりと吸収させます。
超音波(SONIC)と同時に使うことで、さらに効果が高まります。

LEDライトのカラーと効果

LEDライトは色ごとに波長が異なる肌の奥に届く深さも違いますが、色によって肌に様々な効果をもたらします。
お肌の悩みに合わせてカラーを選べます。

赤LED:

630nm波長。コラーゲンを増やしてシミ・シワ・たるみなどの年齢肌を改善します。紫外線によるダメージを修復する働きもあり、アンチエイジング効果が期待できます。

青LED:

415nm波長。ニキビの原因といわれている活性酸素を排除する働きがあります。できてしまったニキビを沈静化し、さらにニキビができていない肌を整えます。

緑LED:

525nm波長。新陳代謝を促進し、お肌のターンオーバーを正常にします。シワやニキビ痕、傷跡などの色素沈着を改善します。

■選べる組み合わせ■


- 超音波(SONIC) + 光エステ(PHOTON) 超音波(SONIC) + 光エステ(PHOTON) + イオンモード
超音波(SONIC) + イオンモード 光エステ(PHOTON) + イオンモード

モードボタンを押すだけで、お好きな機能を組み合わせご使用いただけます。
例えば、「超音波(SONIC)」+「光エステ(PHOTON)」場合、超音波モードを起動してレベル設定した後、光エステ(PHOTON)ボタンを押すだけで機能設定の順番は逆でもOKです。

-2-

セット内容と製品仕様

※製品仕様や外観は予告なく変更になる場合があります。

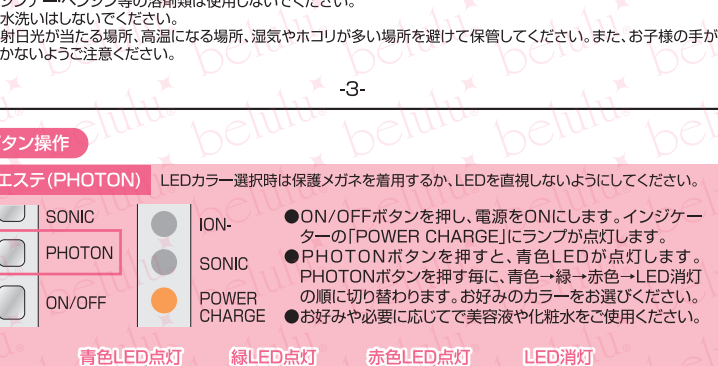

【本体仕様】
充電時間: 4〜8時間 入力: 5V/0.5A
使用電池: リチウムイオンバッテリー
高さ: 180mm 幅: 40mm 厚さ: 44mm 重さ: 146g
【USB式アダプター仕様】
入力: 100〜240V 50/60Hz 0.2A 出力: 5V・1A

充電について

- 充電後初めて使用する場合は、充電時間や使用頻度によって異なります。
- 充電が完了すると「POWER CHARGE」ランプが点灯します。
- 充電中は本体が多少熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電中に外は、ケーブルを本体から抜いてください。
- 充電に最適な室温は、15〜30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因となりますので、適温で充電を行ってください。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。
- 内部電池保護のため、長期間ご使用されない場合でも月に1回充電を行ってください。
- 正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。
- 安全にお使いいただくため、必ず「パチテスト」を行ってください。
- 美容液を顔の内側と皮膚の薄い部分に塗り、かき混ぜてお肌に馴染ませてください。
- 異常がなければ、顔のケアを行ってください。万一、皮膚に異常が見られた場合は本製品を使用せず、当社または医師にご相談ください。

ご使用後について

- ON/OFFボタンを2秒以上長押しして、本体の電源を切ります。
- 美容液が肌に残っている場合は、手でやさしく拭きます。
- 乳液やクリーム等でフタをして、脂分を補いましょう。
- 本体の3Dヘッドに付いた美容ジェルをきれいに拭き取り、消毒用アルコールを付けたやわらかい布やウェットティッシュなどで拭いて清潔にしてください。
- ※シンナーやベンジン等の溶剤類は使用しないでください。
- 水洗いはしないでください。
- 直射日光が当たる場所、高温になる場所、湿気やホコリが多い場所を避けて保管してください。また、お子様の手が届かないようご注意ください。


-3-

ボタン操作


光エステ(PHOTON) LEDカラー選択時は保護メガネを着用し、LEDを直接見ないようにしてください。



超音波(SONIC)

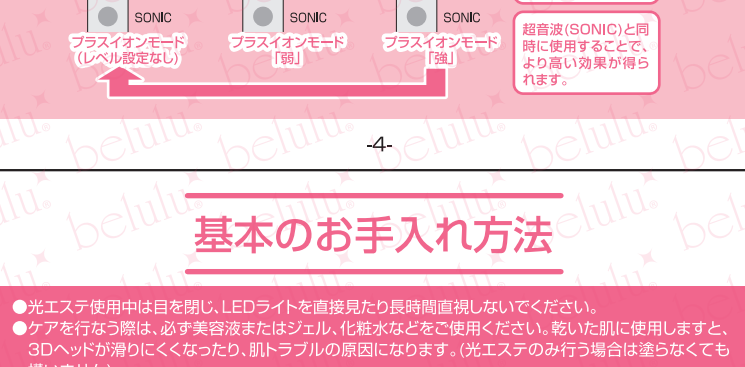

イオンモード(イオン導入・イオン導出)

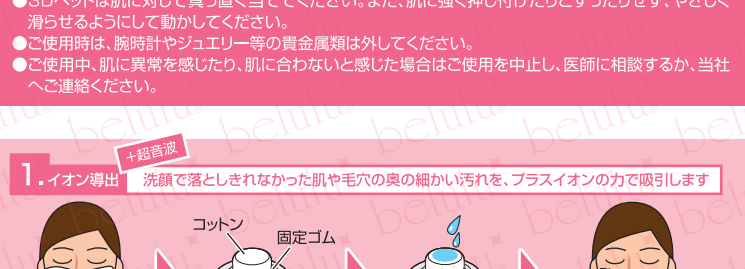














- ON/OFFボタンを押す、電源をONにします。インジケータの「POWER CHARGE」にランプが点灯します。
- ION+/ION-ボタンを押す、イオンモードになり、インジケータの「ION+」にランプが点灯します。
- ION+/ION-ボタンを押す毎に、プラスイオンモード・マイナスイオンモードの順に切り替わります。
- マイナスイオンモード中は、インジケータの「ION-」にランプが点灯します。
- イオンモードを設定した状態でLEVELボタンを押すことで、イオンモードの「強」「弱」を選べます。



-4-

基本のお手入れ方法

- 光エステ使用中は目を閉じ、LEDライトを直接見たり長時間直射しないでください。
- ケアを行なう際は、必ず美容液またはジェル、化粧水などをご使用ください。乾いた肌を使用すると、3Dヘッドが滑りにくくなり、肌トラブルの原因となります。(光エステのみ行う場合は塗らなくても構いません)
- 本体内部の微弱電流誘導サドルに手が触れるように握ってください。
- 3Dヘッドは肌に対して真っ直ぐ当ててください。また、肌を強く押し付けたりこすりすぎず、やさしく滑らせるようにして動かしてください。
- ご使用時は、腕時計やジュエリー等の貴金属類は外してください。
- ご使用中、肌に異常を感じたり、肌に合わないと感じた場合はご使用を中止し、医師に相談するか、当社へご連絡ください。

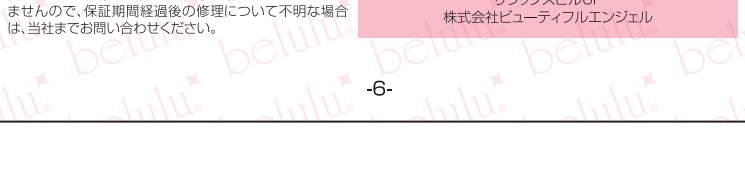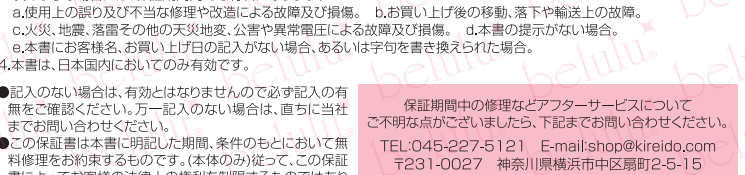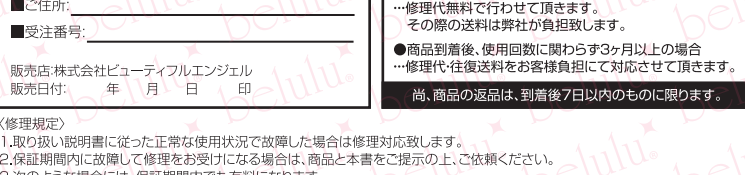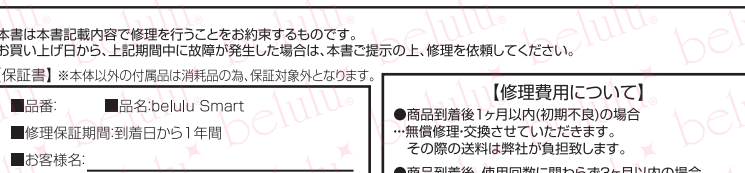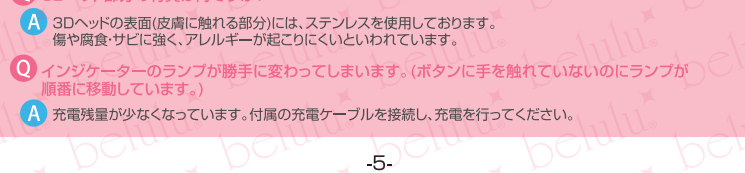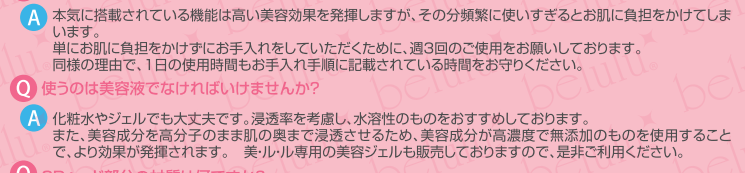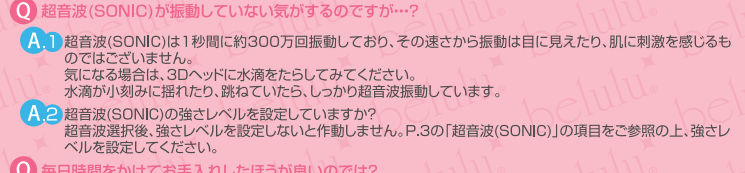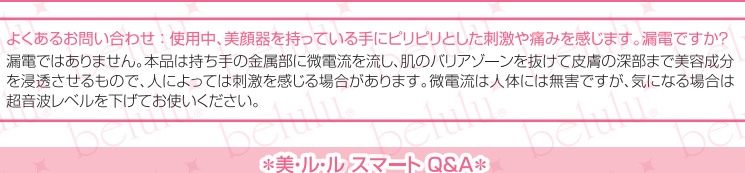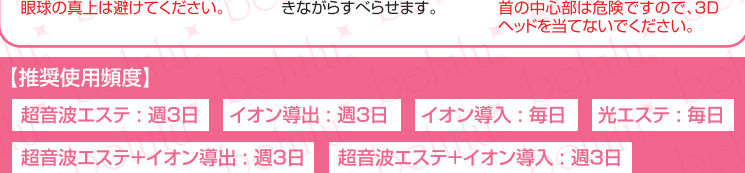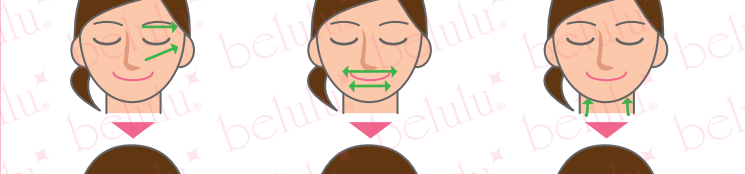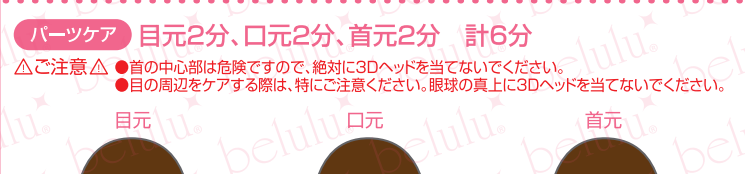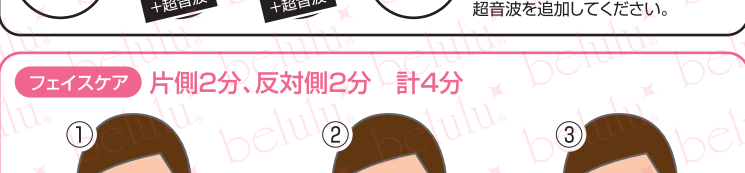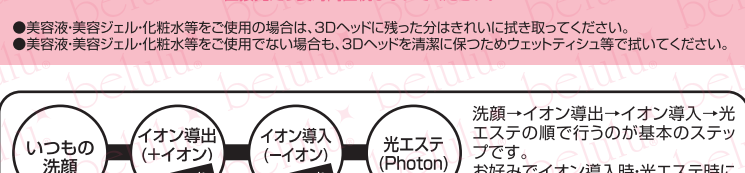

-5-

