



# belulu® brilliant hair

## 美・ル・ル プリリアントヘア 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みください。  
なお、本書の末尾に保証書が付けていますので大切に保管してください。

### ご使用前に必ずお読みください。

- 警告**
- 使用電圧 ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
  - 本品をご使用中は、レーザーやLEDライトを直接見たり、目に照射しないでください。特にレーザーは目を傷めやすいため十分ご注意ください。
  - 本品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
  - 万一、煙や臭気、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
  - 電源アダプターのコードを引っ張ったり、濡れた手でケーブル部分を触らないでください。
  - ストーブ等高温になる場所や本品や電源アダプターを使用した上から放置したりしないでください。
  - 濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
  - 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
  - 万一、皮膚に異常が見られた場合は、ご使用を中止して医師に相談してください。
  - 下記のリストをよくご確認いただき、該当する方は本品を使用しないでください。
  - 本品の分解、改造などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関して、当社は責任を負いかねます。
- 注意**
- 皮膚の弱い部分への温度のご使用はお避けください。
  - 使用中、痛み等があった場合は、すぐにブラシヘッドを即から離してください。
  - 落した時、強い衝撃を受けた場合は、本体を修理しないでください。
  - 約4～8時間充電が完了します。完了後は本体から充電ケーブルをはずしてください。
  - 充電中以外には充電ケーブルを本体からはずしてください。
  - 本品の水洗いはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。ベンジリン、シンナー等の溶剤類で拭かないでください。
  - 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造をされた際の怪我、故障、破損等につきましては、当社では一切その責任を負いかねます。

（下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください）

- 急性疾患 ●有熱性疾患 ●血圧異常 ●伝染病疾患 ●心臓疾患 ●医用電子器具を使用されている方（ペースメーカーなどの体内埋込式医用電子機器、人工心臓などの生命維持用電子機、心電図などの装着型医用電子機器） ●皮膚がん病歴がある方 ●糖尿病および他の疾患による皮膚異常疾患の方 ●妊娠中の方 ●授乳中の方 ●皮膚のトラブル（アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、ニキビが化膿し炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌が敏感な方） ●他の育毛剤等で皮膚病を起こしている方 ●特に健康がすぐれない方 ●ステロイド系ホルモン剤等を長期服用されている方

（下記の部位には使用しないでください）

- 悪性腫瘍 ●切り傷 ●骨や関節の上 ●整形などでシリコンが使用されている部分
- 目や耳の周り、粘膜などのデリケートゾーン

■ご購入後初めて使用する場合は、本体を約1時間充電することをおすすめします。■

### 美・ル・ル プリリアント 機能紹介

**光エステ(赤色LED)**  
赤色LEDの光を当てることにより、頭皮の細胞や毛根を活性化し頭皮を健やかに保つ他、頭髮の発毛や育毛を促進します。

**赤色レーザー**  
低出力赤色レーザー光線が頭皮深部まで活力を与え、育毛をサポートします。

**エレクトロポレーション**  
特殊な電気を与えることにより肌細胞に微細な孔を開け、美容液等の成分を頭皮の奥に直接届けます。

**メソセラピー**  
エレクトロポレーションの微弱電流との組み合わせにより、育毛剤の浸透、効果を高めます。  
—EMS/RF温熱に設定すると自動的に稼働します。単体使用はできません。

**EMS**  
筋肉に刺激を与えて強制的に筋肉運動をさせることで頭皮にハリを与え、頭髮が育ちやすい環境に整えます。  
また、新陳代謝を活性化してコラーゲンの生成を助けます。

**RF温熱(ラジオ波)**  
高い周波数でお肌を温めます。1MHzのラジオ波による温熱効果でお肌を内側から広い範囲にわたってじんわり温め、血行を促進し肌細胞の活性化します。  
—同時に稼働します。単体使用はできません。

**マッサージ(Nurse)**  
適度な振動でマッサージし、育毛剤の成分を素早く皮膚の奥深くに浸透させます。  
また、血行を良くして肌細胞を活性化させます。

**赤色LEDと赤色レーザーの点灯パターン**



赤色レーザーのみ 薄毛を改善したい方に  
赤色LEDのみ 頭皮ラブラルにお悩みの方に  
赤色レーザーと赤色LED同時点灯 頭皮のトータルケアに

### ■ 選べる組み合わせ ■

**EMS RF温熱 + マッサージ(Nurse)**  
EMS/RF温熱の強さをレベル(L(弱)、M(中)、H(強))の三段階から選択できます。

**EMS RF温熱 + 赤色レーザー赤色LED**  
EMS/RF温熱の強さをレベル(L(弱)、M(中)、H(強))の三段階から選択できます。  
赤色レーザーと赤色LEDの点灯パターンを3/1パターンから選択できます。

エレクトロポレーションとメソセラピーは、ON/OFFボタンを押すと同時に稼働します。  
エレクトロポレーションとメソセラピーを個別に使用することはできません。

### セット内容と製品仕様



【本体仕様】  
充電時間4～8時間 入力5V/0.5A 使用電池リチウムイオンバッテリー  
高さ190×幅45(ヘッド部分)×厚さ35mm(ボディ部分) 重さ:100g  
【USB式アダプター仕様】  
入力100～240V 50/60Hz 0.2A 出力5V/1A

●ご購入後初めて使用する場合や長期使用しなかった場合、パワー低下や稼働時間が短くなった場合は、本体を充電してください。

●充電ケーブルの充電ジャックを本体の充電口に、USBコネクタをパソコンや付属のUSB式アダプターのUSBポートに接続します。

●充電お知らせランプが赤色に点灯します。  
※充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異常ではありません。

●充電時間や稼働時間は、本製品の使用頻度によって異なります。

●充電が完了すると充電お知らせランプが緑色に点灯しますので、ケーブルを外してください。

●充電中以外には、ケーブルを本体から抜いてください。

■充電に適した室温は、15～30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温下で充電を行ってください。  
また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。

■内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合も月に1回充電を行ってください。

■正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、電池の寿命です。

### ボタン操作

**ON/OFFボタン** 電源のON/OFFとEMS/RF温熱モードの設定を行います。


●ON/OFFボタンを押すと電源がONになり、液晶パネルが青色に点灯して各モードが表示されます。

●この状態でON/OFFボタンを押すと、EMS/RF温熱モードが動作します。(強さレベル「弱」) ON/OFFボタンを押すごとに強さレベルが上がります。

●強さレベル「強」の状態では、EMS/RF温熱は動作しません。

●強さレベル「強」の状態でもON/OFFボタンを押すと、電源がOFFになります。

●強さレベルを下下げたい場合は、一度電源をOFFにしてから再度設定してください。

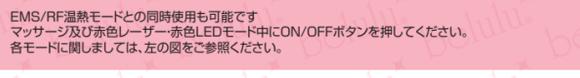

赤色レーザー赤色LED-マッサージ(Nurse)モードとの同時使用も可能です  
EMS/RF温熱モード中にPHOTONボタンを押してください。  
各モードに関しては右の図をご参照ください。

### PHOTONボタン

赤色レーザー赤色LEDとマッサージモードの設定を行います。

●ON/OFFボタンを押すと電源がONになり、液晶パネルが青色に点灯して各アイコンが表示されます。

●この状態でPHOTONボタンを押すと、マッサージ(Nurse)→赤色レーザー→赤色LED→赤色レーザー赤色LED同時点灯の順に切り替わります。

●赤色レーザー赤色LEDを同時に点灯したいようご注意ください。

●赤色レーザー赤色LED同時点灯の状態でもPHOTONボタンを押すと、赤色レーザー赤色LEDとすべてのアイコン表示が消え、液晶パネルのみ点灯している状態になります。


●赤色レーザー赤色LEDの変更やモードを変更したい場合は、再度PHOTONボタンを押して設定してください。



EMS/RF温熱モードとの同時使用も可能です  
マッサージ及び赤色レーザー赤色LEDモード中にON/OFFボタンを押してください。  
各モードに関しては、左の図をご参照ください。

### カウントダウン機能

頭皮のお手入れ時間は、各モード10分ずつが目安です。電源をONにすると液晶パネルに時間が表示され、10分経過すると、自動的に電源が切れます。10分を一回のお手入れ時間の目安としてください。

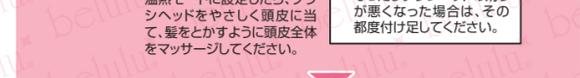

モードを選択すると、液晶パネルの一番下に「10分」と表示され、1分毎にカウントダウンされます。カウントダウン中に各ボタンを押しますと、カウントダウンがリセットされます。

## お手入れ方法

通常通り洗髪し、髪をしっかりと乾かしておきましょう。


- 赤色レーザーや赤色LEDを直接見たり長時間直視しないでください。特に、お子様が覗いて遊ばないよう十分ご注意ください。
- 普段通り洗髪し、髪をしっかりと乾かした状態で行ってください。
- ケアを行なう際は、必ず育毛剤や頭皮用美容液などをご使用ください。
- 本体側面の微弱電流誘導サイドバーに手が触れるように握ってください。
- ブラシヘッドは肌に対して真っ直ぐ当ててください。また、肌に強く押し付けたりせず、やさしく滑らせるように動かしてください。
- ご使用中、肌に異常を感じたり、肌に合わないと感じた場合はご使用を中止し、医師に相談するか、当社へご連絡ください。

### 頭皮の乾燥やフケが気になる

EMS/RF温熱(エレクトロポレーション/メソセラピー)で徹底保湿

1日1回 10分 週3回

EMS/RF温熱(エレクトロポレーション/メソセラピー)で美容液の成分を深く浸透させ、頭皮の奥からうるおって乾燥によるフケを改善します。

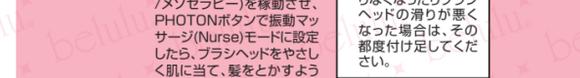

① 頭皮用の美容液などを頭皮にたっぷり付けます。

●頭頂部や耳の後ろなど、フケが出やすい部分を重点的に行うなど、ご自身の頭皮の状態に合わせてアレンジしてください。

●ケア中に美容液が足りなくなった時ブラシヘッドの滑りが悪くなる場合は、その都度付け足してください。



② ON/OFFボタンでEMS/RF温熱(エレクトロポレーション/メソセラピー)を設定したら、ブラシヘッドをやさしく頭皮に当て、髪をとくように頭皮全体をマッサージしてください。



③ ケアが終わりましたら、指の腹を使って残った美容液を頭皮に揉み込むようにマッサージしましょう。

### 頭髪にハリやコシがなくなってきた

EMS/RF温熱(エレクトロポレーション/メソセラピー)+振動マッサージと、赤色LEDで頭皮から健やかに

1日1回 各10分 週3回


EMS/RF温熱(エレクトロポレーション/メソセラピー)で美容液の成分を深く浸透させ、頭皮の奥からうるおいます。赤色LEDで頭皮の状態を整え、健やかな髪の成長をサポートします。




① 頭皮用の美容液などを頭皮にたっぷり付けます。

●頭頂部等ボリュームを出したい部分を重点的に行うなど、ご自身の頭皮の状態に合わせてアレンジしてください。

●ケア中に美容液が足りなくなったりブラシヘッドの滑りが悪くなった場合は、その都度付け足してください。

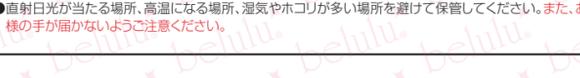

② ON/OFFボタンでEMS/RF温熱(エレクトロポレーション/メソセラピー)を設定させ、PHOTONボタンで赤色レーザーモードを設定したら、ブラシヘッドをやさしく肌当て、髪をとくように頭皮全体をマッサージしてください。

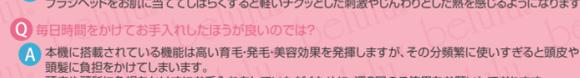


③ ケアが終わりましたら、指の腹を使って残った美容液を頭皮に揉み込むようにマッサージしましょう。

### 髪の毛分け目や生え際の薄毛が目立ってきた

EMS/RF温熱と振動マッサージ、赤色レーザーで発毛促進

1日1回 10分 週3回

EMS/RF温熱(エレクトロポレーション/メソセラピー)で育毛剤や発毛促進剤の成分をダイレクトに届けます。赤色レーザーで頭皮深部や毛根を活性化し発毛を促します。

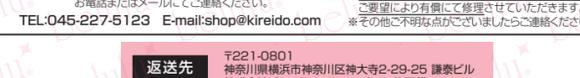

① 育毛剤や発毛促進剤などを頭皮にたっぷり付けます。

●薄毛が気になる部分を重点的に行うなど、ご自身の頭皮の状態に合わせてアレンジしてください。

●ケア中に美容液が足りなくなったりブラシヘッドの滑りが悪くなった場合は、その都度付け足してください。



② ON/OFFボタンでEMS/RF温熱(エレクトロポレーション/メソセラピー)を設定させ、PHOTONボタンで赤色レーザーモードを設定したら、ブラシヘッドをやさしく肌当て、髪をとくように頭皮全体をマッサージしてください。



③ ケアが終わりましたら、指の腹を使って残った美容液を頭皮に揉み込むようにマッサージしましょう。

●お手入れが終わったら  
●ON/OFFボタンを2秒以上長押しして、本体の電源を切ります。  
●指の腹を使って残った美容液を頭皮に揉み込むようにマッサージしましょう。  
●本体のブラシヘッドに付いた美容液や育毛剤等をきれいに拭き取り、消毒用アルコールを付けたやわらかい布やウェットティッシュなどで拭いて清潔にしてください。  
●シンナー・ベンジン等の溶剤類は使用しないでください。  
●水洗いはしないでください。防水仕様ではありません。  
●直射日光が当たる場所、高温になる場所、湿気やホコリが多い場所を避けて保管してください。また、お子様の手が届かないようご注意ください。

### \*QSA\*

Q EMS/RF温熱モードが動作していないようですか?  
A EMS/RF温熱モードは微弱電流を皮膚に流す機能なので、振動が発生するものではありません。ブラシヘッドをお肌に当ててしばらくすると軽いチツツとした刺激やじんわりとした熱を感じるようになります。

Q 毎日時間をかけてお手入れしたほうが良いのですか?  
A 本機に搭載されている機能は高い育毛・発毛・美容効果を発揮しますが、その分頻率に使用しすぎると頭皮や顔面に負担をかけるおそれがあります。お手入れを1日に1回、週3回のご使用をお願いします。同様の理由で、1日の使用時間もお手入れ手順に記載されている時間をお守りください。

Q 指定の育毛剤や発毛促進剤、美容液等がありますか?  
A 特になし。お手持ちの育毛剤や発毛促進剤、美容液等をお使いいただけます。

Q ブラシヘッドの材質は何ですか?  
A ブラシヘッドの表面(皮膚に触れる部分)には、ステンレスを使用しております。備わった側面は、シリコンが加工されている場合があります。

Q 表示時間が10分のままカウントダウンされないのですが...  
A カウントダウン中に各ボタンを押しますと、モードが変更されてカウントダウンがリセットされ、再度10分からスタートします。お手入れ中はボタンを押さないようご注意ください。

Q 液晶パネルの表示が見づらくなったり、LEDやレーザーの光が弱くなっていますか?  
A 充電量が少なくなっています。付属の充電ケーブルを接続し、充電を行ってください。

### 保証期間内の修理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。 ※ご使用回数に関わらずご購入から3ヵ月以上経過した場合、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。

受注番号または注文番号 | 氏名 | 購入商品 | 購入からの期間 | 故障状況

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。 ※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。 ※その他不明な点がございましたらご連絡ください。

TEL:045-227-5123 E-mail:shop@kireido.com

### 返送先

〒221-0801 神奈川県横浜市神奈川区神奈大寺2-29-25 謙泰ビル 株式会社ビュティフルエンジェル 修理係

【保証書】 ※本体以外の付属品は消耗品の為、保証対象外となります。

本機は本記載内容で修理を行うことをお約束するものではありません。 ※修理費用は保証期間中に発生した場合、本書に記載のとおりです。

1. 取扱い説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は修理が無料です。 ※ご使用回数に関わらずご購入から3ヵ月以上経過した場合、修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。

2. 保証期間内に故障して修理を要する場合は、商品と本書を添付の上、ご連絡ください。

3. 修理の必要な場合は、保証期間中でも修理が無料です。

4. 本機は、日本国内においてのみ有効です。

●修理依頼の場、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理していません。また、お問い合わせや修理依頼の際に「受注番号」が必須となりますので、お手数ですがお客様ご自身で受注番号を書き留めいただきますようお願い申し上げます。

●本書は本機に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものではありません。本書の保証書に記載されている保証期間、およびお約束の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間終了後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。

●届着書: 届着書: belulu brilliant hair

●お客様住所: 神奈川県横浜市神奈川区神奈大寺2-29-25 謙泰ビル

●お客様氏名: 株式会社ビュティフルエンジェル

●受注番号: 販売元株式会社ビュティフルエンジェル

販売元株式会社ビュティフルエンジェル