


# belulu® ClearVeil Lite

## 美ルル クリアベールライト

### 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。  
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので大切に保管してください。

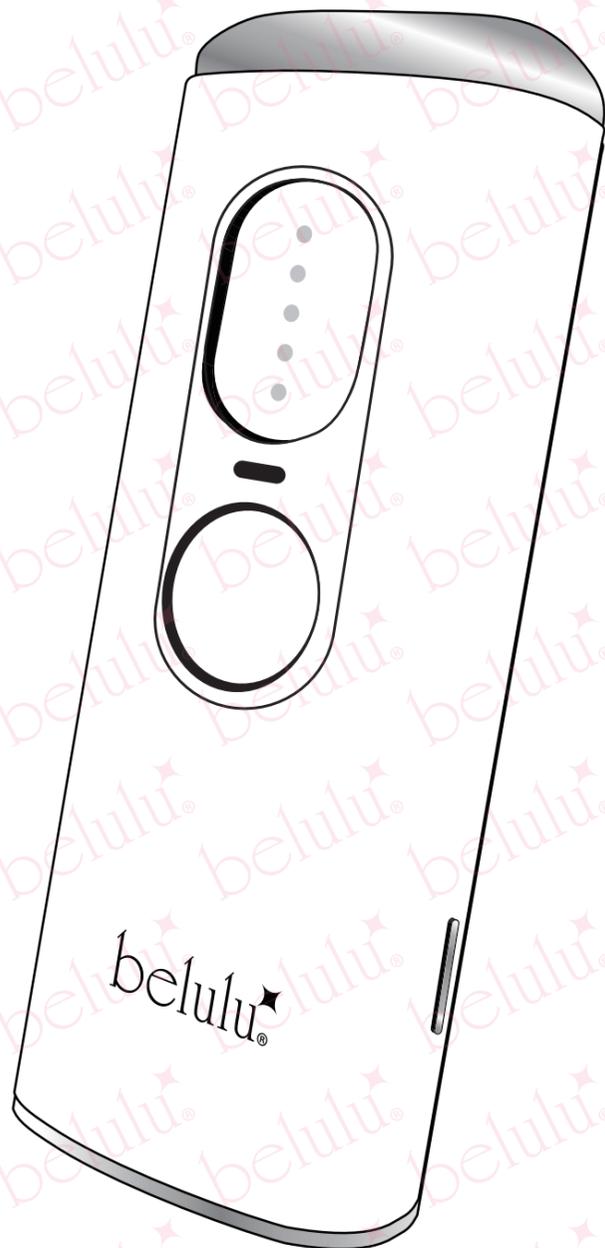

### 1 安全上のご注意 -正しくお使いいただくために-

ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、お客様自身や他の方への危害や財産等への損害を未然に防止するものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される危害や損害の程度を表していますので、必ずよく読み、指示に従ってください。取扱説明書は、本製品を安全に正しくお使いいただくために必要です。本製品を人に貸す、または差し上げる場合は、必ず本書と一緒にお渡しください。

#### 【表示と意味】

表示	意味
⚠️ 危険	取り扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。
⚠️ 警告	取り扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠️ 注意	取り扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 ※物的損害とは、家屋、家財、及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

#### 【絵表示の意味】

⚠️	「危険・警告・注意」を表します。具体的な注意内容は図の中や近くに絵または文章で記載しています。
🚫	「禁止事項」を表します。具体的な禁止内容は図の中や近くに絵または文章で記載しています。
❗	「行為の強制・指示」(必ず行うこと)を表しています。具体的な指示内容は図の中や近くに絵または文章で記載しています。

#### ご使用前に

⚠️ 危険	
🚫 禁止	●下記のような医療用電子機器をお使いの方は、本製品を使用しないでください。 ○ペースメーカー等の体内植込式医療用電子機器 ○人工肺等の生命維持用医療電子機器 ○心電図等の装着型医療電子機器 ○その他、体内の装着している医療用電子機器 ※医療用電子機器の誤作動をまねくおそれがあります。

⚠️ 警告	
🚫 禁止	●下記に当てはまる方は、本製品のご使用をお避けください。 ○急性疾患がある方 ○有熱性疾患がある方 ○結核性疾患の方 ○血友病疾患の方 ○血圧異常の方 ○悪性腫瘍がある方 ○伝染病疾患の方 ○心臓疾患の方 ○狭心症の方 ○3か月以内に放射線治療や化学療法を受けたことがある方 ○多発性硬化症の方 ○紫斑病など内出血しやすい方 ○皮膚ガン病歴がある方 ○てんかんをお持ちの方 ○糖尿病及び他の疾患による皮膚異常疾患の方 ○妊娠中・妊娠直後の方 ○授乳中の方 ○顔面神経痛をお持ちの方 ○ケロイド体質の方 ○アトピー性皮膚炎の方 ○過度の日焼けをしている方 ○ニキビが化膿し炎症を起こしている方 ○アレルギー体質で特に肌が敏感な方 ○化粧品や化学繊維等でかぶれた経験がある方 ○ステロイド系ホルモン剤の長期服用や肝機能障害で毛細血管の拡張を起こしている方 ○事故等により頭部や眼角的後遺症がある方 ○海水浴や大衆浴場へ行く前の方 ○本品を使用する前後6週間以内に他の脱毛を行う、または行った方 ○本品を使用する前後1週間以内に美白化粧品やビタミンAが含まれた化粧品等を使用する、またはされた方 ○乳幼児 ○自分の意思で動いたり、意思表示ができない方 ○その他、医師の治療を受けている時や療養中、身体に異常がある場合 ※事故や肌、身体に異常が起きるおそれがあります。

ご使用場所・電源

⚠ 警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品は防水仕様ではありません。浴室など水がかかりやすい場所での使用はしないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。</li> <li>●台所やストーブなど火気、高温の近くや車内、直射日光が当たる場所での使用や保管はしないでください。事故や感電、故障のおそれがあります。</li> <li>●コードやプラグにホコリやゴミが付着したまま使用しないでください。火災、感電、ショート、やけどのおそれがあります。</li> </ul>

⚠ 警告	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用電圧、ケーブルなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。守らないと火災や感電、ショート、やけどのおそれがあります。</li> <li>●使用中以外や保管する際は、コードを本体及びコンセントから抜いてください。プラグを抜くときはコードを引っ張らず、プラグ本体を持って引き抜いてください。コードを引っ張りますと、断線やショート、感電のおそれがあります。</li> </ul>

準備及びご使用时

⚠ 警告	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●必ず本製品の使用目的(体の脱毛・ケア)に沿ってご使用ください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。</li> <li>●説明書で定められた手順で操作してください。事故や体調不良、故障を起こすおそれがあります。</li> <li>●使用時間や使用頻度は本書の指示に従ってください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。</li> </ul>
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●防水ではありませんので、浴室内や水気の多い場所では使用しないでください。</li> <li>●本製品は家庭用機器です。業務目的での使用はしないでください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。</li> <li>●本体やコードの破損、故障、変形、断線など不具合がある場合や異常に発熱する場合、コンセントやプラグへの差し込みが緩い場合は、使用しないでください。火災、感電、ショート、やけどのおそれがあります。</li> <li>●濡れた手で本体やコード、プラグを触ったり、コンセントを抜き差ししないでください。感電やショート、事故のおそれがあります。</li> </ul>

⚠ 警告	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品を使用し、痛みや不調を感じたり、発疹、発赤、かゆみ等皮膚症状が現れた場合やその他皮膚に異常を感じた時は直ちにご使用を中止し、当社にご連絡いただくか専門医にご相談ください。守らないと肌トラブルや体調不良を起こすおそれがあります。</li> <li>●本製品のご使用中に異臭や異常発熱した時は直ちに使用を中止し、点検のため当社にご連絡ください。守らないと事故や故障、ケガのおそれがあります。</li> </ul>

⚠ 注意	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご使用时は、以下の事項をお守りください。</li> <li>○初めて使用される方や肌が敏感な方は、目立たない部分で使用時間を短くしたり、出力レベルを低く設定するなど様子を見ながら使用してください。守らないと肌トラブルや事故のおそれがあります。</li> <li>○身に着けている貴金属類にフラッシュが当たりますと危険です。ご使用时は、貴金属類は外してください。</li> <li>○脱毛箇所への過度のご使用はお避けください。※守らないと腫れたり、赤みができる場合があります。</li> <li>●本製品に通電させたまま長時間放置しないでください。事故やトラブルのおそれがあります。</li> <li>●使用前に操作ボタンをすべて操作し、本体が正常に作動するか確認を行ってください。万一、損傷、異常等がある場合は使用せず、弊社へご連絡ください。守らないと、事故や体調不良を起こすおそれがあります。</li> </ul>

お手入れ・保管


⚠ 警告	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乳幼児や自分で意思表示ができない人の手の届かない場所に保管してください。守らないと事故やケガ、故障のおそれがあります。</li> <li>●本体のお手入れをする際は必ず電源を切り、充電中や稼働中は行わないでください。守らないと感電などの事故のおそれがあります。</li> </ul>
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体や付属品の分解、改造、お客様ご自身での修理は絶対にしないでください。発火や異常動作による事故やケガのおそれがある他、修理の対象外となります。本製品の不具合につきましては、必ず当社へご連絡ください。</li> </ul>

⚠ 注意	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●充電や保管は高温多湿、振動、直射日光の当たる場所を避け、涼しくて安全な場所で行ってください。守らないと事故や故障の他、製品の劣化を早めます。</li> <li>●本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体の条例に従い処分してください。地球環境のため、放置はしないでください。</li> </ul>
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体や付属品を洗浄する際は、シンナー、ベンジン、ガソリンなどの揮発油や薬品類、研磨剤を含んだ洗剤、熱湯を使用しないでください。変色、変質や傷がつくおそれがあります。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布を浸してよく絞り、やさしく汚れを拭き取ってください。その後、乾いた布で仕上げてください。</li> <li>●本体や付属品を熱器具に近付けたり、電子レンジや高压容器に入れないでください。発熱、発火、故障等の原因になります。</li> <li>●本体や付属品を高い所から落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。また、上記が原因で本体や付属品が損傷した場合は使用しないでください。ケガや故障のおそれがあります。</li> <li>●本製品や付属品を水につけたり、水洗いしないでください。感電やショート、事故、故障のおそれがあります。</li> </ul>

⚠ 別紙の【表A 使用可能な肌色表】をご参照ください ⚠

## 2 セット内容・名称

※製品仕様や外観・内容は予告無く変更になる場合があります。

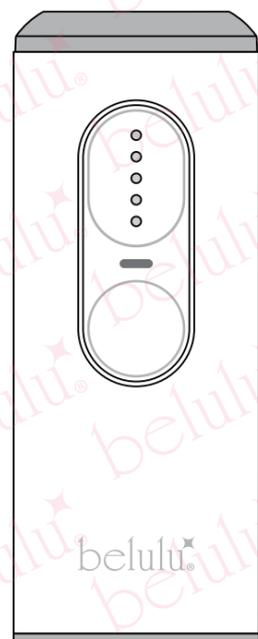

脱毛器本体



電源コード



保護グラス

### 【本体仕様】

- 入力電力:30W
- 定格電圧:100V~240V
- 定格入力:50Hz/60Hz  
0.8A
- 定格出力:12V===2.5A




照射口


LEDパネル

お知らせランプ

照射ボタン

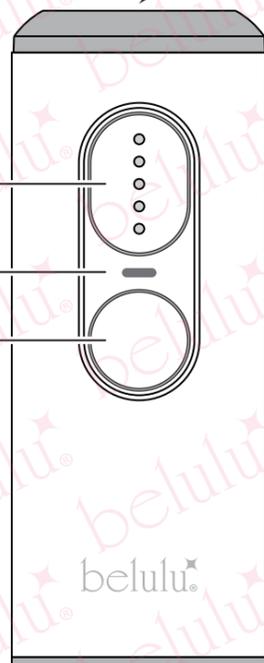

belulu

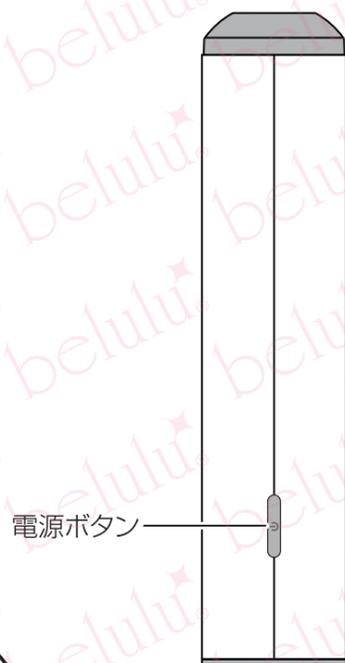


電源ボタン



コード差込口

## 3 通電方法

- 電源コードのプラグを脱毛器本体下部のコード差込口に差し込みます。
- ACプラグを家庭用コンセントに差し込みます。指示ランプが1秒ほど点灯します。  
※通電だけしている状態です。電源は入っていません。

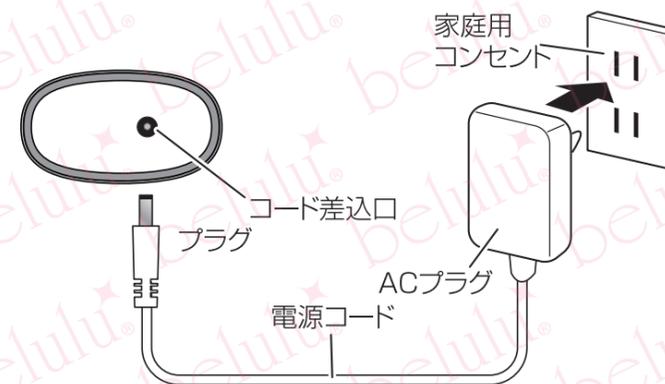

家庭用  
コンセント

コード差込口  
プラグ

ACプラグ

電源コード


## 4 ボタン操作

### 電源を入れる

- 電源ボタンを2秒以上長押しするとファンが稼働します。LEDパネルの一番下のライトが点灯、この状態での照射が可能です。

### 照射レベルを設定する

電源ボタンを押すごとに、下図のように照射レベルが変わります。

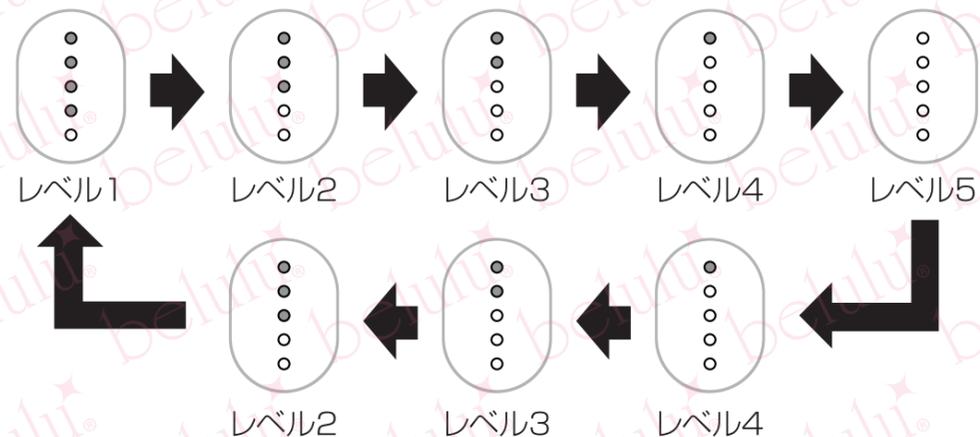

## 5 操作方法

- 電源ボタンを2秒以上長押しすると電源がONになります。
- 電源ボタンを一回押すごとに照射レベルが調整できます。
- レベル設定完了後、照射ボタンを1回押すごとに、照射が行えます。
- 電源をONにした後、または照射レベルを設定した後、照射ボタンを押したまま、肌にあてると連続照射ができます。

連射モード設定中に照射口が肌に触れているとフラッシュが照射されますのでご注意ください。

## 6 脱毛を行う


### 脱毛を行う前の準備

- 照射箇所を清潔にし、よく乾かしておいてください。
- 脱毛を行う際の毛の長さは、2～3mmを推奨しております。毛が長い場合はシェーバー等で長さを整え、短い場合は2～3mm程度まで伸ばしてください。※ワックスや毛抜き、電気針、脱毛剤等は使用しないでください。
- ジェルや化粧水等は必要ありません。
- ほくろが多い場合やシミがある場合は、絆創膏等でカバーしてください。色素が濃い部分に熱が集中し、痛みややけどを起こすおそれがあります。

本機は非常に強い光が連続的に発光します。目を守る為、保護グラスを装着するか目を閉じてご使用ください。


### 手で照射する場合

本製品は安全装置により、機器が肌を検知していない状態ではフラッシュを照射できません。

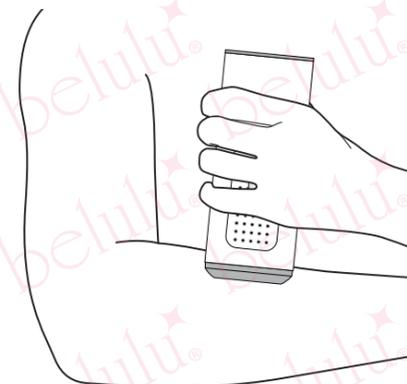

①

- 照射口を肌にしっかり当てます。
- 肌が正しく検知されると、お知らせランプが点灯します。
- この状態になるとフラッシュを照射することができます。

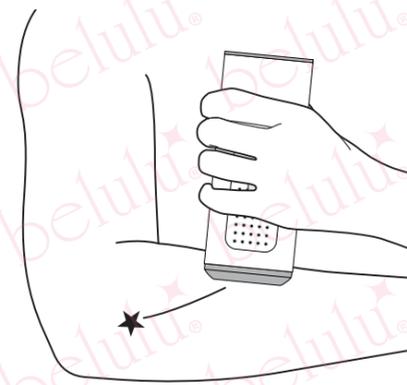


②

- 照射口を肌に密着させたまま照射ボタンを押すと、フラッシュが照射されます。
- フラッシュ照射後はカートリッジ内冷却モードが自動で稼働するため、約1秒後操作が出来ます。

初めて使用する方や肌が弱い方は照射レベル1から始めることを推奨しております。

### 自動連射の場合

連続照射機能搭載のため、センサー感度が非常に高く設定されています。肌に軽く当てただけで照射されますので、保護グラスを着用の上、照射口を直視しないでください。

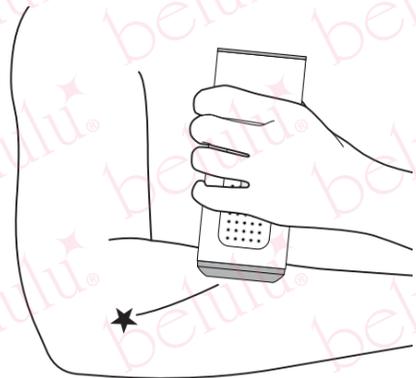

- 照射口を肌にしっかり当てます。
- 肌が正しく検知されると、LEDパネルが点灯します。
- この状態になるとフラッシュを照射することができます。
- 照射ボタンを押したまま、肌にあてると連続照射ができます。
- 照射後熱感が続く場合は保冷剤等で肌を冷やしてください。

## 7 脱毛が終わったら

### お肌

- 脱毛後の肌は、非常にデリケートな状態になっています。クーリングパック等で冷却し、化粧水やクリーム等で保湿を行ってください。
- 脱毛後に外出する場合は、必ずSPF30++以上の日焼け止めを塗ってください。


### 脱毛器本体

- 電源ボタンを2秒以上長押しして電源を切り、プラグを抜いてください。
- 本体や照射口はウェットティッシュや硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。  
※防水ではありませんので、水洗いはしないでください。  
※ベンジン、シンナー等の溶剤類は使用しないでください。
- 清潔を保つため、箱等に入れゴミやホコリがつかないように保管してください。
- 直射日光や高温多湿を避け、お子様の手が届かない場所に保管してください。

連続照射を続けると本体内部、および照射口付近が発熱するため排熱が必要となります。

ご使用中に過剰な発熱を感じましたら本体を冷まし熱が下がったことを確認後照射を再開してください。

照射口は肌に対して垂直に、照射口全体を肌が覆うようにしっかり当ててください。照射口の一部が肌に当たってなかったり、斜めになっていると、照射されません。

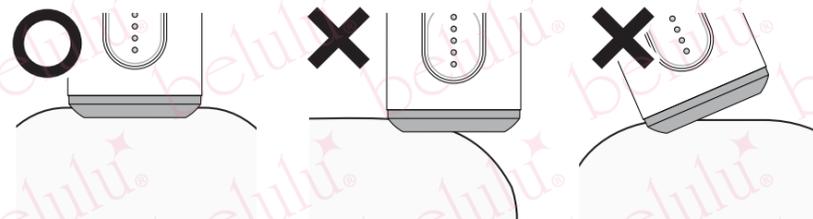

■別紙に詳しい照射回数や照射周期が記載されておりますので、ご参照ください。■

8 故障かな?と思ったら -よくあるお問い合わせ-

<p>通電しない 電源が入らない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードは正しく接続されていますか? コードのつなぎ方が間違っていたり接続が不十分ですと、通電できませんので電源が入りません。 【通電方法】を参照し、正しく接続してください。 また、差し込み部分に緩みがないか確認してください。</li> <li>●電源ボタンを長押ししていますか? 電源ボタンを軽く押しただけでは電源は入りません。 2秒以上長押ししてください。</li> </ul> <p>【解決しない場合は】 ケーブルの断線、もしくは本体の初期不良および故障が考えられますので、当店へご連絡ください。</p>
<p>フラッシュが照射 されない</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●肌の色が別紙の【表A】の「濃褐色」「黒褐色」に該当していませんか? 【表A】で肌の色が濃褐色や黒褐色に該当する場合はやけど防止の観点から使用できません。</li> <li>●フラッシュ照射口が肌にしっかり当たっていますか? 照射口の一部が肌に当たっていなかったり、斜めになっていると、安全装置が稼働しフラッシュ照射ができません。 肌に対して垂直に、照射口全体を肌が覆うようにしっかり当ててください。</li> <li>●残りショット数が無くなっている可能性があります。</li> </ul> <p>【動作確認しても作動していない場合は】 本体の初期不良及び故障が考えられますので、当店へご連絡ください。</p>
<p>使用を続けていると照射できなくなったりボタン操作がしにくくなる</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●少し時間をおいてゆっくり操作してください。 照射を続けていると熱が蓄積されることにより一時的に安全装置が作動し照射が行えなくなることがあります。(故障ではありません) 少し時間をおいてから再開してください。</li> </ul> <p>【動作確認しても作動していない場合は】 本体の故障が考えられますので、当店へご連絡ください。</p>

よくあるお問い合わせ

Q.フラッシュ照射時にジェル等が必要ないのはなぜですか?

A. フラッシュ光は肌に悪影響がなく、高い肌ケア効果がありますので、ジェル等は必要ありません。  
ただし、肌を守るために脱毛後のアフターケア(クールダウンや保湿)はしっかりと行ってください。

Q.妊娠中ですが、使っても大丈夫ですか?

A. 妊娠中もご使用いただけますが、妊娠中はホルモンバランスが不安定でお肌もデリケートな状態になっている為、ご使用のタイミングによっては稀に肌トラブルが起こる場合がございます。  
必ず医師とご相談の上、お肌の様子を見ながらご使用いただくことをおすすめしております。  
(脱毛器の機能が母体や胎児に影響を及ぼすことはありませんので、ご安心ください。)

Q.子供にも使えますか?

A. 中学生以下のお子様を使用する場合は、以下をご了承の上、目立たない場所でパッチテストを行い、一番弱いレベル設定で保護者の監視の下でお使いいただきますようお願い致します。

- 二次成長期は毛も著しく成長しているため、処理を行ってもすぐに毛が再生します。
- フラッシュ式脱毛は毛の黒い色素に反応し処理をする仕組みですが、色素が薄く細いお子様の毛にはあまり効果が無い可能性がございます。
- 二次成長中はホルモンバランスが不安定な為、肌荒れなどを起こす場合がございます。
- お子様は大人と比べて肌が薄く弱い為、肌トラブルを起こす場合がございます。

ホルモンバランスや毛の成長が安定する高校生以上からのご使用を推奨しております。

Q.使っても効果がまったく感じられないのですが…

A. フラッシュ式脱毛は毛根にダメージを与えて徐々に毛を生えにくくするもので、照射後すぐに毛が抜けるものではありません。  
別紙にありますように、毛の周期に合わせて照射を行ってください。  
※効果の現れ方には毛質等により個人差があります。  
また、本機はあくまでご家庭でお使いいただくことを前提に作られており、安全のためエステと比べると低い出力設定になっています。

Q.毎日照射してはダメですか?

A. フラッシュ脱毛は生えている毛には効果がありますが、成長途中や休止期の毛には効果がないため、毎日照射しても意味はありません。  
別紙にありますように、毛の周期に合わせて照射を行ってください。

## 修理・返品について

お届けからの期間	返品	修理費用	返品・修理の送料
商品到着1週間以内	○*	当社負担	初期不良の場合、返品送料は当社負担
商品到着1週間～3ヵ月	×	当社負担	初期不良の場合、修理送料は当社負担
商品到着3ヵ月～1年	×	当社負担	往復の送料は購入者様負担

- ※弊社の商品のみ対象とさせていただきます。
- ※美容液やケーブル等の消耗品は保証・返品対象外です。
- ※オークション、アウトレット、各種フリマアプリ等で販売の中古品、または非正規代理店でご購入された商品は保証対象外となります。
- ※修理をご希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。当社承認のない商品の送付は受付致しかねます。
- ※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。
- ※当初の保証期間の満了日をもって保証期間は終了致します。弊社での修理・交換等をお受けいただくことにより、保証期間が延長するものではありません。
- ※修理品のご送付の際は、宅配便・ゆうパック・特定記録郵便などをご利用いただき、必ずお手元に送り状の控えを保管してください。控えがない場合の配送トラブルは対応致しかねます。

## お客様サポートセンター

受注番号または注文番号

ご氏名

購入商品

購入からの期間

故障状況

上記必須事項を添えて、下記までお問い合わせください。

### お電話で問い合わせる

固定電話から

携帯電話・PHSから

 **0120-09-5121** **050-4560-1423**

受付時間：平日 11:00～16:00

### メールで問い合わせる

メールアドレス

**support@kireido.com**



メールは常時受け付けておりますが、  
返答は平日11:00～16:00となります。

### 商品返送先住所

〒221-0801  
神奈川県横浜市神奈川区神大寺2-29-25 謙泰ビル  
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

## 修理規定

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。  
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
  - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
  - c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - d. 本書の提示がない場合。
  - e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

belulu® ClearVeil Lite 保証書	
保証期間	販売日から1年間(消耗品は除く)
ご購入日	年 月 日
お客様	■ご氏名: _____
	■ご住所: _____
	■電話番号: _____
	■受注番号: _____
販売店	_____ 株式会社ビューティフルエンジェル

- 通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くても問題ございません。  
ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。
- この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。

belulu®

~ ClearVeil Lite ~