

修理規定

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。
ご購入日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

1. 取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、ご依頼ください。
3. 次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
 - a. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - b. お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
 - c. 火災、地震、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - d. 本書の提示がない場合。
 - e. 本書にお客様名、お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。


belulu hikari~Shine~ 保証書			
保証期間	販売日から1年間 (ご使用回数に関わらず)	ご購入日	年 月 日
お客様	■ご氏名: _____		
	■ご住所: _____ _____		
	■電話番号: _____		
	■受注番号: _____		
販売店	_____ 株式会社ビューティフルエンジェル		

- 通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管理している為「お買い上げ日」「店舗印」の記載が無くて問題ございません。
ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を書き留めていただきますようお願い申し上げます。
- この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。(本体のみ)従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合は、当社までお問い合わせください。

belulu hikari~Shine~

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので大切に保管してください。

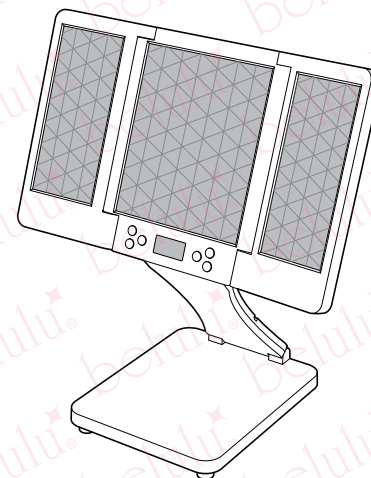

ご使用前に必ずお読みください。

警告

- 使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
- 本品をご使用中は保護メガネを着用し、LEDライトを直接見たり、目に照射しないでください。LEDライトを長時間直射しますと、目を傷めるおそれがあります。
- 本製品の破損、故障、変形、コードの断線など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
- 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、ご使用を中止してください。
- ACアダプターのコードを引っ張ったり、濡れた手でプラグ部分を触らないでください。
- ストーブ等高温になる場所で本品や電源アダプタを使用したり放置したりしないでください。
- 濡れた手での使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
- 本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや感電、故障のおそれがあります。
- 万一、皮膚に異常が見られた場合は、本製品のご使用を中止して医師に相談してください。
- 下記のリストをよくご確認ください、該当する方は本製品を使用しないでください。
- 本品の分解、改造、お客様ご自身による修理などは絶対にしないでください。本製品及び付属品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本体や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。

注意

- 本製品のご使用時や保管時は、水平で安定した場所に置いてください。
- 落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
- 本体の水洗いはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。また、ベンジン、シンナー等の溶剤類で拭かないでください。
- 上記の注意・警告に従わない場合など、誤ったご使用・分解・改造、お客様ご自身による修理等をされた際の怪我、故障、破損等に関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任を負いかねます。

〈下記にあてはまる方は、ご使用をお避けください〉

- 皮膚ガン病歴がある方 ●皮膚のトラブル(アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、アレルギー体質で特に肌が敏感な方) ●特に健康がすぐれない方

〈下記の部位には使用しないでください〉

- 悪性腫瘍 ●整形などでシリコンが使用されている部分 ●粘膜などのデリケートゾーン

機能紹介

624個の高効率LEDによる光エステでパーフェクト美肌！

LEDがお肌を活性化させ、美しい素肌に導きます。


また、三面鏡のようにになっているので、顔の側面など隅々までまんべんなくケアできます。

さらに反射によって、照射効果が倍になります！

LEDライトのカラーと効果


基本のカラーは赤・青・緑色・黄色の4色と赤外線です。

色ごとに波長が異なり肌に届く深さが違うため、色によって様々な効果をもたらします。

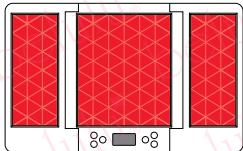


赤LED 波長：630nm

コラーゲンを増やしてシワやたるみなどの年齢肌を改善します。
紫外線によるダメージを修復する働きもあり、アンチエイジング効

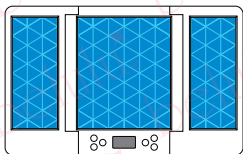


青LED 波長：470nm

ニキビの原因といわれている活性酸素を排除する働きがあります。
できてしまったニキビを沈静化し、さらにニキビができにくい肌に

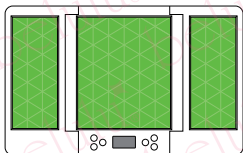


緑色LED 波長：505nm

色素沈着に最も効果的シミやニキビ跡、傷跡などの色素沈着を薄く
する効果があります。色むらをなくし肌のトーンを整えより自然と美
しく見える肌へと導いてくれます。

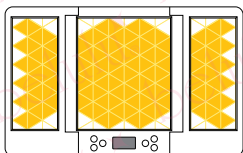

黄色LED 波長：590nm

新陳代謝を促進し、お肌のターンオーバーを正常に戻します。シ

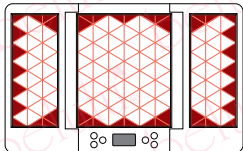

赤外線 波長：850/940nm

赤外線で肌リズムを整えコラーゲン生成機能をケア。肌本来の力
をサポートします。

※赤外線LEDは不可視型となります。故障ではありません。

IPLインテンス・パルス・ライト

強いパワーを肌のおくまで届けます。毛穴の目立ちにくさなどを実感。

さらに！！複数カラーの同時点灯も可能です！！

カラーが自由に組み合わせ、複数のケアが一度にできるから、忙しくてじっくりお手入れする時間
がない方におすすめ！

LEDライトのカラーが自動で変わる、お手軽コースモードを10種搭載しています。

お客様サポートセンター

受注番号または注文番号

ご氏名

購入商品

購入からの期間

故障状況

上記必須事項を添えて、下記までお問い合わせください。

お電話で問い合わせる

固定電話・携帯・スマートフォンから

 **0120-48-6301**

受付時間：平日 11:00～16:00

メールで問い合わせる



左側のQRコードをスキャンして、お問
い合わせシステムに必須事項とお問
い合わせ内容を入力してください。

メールは常時受け付けておりますが、
返答は平日11:00～16:00となります。

商品返送先住所

株式会社ビューティフルエンジェル 修理係
〒221-0801 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目29-25

※製品の返品や修理をご希望される場合は、ご返送なさる前に

修理について

お問い合わせ先の販売店へ直接ご相談ください。

商品到着1週間～3ヵ月

初期不良の場合、修理の送料は当社負担

商品到着3ヵ月～1年

往復の送料は購入者様ご負担

保証期間内中の修理費用は無償とさせていただきます。

※弊社の商品のみ対象とさせていただきます。

※ケーブル類や美容液等、付属の消耗品は保証対象外です。

※オークション、アウトレット、各種フリマアプリ等で販売の中古品、または非正規代理店でご購入された商品は保証対象外となります。


※修理をご希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。当社承認のない商品の送付は受付致しかねます。

※保証期間終了後は、診断をして対応可能な場合はご要望により有償にて対応させていただきます。

※当初の保証期間の満了日をもって保証期間は終了致します。弊社での修理・交換等をお受けいただくことにより、保証期間が延長するものではありません。

※修理品のご送付の際は、宅配便・ゆうパック・特定記録郵便などをご利用いただき、必ずお手元に送り状の控えを保管してください。控えがない場合の配送トラブルは対応致しかねます。

本体仕様

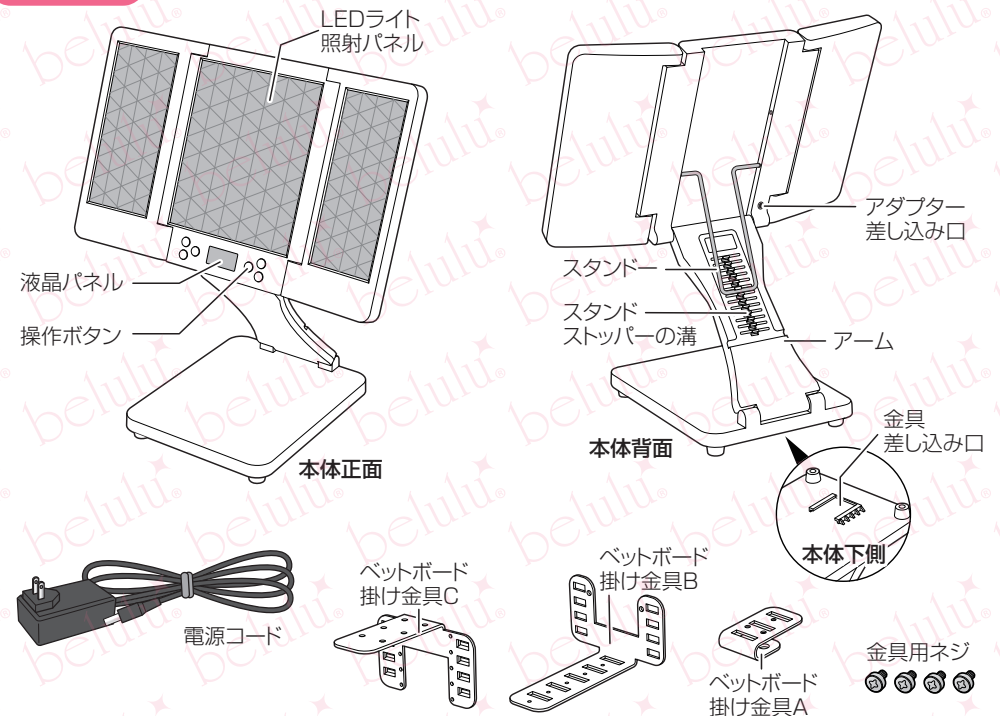

【セット内容】


- belulu Hikari~Shine~本体
- 保護メガネ ●電源ケーブル
- 保証書付き取扱説明書(本書)
- ペットボード掛け金具ABC ●ネジ若干

【製品仕様】


- 定格電圧:AC100-240V(50Hz/60Hz)
- 定格消費電力:36W
- 重量:1.5kg
- サイズ:380縦×60横×240高さmm(折り畳み時)

【ご使用前の準備】

- 本体背面のアダプター差し込み口に、ACアダプターの本体側プラグを差し込みます。
- 家庭用コンセントにACアダプターのコンセント側プラグを差し込みます。
- 操作ボタンを3秒程長押しと、液晶パネルが点灯、待機状態になります。

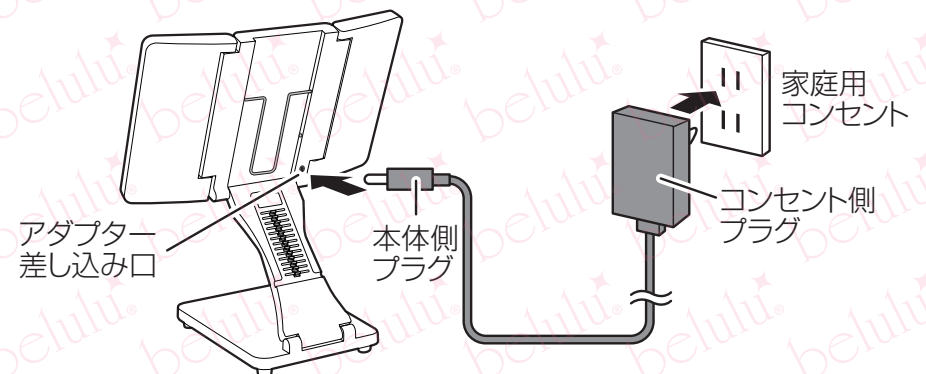

操作ボタンの説明

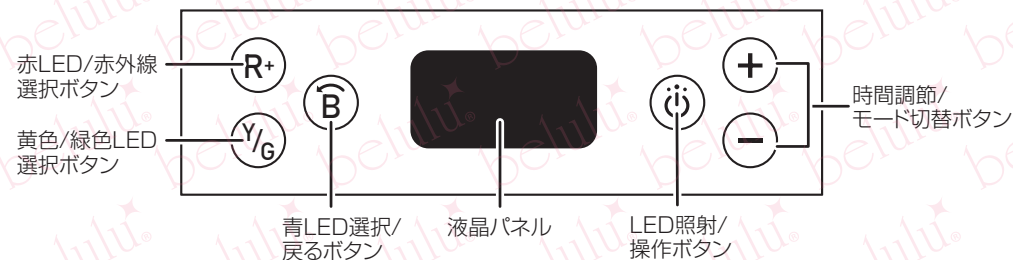


液晶パネルの説明



- mode00は通常モードになります。照射カラーや照射時間などがお好みに設定できます。
- mode01～mode14は自動モードになります。

照射時のご注意

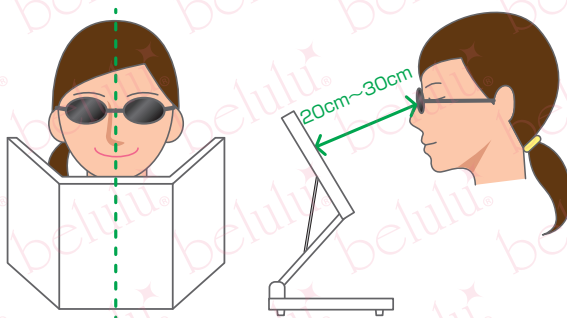

- 本体背面のスタンドストッパーの溝にスタンドを入れて角度を固定します。
- スタンドを入れる溝の位置とアームの角度によって、本体の角度を調節することができます。
- 水平で安定した場所に本体を置いてください。
- LED照射パネルとアームをお好みの角度に調節して、ストッパーを固定ください。
- 顔の位置は、本体のセンターパネルに合わせてください。
- LED照射パネルから顔までの距離は、20cm～30cm程度空けてください。

- 普段通り洗顔してタオルで水気をしっかり拭き取った後、化粧水や美容液を塗ってください。
- 光エステ中は保護メガネを着用し、目を閉じてください。LEDライトを長時間直視しますと、目を傷めるおそれがあります。
- ご使用時は、腕時計やジュエリー等の貴金属類は外してください。
- ご使用中、肌に異常を感じたり、肌に合わないと感じた場合はご使用を中止し、医師に相談するか当社へご連絡ください。

美・ル・ル ヒカリは体にもご使用いただけます！



ヒップのたるみ、デコルテのザラつき、背中ニキビ等々・・・顔だけでなく体のお悩みにも、belulu Hikari～Shine～は効果を発揮します。
P.2のLED各色の効能を参照し、お悩みに合わせた色のLEDでケアを行なってください。

例えば・・・


- 背中ニキビのケアに青LED
- 首元のシワに赤LED+黄色LEDなど。※一例です。

お手入れが終わったら

- クリーム等をたっぷり塗って、脂分を補いましょう。
- 電源を切り、ACアダプターを家庭用コンセントと本体から外してください。
- 汚れが気になる場合は、硬く絞った濡れ布巾や消毒用アルコールを浸み込ませたやわらかい布等でやさしく拭いてください。
※防水仕様ではありませんので、水洗いはしないでください。
※ベンジン・シンナー等の溶剤は使用しないでください。
- 本体を折りたたんでください。


【本体の折りたたみ方】

- ストッパーを外します。
- LED照射パネルを奥に倒しながら、アームを手前に引き倒します。(図3)
- 3つ折になるように完全に折りたたみます。(図4)
- ホコリ防止の為、照射パネルに布等をかぶせておくことをおすすめします。

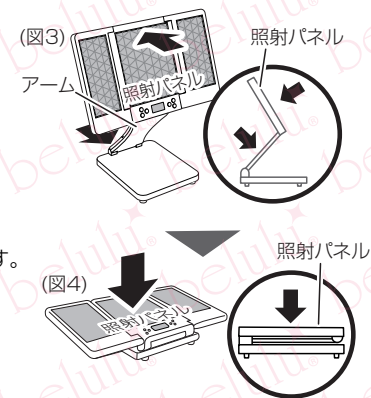


ベットに掛ける設置法

- ①ベットボードの厚みを事前に確認ください。
一番ベットボードの厚みに合うサイズ(図1)でベットボード掛け金具Cと掛け金具Bを下図のように装着してください。

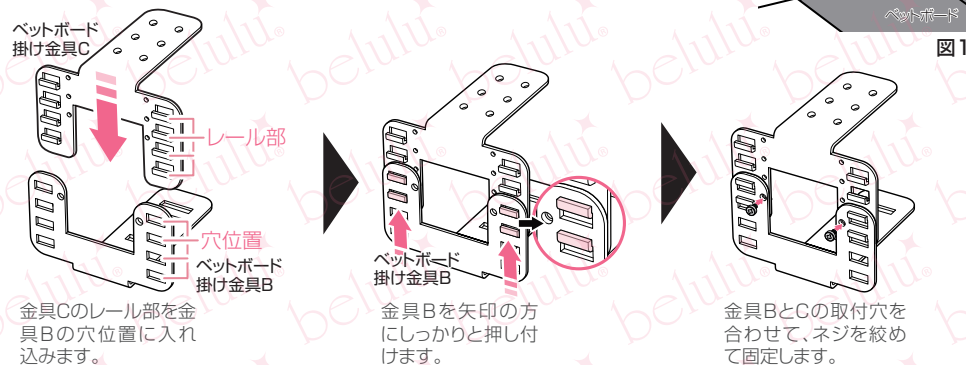


- ②図2のように金具Aからベットまで40cm~50cmの間隔がある程度穴位置を確定してください。

- ③金具Aと掛け金具B+Cを下図のように装着してください。

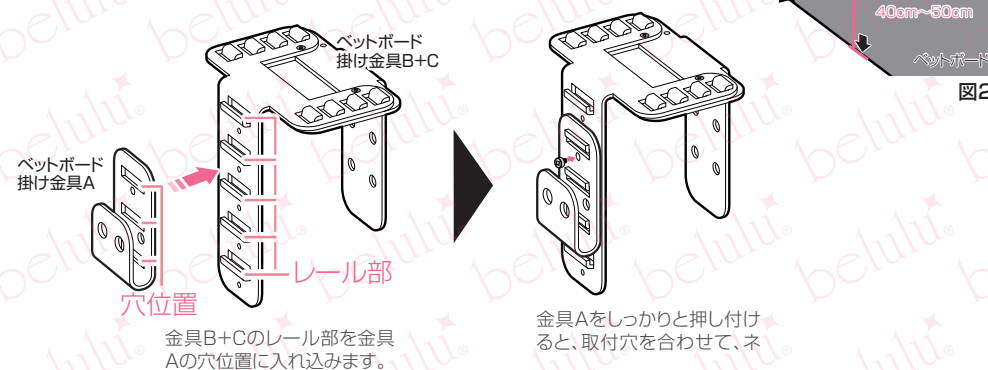

- ④装着した金具セットを本体下側の金具差し込み口に差し込みます。

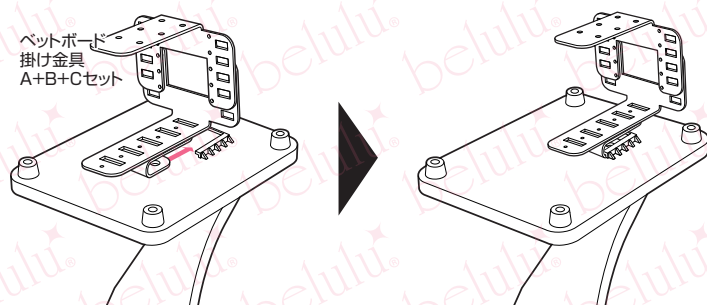

- ⑤図2のようにベットボードに掛けると、完成です。

操作方法

音声のON/OFF

- 照射する前に、**(+)**と**(-)**を同時に2秒程長押しすると、音声のON/OFFが調節できます。

パネル表示

音声提示ON

音声提示OFF

IPL機能のON/OFF


- 照射する前に、**(R)**と**(Y/G)**を同時に2秒程長押しすると、IPL機能のON/OFFが調節できます。

赤色、青色、黄色、緑色LEDと赤外線線のON/OFF

- 通常モードで、照射する前に、**(R)**を押すと、赤LED機能のON/OFFが調節できます。
(R)を2秒程長押しすると、赤外線機能のON/OFFが調節できます。
(B)を押すと、青LED機能のON/OFFが調節できます。
(Y/G)を押すと、黄色LED機能のON/OFFが調節できます。
(Y/G)を2秒程長押しすると、緑色LED機能のON/OFFが調節できます。

モードの設定

- 待機状態で、**(+)**を押すごとに、モード表示マークが下記の順番に切り替わります。

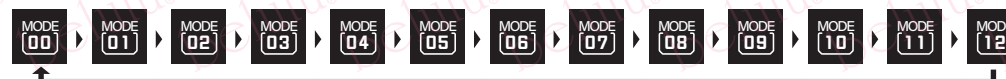

※MODE00は通常(手動)モードです。

※MODE01~MODE12全部自動モードです。自動モードの内容をP.7に参考ください。

自動モード

- 残り時間が0になると、LEDが自動で消灯します。
●モードによって照射時間が異なります。
また、自動モードは照射時間が決まっているため、時間設定はできません。
●モードを変更したい場合は、一度LED照射ボタン押ししてLEDを消灯し、再度設定してください。



待機状態で、時間調整/モード切替ボタンでmode01~mode12の中に、行いたいケアモードを選択ください。
※自動モードの内容をP.7に参考ください。



IPL機能の稼働することをお好みに選択してください。
LED照射ボタンを押すとLEDが発光し、一定時間経過するとLEDカラーが自動で消灯します。

【IPL機能の設定方法】

- (R)** **(Y/G)** 赤LED/赤外線選択ボタンと黄色/緑色LED選択ボタンを同時に2秒程長押しと、IPL機能のON/OFFが調節できます。

※各モードの残り時間やLEDカラーの組み合わせは、予告なく変更になる場合がございます。

通常(手動)モード



① 待機状態で、時間調整/モード切替ボタンで「MODE00」



② LED照射/操作ボタンを押して、残り時間の表示マークが点滅し、通常モードに入ります。




③ IPL機能の稼働することや、お好みのLEDカラーを選択してください。

【LED機能の設定方法】



赤LED/赤外線選択ボタンを押すと、液晶パネルに赤LED表示マークが点灯となり、赤LED機能が選択されます。

もう一度押すと、赤LEDの表示マーク(R)が消えて、赤LED機能がオフになります。

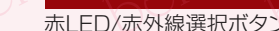

赤LED/赤外線選択ボタンを**2秒程長押し**すと、液晶パネルに赤外線表示マークが点灯となり、赤外線機能が選択されます。

もう一度**長押し**すると、赤外線の表示マーク(IR)が消えて、赤外線機能がオフになります。



青LED選択ボタンを押すと、液晶パネルに青LED表示マークが点灯となり、青LED機能が選択されます。

もう一度押すと、青LEDの表示マーク(B)が消えて、青LED機能がオフになります。



黄色/緑色LED選択ボタンを押すと、液晶パネルに黄色LED表示マークが点灯となり、黄色LED機能が選択されます。

もう一度押すと、黄色LEDの表示マーク(Y)が消えて、黄色LED機能がオフになります。



黄色/緑色LED選択ボタンを**2秒程長押し**すと、液晶パネルに緑色LED表示マークが点灯となり、緑色LED機能が選択されます。

もう一度**長押し**すると、緑色LEDの表示マーク(G)が消えて、緑色LED機能がオフになります。

【IPL機能の設定方法】



赤LED/赤外線選択ボタンと黄色/緑色LED選択ボタンを**同時に2秒程長押し**すと、IPL機能のON/OFFが調節できます。



④ 時間調整/モード切替ボタンで時間を設定してください。(1～60分の範囲内で、1分刻みで設定可能)



⑤ お好みに設定完了すれば、LED照射/操作ボタンを押すとLEDが発光し、カウントダウンが始まります。

●残り時間が0になると、LEDが自動で消灯します。

●LEDカラーを変更したい場合は、一度LED照射ボタン押してLEDを消灯し、再度設定してください。

自動モード内容の説明

※どのモードでも、IPL機能のON/OFFがお好みに設定できます。

※どのモードでも、残り時間が0になると自動的に消灯します。



MODE1：エイジングケア

赤色LEDと赤外線を組み合わせることで、年齢に応じた深いお悩みにアプローチできます。コラーゲン再生を促進すると共に様々な肌細胞を活性化することで、血流やリンパの流れを促進し、シワを目立たなくします。



MODE2：美白ケア

赤色、緑色、黄色LEDを組み合わせることで、色素沈着やくすみ、黄ぐすみなどの問題を改善します。また、ニキビ跡の軽減にも効果があります。透明感や明るさを実感します。



MODE3：リフトアップ&美白ケア

赤色、緑色、黄色LEDと赤外線を組み合わせることで、肌の弾力を回復させ、美白の同時に毛穴を引き締め、肌のくすみとたるみを改善します。



MODE4：保湿ケア(保湿美容液やシートマスクと合わせて使用することがおすすめ)

赤色、黄色LEDと赤外線を組み合わせることで、肌に負担をかけず、代謝能力を高めることができます。これにより、使用した美容液などの吸収を促進し、保湿効果を最大限に引き出します。



MODE5：皮脂ケア

青色、赤色、黄色LEDと赤外線を組み合わせることで、皮脂の過剰分泌を改善します。これにより、毛穴の詰まりが解消され、キメの整った肌を目指せます。



MODE6：ニキビケア

青色LEDと赤外線を組み合わせることで、肌バリアを正常に保つための水分と油分のバランスを整え、肌質改善とニキビ改善・予防につながります。



MODE7：鎮静ケア

黄色LEDにより、肌の赤み、炎症、および突発的なアレルギーを抑制し、鎮静させます。リンパの活性化、赤ら顔に有効で、傷ついた細胞の修復を促進します。



MODE8：日焼け後のアフターケア

赤と黄色LEDを組み合わせることで、肌を鎮静させる効果があります。メラニン生成を抑制し、シミや肌が黒くなるのを予防できます。日焼け後のアフターケアには最適!



MODE9：頭皮ケア

赤色LEDには育毛促進効果があります。青色LEDと組み合わせることで、皮脂の過剰分泌を抑える、頭皮にアプローチできます。育毛に適した環境を作ります。



MODE10：首の横ジワケア

様々な肌細胞が活性化し、新陳代謝とリンパの流れが促進されます。その結果、肌の弾力が回復し、メラニン色素が減少することによって、シワが薄くなります。



MODE11：ボディークア

肌細胞の新陳代謝が促進されることにより、妊娠線、肥満線などのストレッチマークが薄れ、目立ちづらくなっていきます。



MODE12：トータルケア

全機能モードです。