

清洁及保管

●关机后若接触皮肤的检测触头有污垢，可用拧干的湿布或消毒湿巾擦拭干净保存。

●请避开脏乱、多尘、高温高湿的地方，请放在儿童触及不到的地方保管。

关于保修期内的维修

保修期内为免费维修。

【维修】
订单号 姓名 购入商品 购入时间 故障状况

请提供以上信息，通过电话或者邮件联系本店。

E-mail : support@kireido.com

电话：0120-09-5121

※不限于使用次数，购买超过三个月，如需修理，来回运费由客人承担。

※已过保修期的产品如需修理，将根据实际修理状况进行收费。

※如有不明之处，请联系本公司。

日本售后地址 神奈川県横浜市神奈川区仲大寺2-29-25 謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理工場 TEL:0120-09-5121

广西壮族自治区南宁市西乡塘区龙腾路80号台北中心

丽丽售后服务部 0771-2875241

【保修书】

本保修书承诺按照所规定内容进行保修。

购买后在保修期内发生故障，请参照本说明书进行维修。

(维修规定)

1. 在保修期内按照使用说明书操作出现故障的情况可以进行免费维修。

2. 在保修期内，顾客需要维修时请填写本保修书并将其产品和保修书按照规定提出维修。

3. 下列情况，即使在保修期内，也不属于免费维修。

a. 因使用不当，自行修理、改造而造成的故障及损伤。

b. 购买后因移动、跌落及运输碰撞造成故障。

c. 火灾、地震、雷击等自然灾害、异常电压等造成的故障及损伤。

d. 保修书上未出现的情况。

e. 保修书上未填写客户姓名、购买日期等或是文字修改的情况。

■型号： ■品名：belulu SkinChecker

■修理保修期限：自签收日起1年内(使用次数不限)

■姓名：_____

■地址：_____

■订单编号：_____

购买平台：ビューティフルエンジェル株式会社

购买时间：年月日印

●若通过网络平台购买产品，因客户基本信息以及购买信息均在店铺保管，[购买日] [店铺印章]即使未填写，也不影响保修。但咨询或者受理维修时需要客户提供订单编号，请您务必保留好您购买时的订单编号。

●产品本体修理会按照本保修书条款执行。因不限制客户法律上的权利，关于已过保修期的商品修理事项，若有不明之处，请咨询本店。

●购入后初次使用或长期未使用的情况，若电量减少请及时充电。

●将充电线的充电接口插入机身的充电口处，USB插头插入电脑或AC适配器的USB端口。

●充电指示灯亮红灯则表示正在充电。

※充电过程中机身会有轻微发热，属于正常现象。

●充电时间及工作时间，因使用频率不同而不同。

●充电指示灯亮绿灯则表示充电完成，请注意及时拔掉充电线。

●请勿边充电边使用。充电完成后请及时拔掉充电线。


■充电时室温应在15~30℃之间，低温情况下充电会导致电池寿命的缩短，请在适宜室温下进行充电。在低于0℃的环境中充电速度可能会变慢。

■为保护内置电池，即使长期不用，也要保持每月充电一次，防止过度放电。

■如果正常充电使用，但使用时间短，说明电池老化。

充电

液晶显示屏右下角，电量表示为3个阶段。电量为0时，请及时充电。

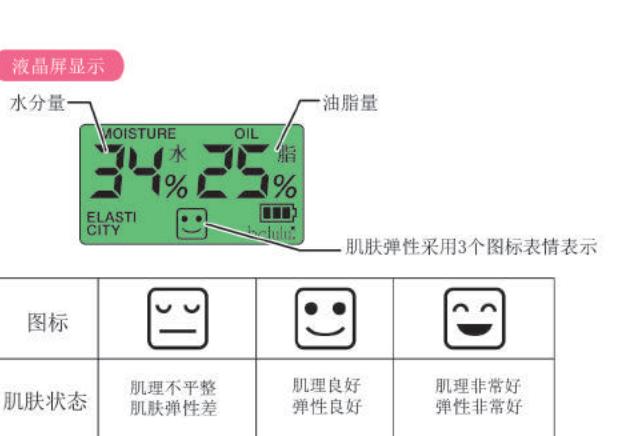

液晶屏显示

水分量 油脂量



肌肤弹性采用3个图标表情表示

图标	肌理不平整 肌肤弹性差	肌理良好 弹性良好	肌理非常好 弹性非常好


【肌肤状态与液晶屏背光色】

根据对肌肤的水油比例、弹性、光滑度的综合判断，肌肤状态良好时为绿色背光，状态较差时为红色背光。

※以下记载数据为举例说明。根据测量结果，数据及肌肤状态会改变。




水油平衡及保湿度很好，肌肤弹力处于理想状态。结合季节及肌肤状态护理，继续保持此状态。

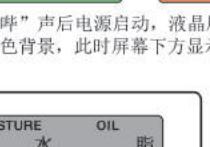

严重缺水状态，水油不平衡，肌肤暗沉无弹力。首要进行补水保湿。再涂抹面霜，防止水分蒸发。



油脂分泌过剩，属于内部干燥。建议进行深层补水。一味吸油，反而起到相反效果。

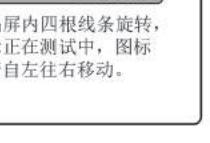

油脂分泌旺盛，属于油性肌肤。建议先控油，再选用清爽型化妆水进行保湿护肤。

belulu Skin Checker



使用说明书

感谢您购买本公司产品，使用前请仔细阅读本说明书。

本说明书附带产品保修凭证，请妥善保管。

使用前须知

●使用期间如果本品出现破损、故障、变形或电池异常，请停止使用。

●若在使用过程中产生冒烟、异味、发热异常等情况请立即切断电源并停止使用。

●手湿的情况下，请勿接触检测探头或电池电极部位。

●请勿把本品置于例如暖炉旁等高温环境。

●请勿在双手潮湿、高温、高湿、多尘等环境下使用本产品。

●本品不具备防水功能，请勿在浴室等高湿度环境下使用本品，否则可能造成灼伤或触电，并可能造成仪器故障。

●在使用本品后皮肤出现异常或不适，请立即停止使用并就医或联系本公司。

●请认真阅读【注意事项】，符合以下人群的请勿使用本品。

●请勿自行拆解，改造本产品，由此造成的产品故障或损坏本公司概不负责。

●皮肤薄弱处请适度使用本品，切勿过度使用。

●请勿跌落本品，或让产品受到强烈撞击。

●长时间不使用的状态下，请取出电池。

●请勿用水直接冲洗清洁，如需清洁请用半湿软布擦拭。请勿使用油剂、稀释剂等化学溶剂擦拭本品。

●因违反上述警告、注意事项造成的损伤、故障、破损等问题，本公司恕不负责。

【注意事项】

※本产品通过向人体发出微电流进行检测，如果在体内安装有人工心脏等体内器械的人群请勿使用本品。

(这种电流十分微弱几乎无感觉，对身体无害的，对孕妇和胎儿均无影响。)

※皮肤极度干燥时或肌肤有炎症时请勿使用本品。

belulu肌肤检测仪功能简介

belulu肌肤检测仪是可以轻松测定肌肤状态的家庭用肤质测定器。

液晶屏让测试结果一目了然

通过大号的文字和简单易懂的图标可反馈测试者的皮肤状态。

不同的液晶屏背光色表示不同的皮肤状态。

水分/油分测试

将测试探头紧贴测试的部位，水分和油分的具体结果会以百分比(%)的形式显示。

肌肤弹力测试

测试肌肤弹力，测定结果分为三个阶段表示。


测试数据自动保存功能

本品可以自动保存10次的测试数据。

通过按下数据检查按键来查看最近10次的测试数据，可以更好地掌握肌肤状态的变化。


产品规格

*产品以实物为准。

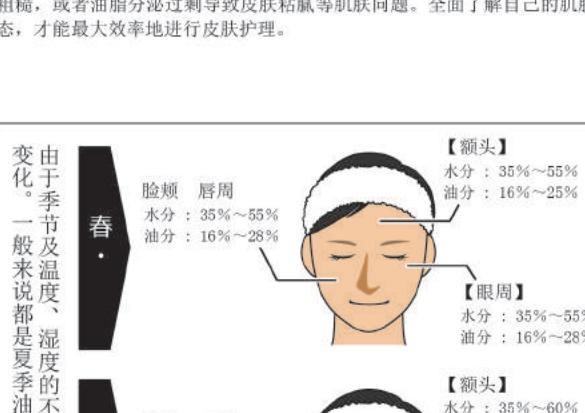

【肌肤水油平衡标准数值】

肌肤水油比例的标准数值为8:2，美容界普遍认为肌肤水分保持在40~50%是最好的状态。若超出这个数值，或者肌肤水分不足，则容易引起皮肤干燥粗糙，或者油脂分泌过剩导致皮肤粘腻等肌肤问题。全面了解自己的肌肤状态，才能最大效率地进行皮肤护理。

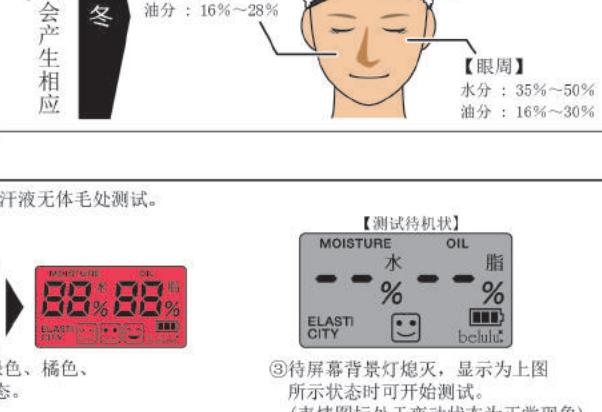

测试肤质

为保证测试结果准确，请在常温环境下卸妆后，在干燥无汗液无体毛处测试。

①拔下盖子，按一下电源按钮。

②“哔”声后电源启动，液晶屏依次变换绿色、橘色、红色背景，此时屏幕下方显示3个表情状态。

④将测试探头轻触肌肤，5秒后听到“哔”音，测试结束。

液晶屏内四根线条旋转，表示正在测试中，图标表情自左往右移动。

如果探头与肌肤接触不充分，测试完后屏幕显示为【Err】，这种情况下请按一下电源键，再次检测即可。

关机状态下，长按电源键3秒以上即可开机。
※若开机状态下无任何操作，1分钟后将自动关机。

查看自动保存的测试数据

①开机状态下或在测试完毕后，按该按键可查看之前保存的测试数据。

每按一次「▲」键，升序表示测试结果。(最多保存10个数据)

每按一次「▼」键，升序表示测试结果。(最多保存10个数据)

●测试结果超过10个的情况，以往数据按顺序被新数据代替。

●数据按键上下同时按3秒以上，可删除测试数据。